






Ref. 080221

ECLIPSE I

ES.....	5	Manual original
EN.....	7	
FR.....	9	

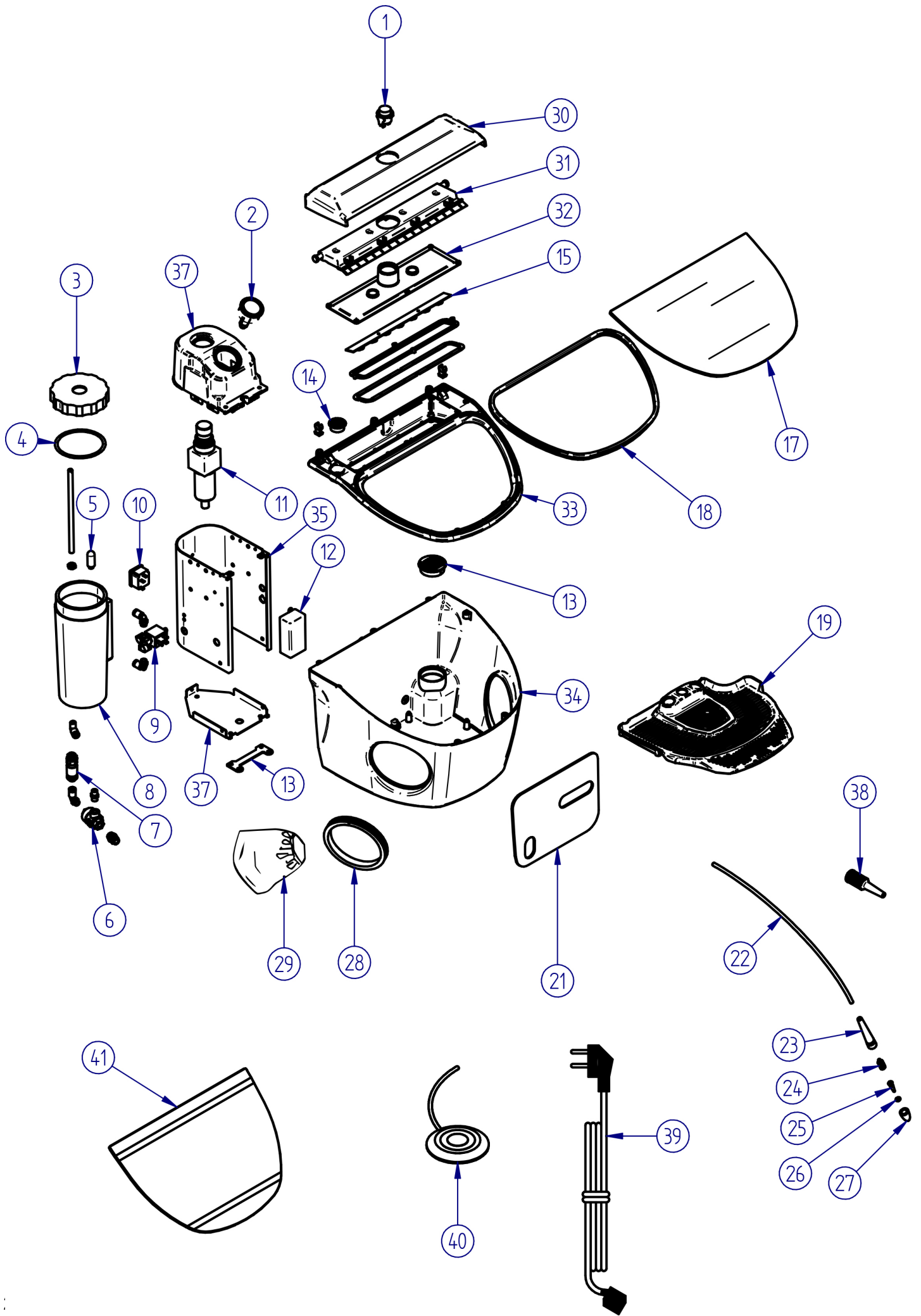

Nº	Ref.	CONCEPTO	DESCRIPTION
1	080233-02	Interruptor general	Main switch
2	080220-11	Manómetro	Pressure gauge
3	080262-24	Tapa tanque	Tank lid
4	080520-24	Junta tórica tapa	Lid O-ring
5	080262-13	Filtro de tanque	Tank filter
6	080242-35	Escape rápido	Quick escape
7	080259-12	Filtro en línea	Line filter
8	080262-14	Tanque	Tank
9	080253-10	Electroválvula 24V	Electrovalve 24 V
10	080490-06	Base de conexión	Conection base
11	080240-14	Manorreductor	Pressure control
12	080614-20	Fuente de alimentación 24V	Power source 24 V
13	080220-10	Rejilla ventilación grande	Large ventilation grill
14	080214-07	Rejilla ventilación pequeña	Small ventilation grill
15	080214-04	Barra de LED	LED bar
16	080214-05	Difusor	Difusser
17	080214-02	Cristal	Glass
18	080093-10	Burlete de goma	Rubber strip
19	080220-02	Bandeja	Tray
21	080220-13	Sufridera de goma	Rubber
22	000100	Tubo Ø4x6	Hose Ø4x6
23	080262-31	Cuerpo lapicero	Gun body
24	080262-32	Pieza intermedia lapicero	Gun intermediate part
25	080240-15	Boquilla 0,75 mm 50 micras	0,75 mm 50 micron nozzle
	080240-12	Boquilla 1,00 mm 150 micras	1,00 mm 150 micron nozzle
	080240-13	Boquilla 1,25 mm 250 micras	1,25 mm 250 micron nozzle
26	080262-28	Junta tórica	O-ring
27	080262-33	Punta de lapicero rojo	Gun point (red)
	080262-38	Punta de lapicero azul	Gun point (blue)
28	080270-30	Brida	Flange
29	080242-28	Manguito	Sleeve
30	080214-01B	Tapa cristal	Glass lid
31	080214-01C	Soporte cristal	Glass support
32	080214-01D	Soporte interruptor	Switch support
33	080214-01E	Marco cristal	Glass frame
34	080220-01	Cuerpo principal	Main body
35	080220-04	Chapa soporte superior	Upper support sheet
36	080220-05	Chapa soporte inferior	Lower support sheet
37	080220-03	Soporte manómetro	Pressure gauge support
38	050221	Soplador de aire	Air blower
39	000250	Cable 230 V	Cable 230 V
	000252	Cable 115 V	Cable 115 V
40	080242-33	Pedal	Pedal
41	080220-12	Protector cristal (10 U.)	Glass protector (10 units.)

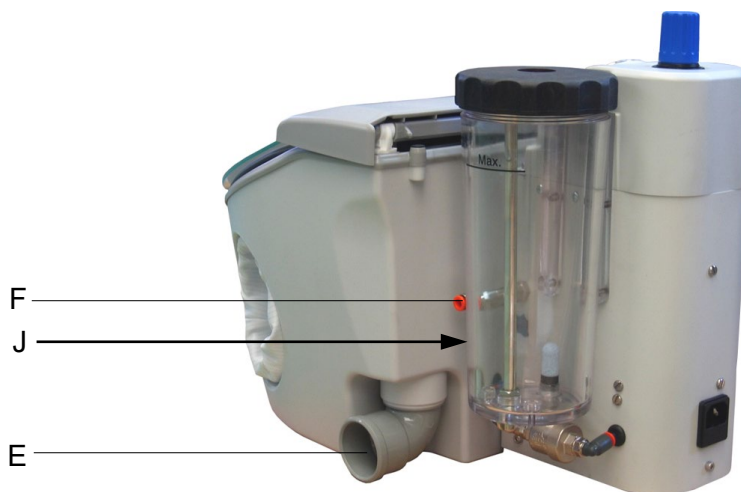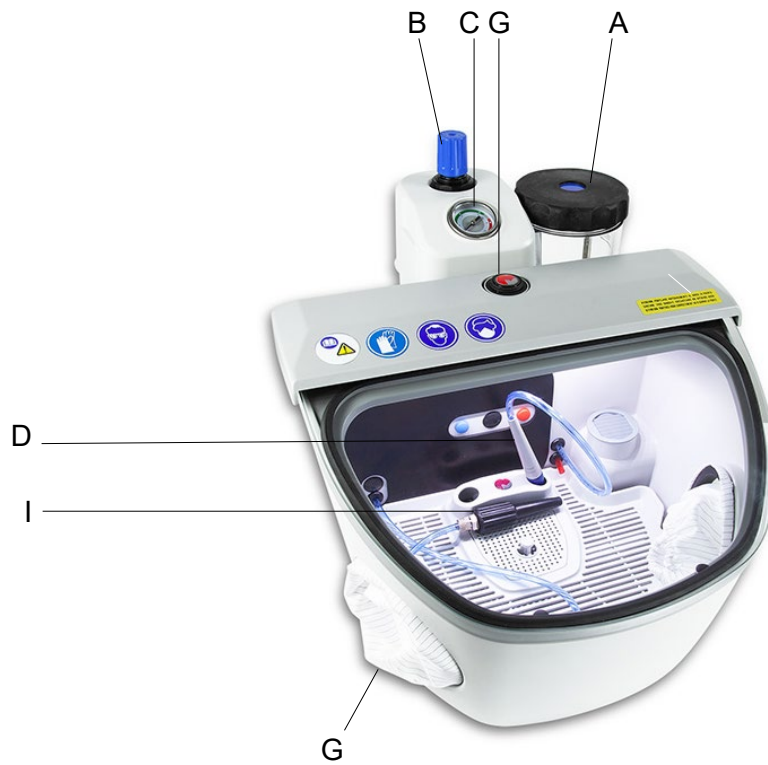

A	Vaso depósito de esmeril / <b>Tank</b> / Réservoir de sables
B	Manorregulador vaso / <b>Pressure regulator</b> / Mano-régulateur
C	Manómetro de presión / <b>Pressure gauge</b> / Manomètre de pression
D	Lápiz de microarenado / <b>Microblasting gun</b> / Crayon de sablage
E	Tubo de entrada aspiración exterior / <b>External suction inlet tube</b> / Tube d'entrée de l'aspiration
F	Entrada aire a presión / <b>Pressure air inlet</b> / Entrée d'air sous pression
G	Interruptor luz / <b>Light switch</b> / Interrupteur de la lumière
H	Manguitos de tela / <b>Sleeves</b> / Manchons
I	Soplador de aire / <b>Air blower</b> / Soufflette
J	Conexión de pedal / <b>Pedal connection</b> / Connexion pédale

La chorroadora de arena Eclipse está especialmente diseñada para el microchorreado de pequeñas piezas pertenecientes al sector de la prótesis dental. Para conseguir unas óptimas prestaciones y rendimiento del aparato, le recomendamos que lea detenidamente las siguientes instrucciones:

## Instalación

- Desembale cuidadosamente el aparato.
- Elija para el emplazamiento del aparato una superficie rígida, plana, alejada de fuentes de vibraciones o de calor. También es importante que el ambiente no sea excesivamente húmedo. Un exceso de humedad podría compactar las partículas de esmeril del interior de la cabina, produciendo obstrucciones en las boquillas de microchorreado. Como última recomendación, sitúe el aparato a una altura que le permita manipular con comodidad los objetos en el interior de la cabina.
- Acople el tubo de conexión a la red de aire suministrado con el aparato, al racor de entrada situado en la parte posterior de la máquina. El otro extremo debe conectarse a una toma de aire a presión alimentada por un compresor de al menos 6 bares de presión y un caudal mínimo de 100 litros/minuto.
- Conecte el enchufe eléctrico a una toma de corriente de 115-230 V, 50/60 Hz provista de toma de tierra.
- Conecte el tubo del pedal de accionamiento en la boquilla de acople situada en la parte lateral derecha del aparato. Luego sitúe el pedal al alcance del pie y en un emplazamiento cómodo para su posterior manipulación.
- Retire los tapones roscados de los módulos de microchorreado y rellene los depósitos con esmeril. En esta operación, **no sobrepase nunca las  $\frac{3}{4}$  partes de la capacidad total del vaso**. Vuelva a roscar los tapones de los depósitos asegurándose de que el cierre es perfectamente estanco.
- La máquina se suministra de fábrica una boquilla de  $\varnothing$  1 mm (hasta 150 micras).

## Regulación de presiones

La presión de soplado de las pistolas de chorreado puede ser regulada a voluntad en función de la naturaleza y características del trabajo. Para realizar el ajuste actúe sobre el manorregulador situado en la parte superior la máquina. Tire hacia arriba del pomo y gírelo hasta alcanzar la presión deseada. La máquina dispone de un manómetro de control, con el que resulta sencillo seleccionar la presión de trabajo. Después de ajustar la presión, bloquee el pomo de regulación bajándolo hasta su posición inicial.

## Conexión a la aspiración

La cabina de microchorreado debe emplearse siempre conectada a una aspiración forzada. Para ello, dispone de un tubo de salida situado en el lateral superior izquierdo. La aspiración que utilice tiene que ser capaz de crear una ligera depresión en el interior de la cabina, que permita la circulación suave y continuada hacia el tubo de salida de las partículas de polvo que se generen.

Según las necesidades y geometría de la unidad exterior de aspiración, es posible utilizar el tubo acodado de PVC suministrado junto con la máquina para adaptarse a cada necesidad en concreto.

## Uso de aparato

Para realizar un correcto microchorreado de piezas le recomendamos:

1. Abra la tapa de la cabina e introduzca la pieza que desea manipular en su interior. También es posible introducir las piezas a través del orificio del manguito. Compruebe que el nivel de esmeril en los vasos es el adecuado.
2. Cierre la tapa de la cabina asegurándose de su correcta estanqueidad (asiento del cristal en su marco).
3. Protéjase adecuadamente: utilice gafas protectoras, guantes y mascarilla.
4. Ponga en marcha la aspiración forzada. Para una mejor visión de la pieza, si lo desea, también puede encender la luz del interior de la cabina accionando el interruptor.
5. Seleccione por medio del conmutador general el vaso que desea emplear. Mediante el código de colores empleado le resultará muy sencillo reconocer en cada momento cuál es el vaso activo. Asegúrese de que el conmutador queda posicionado totalmente hacia la derecha o la izquierda y no en el centro (no saldría arena).
6. Recoja del interior de la cabina la pistola móvil que ha seleccionado. El color del portaboquillas de la pistola se corresponde con el color que aparece en cada uno de los tapones de los vasos. Cuando tenga la pistola seleccionada, pise el pedal de accionamiento. La arena comenzará a fluir.
7. Oriente el chorro de arena correctamente para evitar que la estela incida directamente en las paredes de la cabina. El chorro de arena podría deteriorar la cabina. Si desea realizar alguna prueba de presión o intensidad del chorro, puede orientarlo hacia la sufridera de goma situada en la parte interior izquierda de la cabina.
8. Una vez finalizada la operación de chorreado, suelte el pedal y la arena dejará de fluir por las boquillas. Así mismo, las descargas neumáticas actuarán de forma inmediata aliviando la presión de los vasos. Detenga entonces la aspiración y abra la tapa de la cabina para retirar la pieza.

## Mantenimiento y limpieza

Para garantizar una larga vida del aparato, le recomendamos:

- Utilice siempre esmeril de calidad reconocida. **Talleres Mestraitua, S.L.** recomienda el empleo de esmeriles **MESTRA**. Las pistolas móviles de microchorreado que tienen un diámetro de boquilla 1,25 mm y 1 mm pueden soplar respectivamente esmeriles de 250 y 150 micras de diámetro máximo. La pistola de 0,75 mm de diámetro puede soplar esmeriles de 75 micras de diámetro máximo (consulte la tabla).
- Emplee preferentemente compresores de aire de pistón seco. La presencia de partículas de aceite en el aire de soplado produciría grumos de arena que pueden llegar a obstruir las boquillas de la pistola.
- No llene nunca los depósitos de los módulos con restos de esmeril depositado en el suelo de la cabina. La presencia de partículas de gran diámetro podría obstruir las boquillas. Además, este polvo se encuentra también contaminado con partículas erosionadas de las piezas chorreadas.
- Cada 5000 o 10000 maniobras de cada vaso (lo que se corresponde con un periodo de tiempo de 1 ó 2 años) es necesario sustituir los filtros silenciadores situados en el interior de los vasos. Cada 500 o 1000 horas (depende mucho de la calidad y metraje de la arena empleada) es necesario sustituir los elementos filtrantes de los filtros situados a la entrada de presión de cada vaso. Emplee siempre repuestos originales **MESTRA**.
- Para evitar el desgaste por abrasión de las paredes interiores de la cabina de microchorreado, siempre que trabaje con las pistolas, no oriente el chorro de esmeril de forma directa hacia las paredes de la cabina.
- Periódicamente retire el esmeril del interior de la cabina. Para ello resulta muy práctico el tapón de vaciado situado en el interior de la cabina.
- Periódicamente purgue el agua que ha podido condensarse en el filtro de entrada de aire del aparato. La cabina dispone de una ventana que permite ver el nivel de agua en el filtro.
- Para realizar la limpieza general del aparato, basta con utilizar un paño suave.
- En caso de obstrucción de las pistolas, desmonte el portaboquillas y extraiga la boquilla de su interior. Desatasque la boquilla soplando en sentido contrario al flujo de aire, o en caso necesario empleando un alfiler o un alambre fino, y vuelva a montarla en la pistola.
- Las pistolas de los módulos de microchorreado del modelo Eclipse se suministran de fábrica con boquillas de 1 y 1,25 mm de diámetro. Sin embargo, también es posible acoplar a este modelo boquillas de 0,75 mm (consulte a su distribuidor **MESTRA**).
- El diámetro máximo de las partículas de esmeril en función del diámetro de la boquilla aparece referenciado en la siguiente tabla:

DIÁMETRO MÁXIMO DE PARTÍCULA EN FUNCIÓN DE LA BOQUILLA	
Boquilla	Diámetro partícula
1,25 mm	Hasta 250 micras
1 mm	Hasta 150 micras
0,75 mm	Hasta 75 micras

## Precauciones

- No sobrepase nunca los 6 bares de presión. La presión óptima de trabajo se encuentra comprendida entre los 2 y los 5 bares.
- Trabaje siempre con la tapa de la cabina cerrada, y adecuadamente protegido. Emplee mascarilla y gafas de protección.
- Conecte el tubo de salida de la cabina a una aspiración.
- En caso de rotura o deterioro de los manguitos de protección, sustitúyalos de inmediato.
- Evite que los niños o personal no cualificado manipulen el aparato.
- Utilice como esmeril únicamente materiales de calidad garantizada (se recomienda el empleo de esmeriles **MESTRA**). Esmeriles de muy baja calidad pueden llegar a resultar tóxicos por inhalación y producir obturaciones en las boquillas de soplado.
- Conecte el cordón de alimentación a una toma de corriente de 115-230 V, 50/60 Hz provista de toma de tierra.
- En caso de apreciar fugas en el circuito de aire a presión, consulte de inmediato a su instalador.
- Antes de comenzar cualquier trabajo, asegúrese de que los tapones de los módulos de microchorreado se encuentran perfectamente cerrados.

## Características técnicas

Alto:.....	330 mm
Ancho:.....	360 mm
Fondo:.....	450 mm
Peso:.....	5 kg
Presión trabajo:.....	2-6 bar
Tensión:.....	115-230 V, 50/60 Hz
Consumo:.....	7 W
Conexión aire:.....	Ø6 mm

## Declaración de conformidad UE

La empresa **Talleres Mestraitua S.L.**  
con domicilio social: Txori-erri Etorbidea, 60  
48150 Sondika - Bilbao - España

por la presente declara que el producto

Chorreadora de arena Eclipse I 080221

cumple con los requisitos de las siguientes directivas:

2014/35/UE (baja tensión)

2014/30/UE (compatibilidad electromagnética)

Ignacio Mestraitua  
Director Gerente  
Sondika, 25.02.2025

The Sandblaster Eclipse is specially designed for precision-blasting small parts used in the dental prosthesis industry. For optimum output and performance of this unit, we advise you to read the following instructions with great care.

## Installing the unit

- Carefully unpack the unit.
- A rigid flat surface must be chosen for installation of the unit, at a safe distance from any sources of vibrations or heat, and the surrounding atmosphere must not contain excess moisture, since this could cause compacting of the emery particles inside the chamber, and lead to obstructions in the microblasting nozzles. The unit must also be positioned on a level which allows objects inside the chamber to be handled with ease.
- Hook up the air connection tube supplied with the unit to the connection at the rear of the unit. The other end must be fitted to a compressed air facility, with at least 6 bars of pressure and minimum flow rate 100 litres/minute.
- Hook up the electric plug to 115-230 V, 50/60 Hz, which must be earthed.
- Connect the pedal drive tube to the coupling nozzle on the right-hand side of the unit. Then position the pedal for comfortable foot operation.
- Unscrew the sandblasting module covers (A), and fill the tanks with emery. During this operation, **it is most important not to fill the tanks to more than ¾ of their capacity.** Put the covers back on, and ensure they have been screwed on tightly.
- The machine is supplied with one nozzle: Ø 1 mm (up to 150 microns).

## Regulating the pressure

The blowing pressure of the blasting guns can be regulated depending on the nature and characteristics of the operation to be carried out. Use the pressure-adjustment knob (B) on the top of the unit – pull the knob upwards, and rotate it to the required pressure. The unit has a pressure gauge (C) for easy selection of operating pressure. When the pressure has been adjusted, lock out the regulator knob by pushing it down to the initial position.

## Connection to the suction unit

The microblasting chamber must be permanently connected to forced suction via an outgoing tube on the top left of the unit (G). Suction must be able to produce a slight depression inside the chamber for continuous gentle circulation of the powder generated towards the outgoing tube.

Depending on the requirements and geometry of the external suction unit, it is possible to use the PVC elbow fitting supplied for specific needs.

## Using the unit

The following operations are recommended for proper precision-blasting:

1. Open the lid of the chamber, and put in the part you wish to blast. Parts may also be placed inside the chamber via sleeve (F). Check there is enough emery in the tanks.
2. Close the lid of the chamber, and ensure it is tightly shut (the glass should fit snug against the housing).
3. Suitable protection gear must be used: goggles, gauntlets and a mask.
4. Start up the forced suction facility. The light in the chamber may be activated for a better view of the part, if required, using switch (D).
5. Use the tank switch (E) to select the tank. The colour coding system used makes it easy to see which is the active tank at all times.
6. Pick up the mobile gun selected inside the chamber. The colour of the gun's nozzle-holder matches the colour on the tank covers (red, blue, yellow, green). When the gun has been selected, press the drive pedal to begin sandblasting.
7. Direct the blast carefully to prevent the stream hitting the sides of the chamber directly, since this could damage the chamber. If you wish to test the blasting pressure or strength, direct the stream at the rubber dolly inside the chamber.
8. After the blasting operation, release the pedal, stopping the sand flow and activating immediate air discharge to relieve pressure in the tanks. Then switch off the suction unit, open the lid of the chamber, and take out the part.

## Maintenance and cleaning

To ensure a lengthy service life, we recommend the following:

- Always use approved quality emery - **Talleres Mestraitua, S.L.** recommends **MESTRA** emery. The mobile blasting guns with nozzle diameters 1.25 mm and 1 mm can respectively blow emery of maximum diameter 250 and 150 microns. The mobile blasting gun with nozzle diameter 0.75 mm can blow a maximum diameter of 75 microns (see the table).
- It is preferable to use dry-piston air compressor units, since oil in the air could cause the sand to compact and obstruct the gun nozzles.
- Never fill the modules with emery deposited on the floor of the chamber, since particles with large diameters could obstruct the nozzles, and this emery is now contaminated with particles eroded off the parts blasted.
- The silencer filters inside the tanks must be replaced every 5000 or 10000 operations (around 1 or 2 years). The incoming filter fittings on each tank must be replaced every 500 or 1000 hours (much depends on the quality and metrage of the sand used). Original MESTRA spare parts must always be used.
- To prevent any abrasion wear on the walls inside the chamber, take care not to direct the stream of emery directly onto the walls.
- Clean out the emery inside the chamber on a periodic basis, using the practical emptying plug inside.
- Any water which has condensed inside the incoming air filter must be bled out regularly. The chamber has a window to view the amount of water in the filter.
- Use a dry cloth or a cloth moistened with soapy water for general cleaning of the unit.
- If the guns become obstructed, remove the nozzle-holder and take out the nozzle. Unblock the nozzle by blowing in the opposite direction to the flow of air, or use a pin or a thin wire to unblock it, and then refit the attachment.
- The blasting module guns on the 2-tank Eclipse model are supplied ex-works with nozzles 1 and 1.25 mm in diameter. 0.75 nozzles, however, may also be used with this model (consult your **MESTRA** distributor).
- The maximum diameter of emery particles in relation to nozzle diameter is shown in the table below:

MAXIMUM PARTICLE DIAMETER / NOZZLE	
Nozzle	Diameter
1.25 mm	Up to 250 microns
1 mm	Up to 150 microns
0.75 mm	Up to 75 microns

## Precautionary measures

- Never exceed 6 bars of pressure. Optimum working pressure is between 2 and 2 bars.
- Operations should always be carried out with the lid of the chamber closed, with suitable protection. Masks and goggles should be worn.
- Connect the chamber's outgoing tube to a suction facility.
- The protection sleeves (F) must be replaced immediately following any tearing or damage.
- Do not allow children or unqualified staff to operate the unit.
- Use only guaranteed-quality materials as emery (we recommend **MESTRA** emery). Poor quality emery may be toxic when inhaled, and may also cause obstructions in the blow nozzles.
- Hook up the power supply cable to 115-230 V, 50/60 Hz, earthed.
- Consult your fitter immediately if any leakages are observed in the compressed air circuit.
- Before carrying out any operation, first ensure that the micro blasting module covers are closed tightly.

## Technical characteristics

Height:	.....330 mm
Width:	.....360 mm
Length:	.....450 mm
Weight:	.....5 kg
Working pressure:	..... 2-6 bar
Voltage:	..... 115-230 V, 50/60 Hz
Power consumption:	..... 7 W
Air connection:	.....Ø6 mm

## Declaration of conformity UE

The firm **Talleres Mestraitua S.L.**  
with social address: Txori-erri Etorbidea, 60  
48150 Sondika - Bilbao - Spain

Hereby declares that the product

Sandblaster Eclipse I, Ref. 080221

Meets the requirements set out in the following directives:

2014/35/UE (low tension)

2014/30/UE (electro magnetic compatibility)



Ignacio Mestraitua  
Managing Director  
Sondika, 2025-02-25

La sableuse Eclipse est spécialement conçue pour le micro sablage de petites pièces pour la prothèse dentaire. Pour obtenir des performances optimales avec l'appareil, nous vous recommandons de lire attentivement les instructions suivantes :

## Installation

- Déballez soigneusement l'appareil.
- Choisissez une surface rigide et plane pour l'emplacement de l'appareil, loin des sources de vibrations ou de chaleur. Il est également important que l'environnement ne soit pas excessivement humide. Un excès d'humidité pourrait compacter les particules de sable ou de billes de verre à l'intérieur de des réservoirs, provoquant le colmatage des buses de sablage. En dernier lieu, placez l'appareil à une hauteur qui vous permette de manipuler confortablement les objets à l'intérieur de la cabine.
- Fixez le tube de raccordement au réseau d'air fourni avec l'appareil, au raccord d'entrée situé à l'arrière de la machine. L'autre extrémité doit être reliée à une prise d'air sous pression alimentée par un compresseur d'au moins 6 bars de pression et d'un débit minimum de 100 litres / minute.
- Branchez la fiche électrique sur une prise 115-230 V, 50/60 Hz mise à la terre.
- Branchez le tuyau de la pédale de commande au mamelon de couplage sur le côté droit de l'appareil. Placez ensuite la pédale dans un endroit confortable pour une utilisation ultérieure.
- Retirez les bouchons à vis des modules de micro-sablage et remplissez les réservoirs de sable. **Ne dépassez jamais les  $\frac{3}{4}$  de la capacité totale du réservoir.** Revissez les bouchons de réservoir en vous assurant que la fermeture est parfaitement étanche.
- Concernant le calibre des buses, la machine est livrée en usine avec les critères de couleurs et de diamètres de buses suivants :  
Bleu    Ø 1 mm    (jusqu'à 150 microns)

## Régulation de la pression

La pression de sablage des pistolets de sablage peut être réglée à volonté en fonction de la nature et des caractéristiques du travail. Pour effectuer le réglage, agir sur le régulateur de pression situé sur le dessus de la machine. Tirez sur le bouton et tournez-le jusqu'à ce que la pression désirée soit atteinte. La machine a un manomètre de contrôle avec lequel il est facile de sélectionner la pression de travail. Après avoir réglé la pression, verrouillez le bouton de réglage en l'abaissant dans sa position initiale.

## Connexion d'aspiration

La cabine de sablage doit toujours être utilisée reliée à une aspiration. Pour cela, elle dispose d'un tube de sortie situé sur le côté supérieur gauche. L'aspiration que vous utilisez doit pouvoir créer une légère dépression à l'intérieur de la cabine, ce qui permet une circulation douce et continue vers le tube de sortie des particules de poussière générées.

En fonction des besoins et de la géométrie de l'unité d'aspiration extérieure, il est possible d'utiliser le tube coudé en PVC fourni avec la machine pour s'adapter à chaque besoin spécifique.

## Utilisation de l'appareil

Pour effectuer un sablage correct des pièces, veuillez suivre les recommandations suivantes :

1. Ouvrez le capot de la cabine et insérez la pièce que vous souhaitez manipuler à l'intérieur. Il est également possible d'insérer les pièces à travers le trou du manchon. Vérifiez que le niveau d'émeri dans les verres est adéquat.
2. Fermez le capot de la cabine en s'assurant qu'il est bien fermé (la partie en verre rabattue).
3. Protégez-vous correctement : portez des lunettes de protection, des gants et un masque.
4. Démarrez l'aspiration forcée. Pour une meilleure vue de la pièce, si vous le souhaitez, vous pouvez également allumer la lumière à l'intérieur de la cabine en basculant l'interrupteur.
5. Sélectionnez la buse que vous souhaitez utiliser à l'aide du commutateur général. En utilisant le code couleur utilisé, il vous sera très facile de reconnaître à tout moment quel est la buse active. Assurez-vous que l'interrupteur est positionné complètement à droite ou à gauche et non au centre (aucun sable ne sortira).
6. Prenez le crayon de sablage que vous avez sélectionné à l'intérieur de la cabine. La couleur du porte-buse du crayon de sablage correspond à la couleur qui apparaît dans chacun des bouchons des réservoirs. Une fois le crayon sélectionné, appuyez sur la pédale de commande. Le sable sortira en pression.
7. Dirigez le sablage correctement pour empêcher le jet de frapper directement les parois de la cabine. Le sablage peut endommager la cabine. Si vous souhaitez tester la pression ou l'intensité du jet, vous pouvez le diriger vers la partie en caoutchouc situé à l'intérieur du côté gauche de la cabine.
8. Une fois le sablage terminé, relâchez la pédale et le sable cessera de s'écouler à travers les buses. De même, les décharges pneumatiques agiront immédiatement, soulageant la pression dans les réservoirs. Arrêtez ensuite l'aspiration et ouvrez le couvercle de la cabine pour retirer la pièce.

## Entretien et nettoyage

Pour garantir une longue durée de vie à l'appareil, veuillez suivre les recommandations suivantes :

- Utilisez toujours un sable, un oxyde d'alumine ou des billes de verre de qualité. **Talleres Mestraitua, S.L.** recommande l'utilisation des abrasifs **MESTRA**. Les pistolets de micro-sablage mobiles ayant un diamètre de buse de 1,25 mm et 1 mm requièrent respectivement des sables de 250 et 150 microns de diamètre. La buse de 0,75 mm de diamètre accueille des abrasifs de 75 microns de diamètre (voir tableau).
- Utilisez de préférence des compresseurs d'air à pistons secs. La présence de particules d'huile dans l'air soufflé produira des agrégats de sable qui peuvent obstruer les buses du pistolet.
- Ne jamais remplir le réservoir des modules avec du sable déjà utilisé. Des particules de grand diamètre pourraient obstruer les buses. De plus, cette poussière est également contaminée par des particules érodées des pièces sablées.
- Toutes les 5000 ou 10000 opérations de chaque cuve (ce qui correspond à une période de 1 ou 2 ans), il est nécessaire de remplacer les filtres silencieux situés à l'intérieur des cuves. Toutes les 500 ou 1000 heures (cela dépend beaucoup de la qualité et de la grosseur du sable utilisé), il est nécessaire de remplacer les éléments filtrants des filtres situés à l'entrée de pression de chaque cuve. Utilisez toujours des pièces de rechange d'origine MESTRA.
- Pour éviter une usure par abrasion des parois intérieures de la cabine de sablage, lorsque vous travaillez avec les pistolets, ne dirigez pas le jet de sable vers les parois de la cabine.
- Retirez périodiquement le sable utilisé de l'intérieur de la cabine. Pour cela, le bouchon de vidange situé sous la cabine est très pratique.
- Purgez périodiquement l'eau qui aurait pu se condenser sur le filtre d'entrée d'air de l'appareil. La cabine a une fenêtre qui vous permet de voir le niveau d'eau dans le filtre.
- Pour le nettoyage général de l'appareil, utilisez simplement un chiffon doux.
- En cas de colmatage des pistolets, retirer le porte-buse et retirer la buse de l'intérieur. Débouchez la buse en soufflant à contre-courant du flux d'air, ou si nécessaire à l'aide d'une épingle ou d'un fil fin, et remontez-la sur le crayon.
- Les crayons de sablage du module de l' Eclipse II sont fournis d'usine avec des buses de 1 mm et 1,25 mm de diamètre. Cependant, il est également possible de fixer des buses de 0,75 mm sur ce modèle (consultez votre revendeur MESTRA).
- Tableau correspondant au diamètre du sable par rapport à celui des buses de sablage :

DIAMETRE MAXIMAL DU SABLE EN FONCTION DE LA BUSE	
Buse	Diamètre du sable
1,25 mm	Jusqu'à 250 microns
1 mm	Jusqu'à 150 microns
0,75 mm	Jusqu'à 75 microns

## Précautions

- Ne dépassez jamais 6 bars de pression. La pression de service optimale est comprise entre 2 et 5 bars.
- Travaillez toujours avec le capot de la cabine fermé et correctement protégé. Portez un masque et des lunettes.
- Connectez le tube de sortie de la cabine à une aspiration.
- En cas de casse ou de détérioration des manchons de protection, remplacez-les.
- Ne laissez pas les enfants ou le personnel non qualifié manipuler l'appareil.
- N'utilisez que des abrasifs de qualité garantie (l'utilisation de abrasifs **MESTRA** est recommandée). Les abrasifs de mauvaise qualité peuvent même devenir toxiques par inhalation et provoquer le colmatage des buses des réservoirs et des buses.
- Branchez le cordon d'alimentation sur une prise de courant 115-230 V, 50/60 Hz mise à la terre.
- En cas de fuite dans le circuit d'air sous pression, consultez immédiatement votre installateur.
- Avant de commencer tout travail, assurez-vous que les Bouchons des modules de micro-sablage sont bien fermés

## Caractéristiques techniques

Hauteur: .....	330 mm
Largeur: .....	360 mm
Profondeur: .....	450 mm
Poids: .....	5 kg
Pression de travail: .....	2-6 bar
Alimentation: .....	115-230 V, 50/60 Hz
Consommation: .....	7 W
Connexion à l'air: .....	Ø6 mm

## Déclaration de conformité UE

L'entreprise **Talleres Mestraitua S.L.**

Sise : Txori-erri Etorbidea, 60  
48150 Sondika - Bilbao - España

Déclare par la présente que le produit

Sableuse Eclipse I, Réf. 080221

Répond aux exigences des directives suivantes :

2014/35/UE (basse tension)

2014/30/UE (compatibilité électro-magnétique)



Ignacio Mestraitua  
Directeur Gérant  
Sondika, 25.02.2025


**GARANTIA**

Todas las máquinas **MESTRA®** están garantizadas contra cualquier defecto de fabricación durante un año a partir del día de la compra. Para atender cualquier garantía, **MESTRA®** exigirá el haber rellenado el cupón adjunto con la fecha de venta y debidamente sellado por el establecimiento distribuidor.

Quedan excluidas de las garantías las averías provocadas por la mala instalación, o por el mal uso de la máquina.

Asimismo **MESTRA®** no realizará reparación alguna fuera de su taller y se exime de los gastos de transporte que ello ocasione.

Las reparaciones hechas en casa del cliente, sean o no en garantía, quedan encomendadas al servicio técnico propio del distribuidor que haya efectuado la venta o bien a sus técnicos contratados.


**GUARANTEE**

All **MESTRA®** units are guaranteed against every defect in manufacturing for a period of one year from date of purchase. Prior to honouring a guarantee, **MESTRA®** will require that the attached coupon be filled in with date of sale, duly stamped by the distributor.

The guarantee does not cover breakdowns caused by incorrect installation or use.

**MESTRA®** will not effect any repair outside its own workshops and will require transport costs.

Repairs carried out on the premises of the customer, be they with or without guarantee, are entrusted to the technical assistance of the distributor who has sold the unit or alternatively to the technicians he has contracted


**GARANTIE**


Toutes les machines **MESTRA®** sont garanties contre tout défaut de fabrication pendant un an à partir de la date d'achat. Pour les réparations sous garantie, **MESTRA®** exigera le coupon ci-joint, dûment rempli et cacheté par l'établissement de distribution, avec la date de vente.

Les défaillances dues à une mauvaise installation ou à une mauvaise utilisation de la machine seront exclues de la garantie.

V n'effectue aucune réparation en dehors de ses ateliers, et elle ne prendra pas à sa charge les frais de transport pouvant en découler. Le service technique du distributeur ayant effectué la vente, ou ses techniciens, seront les responsables des réparations réalisées chez le client, qu'elles soient ou non sous garantie.

ADQUIRIENTE **PURCHASER** *ACHETEUR*.....  
 DIRECCION **ADDRESS** *ADRESSE* .....CIUDAD **CITY** *VILLE*.....  
 MAQUINA mod. **UNIT** *model* **MACHINE** *modèle*.....  
 Nº de FABRICACION **MANUFACTURE N.** *Nº de FABRICATION*.....  
 FECHA DE ADQUISICION **PURCHASED AT** *ACHETE CHEZ*.....  
 DIRECCION **ADDRESS** *ADRESSE*.....  
 CIUDAD **CITY** *VILLE*.....

EJEMPLAR PARA EL COMPRADOR **PURCHASER'S**  
**COPY** *EXEMPLAIRE ACHETEUR*  
 SELLO **STAMP** *CACHET*

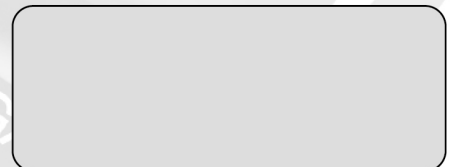


ADQUIRIENTE **PURCHASER** *ACHETEUR*.....  
 DIRECCION **ADDRESS** *ADRESSE* .....CIUDAD **CITY** *VILLE*.....  
 MAQUINA mod. **UNIT** *model* **MACHINE** *modèle*.....  
 Nº de FABRICACION **MANUFACTURE N.** *Nº de FABRICATION*.....  
 FECHA DE ADQUISICION **PURCHASED AT** *ACHETE CHEZ*.....  
 DIRECCION **ADDRESS** *ADRESSE*.....  
 CIUDAD **CITY** *VILLE*.....

EJEMPLAR PARA EL DISTRIBUIDOR **DISTRIBUTOR'S**  
**COPY** *EXEMPLAIRE POUR LE DISTRIBUTEUR*  
 SELLO **STAMP** *CACHET*




ADQUIRIENTE **PURCHASER** *ACHETEUR*.....  
 DIRECCION **ADDRESS** *ADRESSE* .....CIUDAD **CITY** *VILLE*.....  
 MAQUINA mod. **UNIT** *model* **MACHINE** *modèle*.....  
 Nº de FABRICACION **MANUFACTURE N.** *Nº de FABRICATION*.....  
 FECHA DE ADQUISICION **PURCHASED AT** *ACHETE CHEZ*.....  
 DIRECCION **ADDRESS** *ADRESSE*.....  
 CIUDAD **CITY** *VILLE*.....

EJEMPLAR PARA MESTRA **MESTRA'S** **COPY**  
*EXEMPLAIRE MESTRA*  
 SELLO **STAMP** *CACHET*





**MESTRA<sup>®</sup>**

*Your trusted brand*

## Talleres Mestraitua S.L.

Txori-erri Etorbidea, 60

T: (+34)944530388 - F: (+34)944711725

mestra@mestra.es - www.mestra.es

48150 SONDIKA - BILBAO - ESPAÑA