



MESTRA

Autoclave **icanCLAVE 3F**

Ref. 100367



icanCLAVE 3F es un autoclave superrápido, especial para la esterilización de instrumental sin envolver, que mejora enormemente la tasa de rotación del instrumental quirúrgico y la comodidad de pequeñas operaciones como odontología.

- ✓ **Puerto de impresora:** Se utiliza para conectar una impresora externa e imprimir el informe del ciclo automáticamente.
- ✓ **Puerto USB:** Se utiliza para conectar un disco USB, todos los datos de esterilización se emiten automáticamente en el disco USB y pueden estar listos directamente en cualquier PC y almacenarse electrónicamente.
- ✓ **Memoria interna:** Los últimos 9999 ciclos pueden almacenarse automáticamente en el sistema de autoclave, pudiendo imprimirse en cualquier momento.
- ✓ **Puerto de impresora de etiquetas de código de barras:** Se utiliza para conectar una impresora de código de barras opcional imprime etiquetas de código de barras que contienen la información relacionada con el ciclo de esterilización.
- ✓ **Maleta para transportar.**




Pantalla táctil.



CARACTERÍSTICAS:

- ✓ **Ciclos estándar preprogramados:** Quick S, Standard B, Soft B, Prion 134°C, test B&D, Test Helix, Test de vacío.
- ✓ **Otros ciclos:** Descalc (limpieza del generador de vapor y del tubo).
- ✓ **Generador de vapor:** Generador de vapor incorporado con una potencia nominal de 2000W.
- ✓ **Conexión de agua:** Conexión a depósitos de agua limpia y usada (no incluidos).
- ✓ **Sistema de puerta:** Sistema de puerta manual.
- ✓ **Pantalla táctil en color:** Visualización del proceso del ciclo, tiempo, temperatura, presión, mensajes de alerta del proceso, códigos de error y toda la información detallada.
- ✓ **Interfaz fácil de usar:** Fácil de manejar.
- ✓ **Sistema de aviso:** Aviso de desbloqueo de puerta.
- ✓ **Sistema de identificación de la presión atmosférica:** Puede identificar automáticamente la presión atmosférica local.
- ✓ **Sistema de seguridad:**
 - Válvula de seguridad de sobrepresión.
 - Interruptor de sobretensión.
 - Sistema de bloqueo de seguridad que impide el cierre incorrecto de la puerta.
 - Disyuntores que protegen la máquina en caso de cortocircuito o sobrecorriente.
 - Aviso automático de mantenimiento.

Características

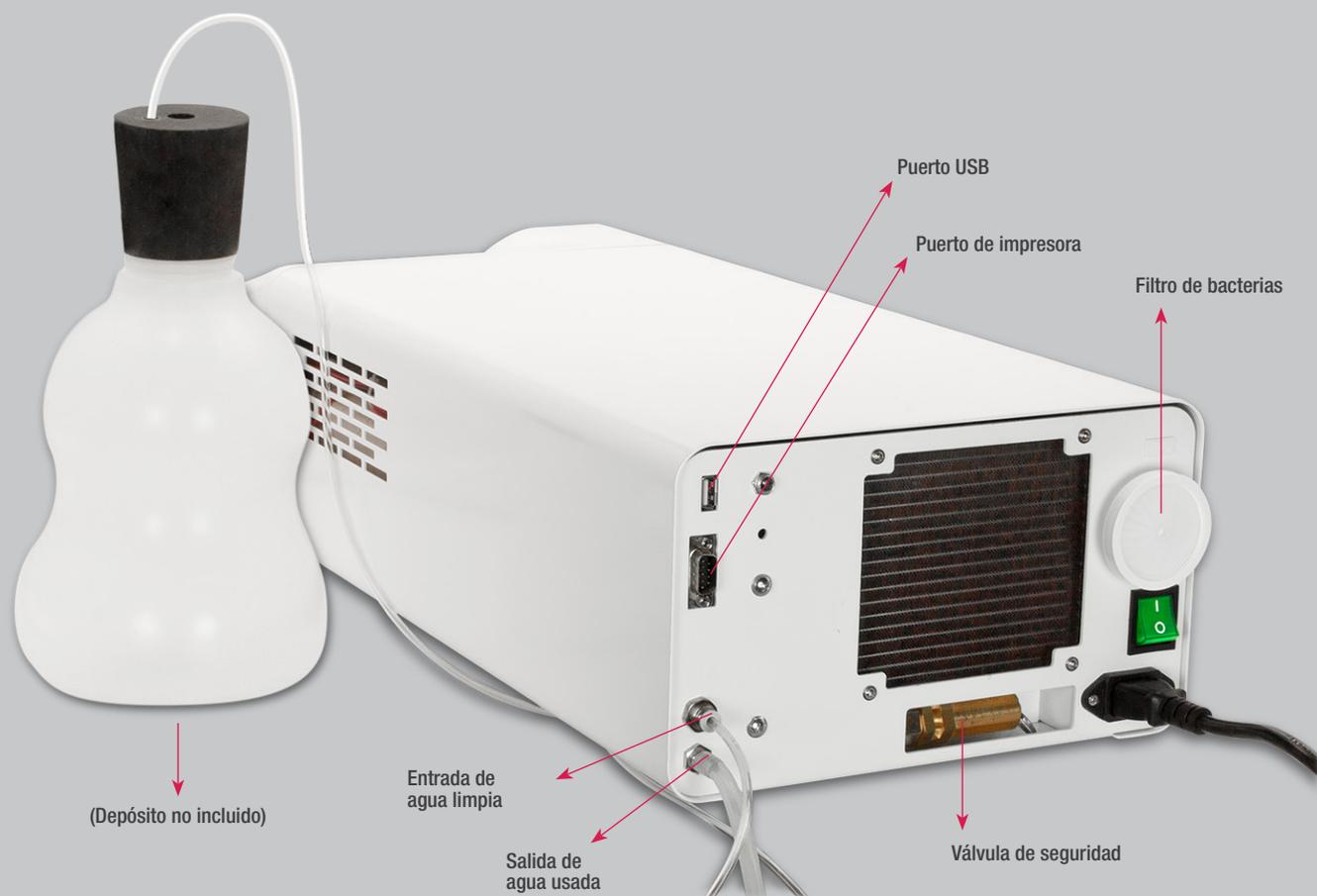

Características	icanCLAVE 3F
Modelo	STE-3-F
Dimensión de la cámara (mm)	192(W) x 45(H) x 285(D)
Dimensión total	268(W) x 171(H) x 605 (D)
Volumen de la cámara	Aprox. 3L
Número de bandejas	1
Material bandejas	Aluminio
Tamaño bandejas	178 x 285mm
Voltaje, Frecuencia	220/110V, 50/60Hz
Potencia	2300 W
Peso	16 kg

Programa	Temp./Presión	Tiempo esterilización	Tiempo total
Quick S	134 °C/ 210Kpa	3.5 min	7-11 min
Standard B	134 °C/ 210Kpa	4 min	15-18 min
Soft B	121 °C/ 110Kpa	20 min	25-30 min
Prion 134	134 °C/ 210Kpa	18 min	25-30 min
Test B&D	134 °C/ 210Kpa	3.5 min	12-18 min
Test Hélix	134 °C/ 210Kpa	3.5 min	12-18 min
Test Vacío	-	-	15-20 min

NORMAS:

- Directiva 93/42/CEE sobre productos sanitarios.
- Directiva 2014/68/UE sobre equipos a presión.
- EN 13060 Esterilizadores de vapor pequeños.
- EN 61326, EN 61000 Compatibilidad electromagnética.
- EN 61010-1, UL 61010-1 Requisitos de seguridad.
- EN 61010-2-040, IEC 61010-2-040.
- Directiva RoHS 2011/65/UE.





En **MESTRA** estamos especializados en la fabricación y distribución de maquinaria y aparatología dental, somos una empresa española con sede en Bizkaia, actualmente exportamos a clientes de más de cincuenta países en los cinco continentes y contamos con más de mil referencias en nuestro catálogo.

Hemos mantenido una línea de expansión constante desde nuestra fundación en 1945, gracias a nuestras mejores cualidades: la alta calidad de nuestros productos que han merecido la certificación ISO 9001:2015 por TÜV Rheinland, una cercana y atenta relación con nuestros clientes, y una constante innovación técnica en el diseño de nuestros productos.

Nuestra filosofía de diseño se basa en tres pilares fundamentales: las necesidades de nuestros clientes, la observación de las técnicas empleadas en laboratorio dental y nuestros más de 77 años de experiencia aportando soluciones creativas y contemporáneas a los problemas cotidianos de los profesionales del sector.

¿Deseas realizar una visita virtual a nuestro centro de formación y exposición?

¡Contáctanos y te lo enseñamos!



Talleres Mestraitua SL
(+34) 944 530 388
info@mestra.es - www.mestra.es
48150 SONDIKA (Spain)



Sistema de Gestión
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 1100018003