



Horno cerámica

Ref. 100249




Versión renovada del conocido horno de porcelana **MESTRA**. Su funcionamiento es totalmente automático y compatible con los diferentes tipos de porcelana presentes en el mercado. Su línea moderna tiene una estética más agradable. Cuenta además con un amplio display táctil de fácil manejo con iconos y gráficos muy intuitivos.

Mediante este panel sinóptico, es posible ver cómo evolucionan los parámetros del proceso de manera cómoda y clara. Su memoria permite almacenar programas modificando parámetros como la temperatura, tiempo de secado, velocidad de calentamiento, temperatura máxima, tiempo de mantenimiento y enfriamiento, vacío, etc.

Para mejorar la precisión el horno permite calibrar la temperatura. El horno dispone también de diferentes alarmas que informarán sobre cualquier anomalía: rotura de termo par o de la resistencia, fallo en el sistema de vacío, etc...

El horno se suministra con los siguientes elementos:

- ✓ Bomba de vacío.
- ✓ Plataforma de calentamiento.
- ✓ Kit de calibración.
- ✓ Bandeja.

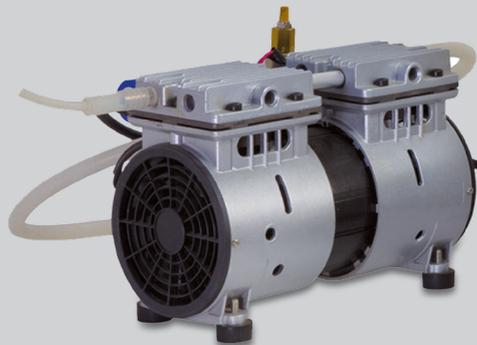

Especificaciones:

Alto 426 mm • Ancho 320 mm • Fondo 392 mm

Peso 24 kg. • Temp. máxima 1200 °C

Máximo vacío -97 kPa • Consumo ≤1.5 kW ±10 %

Alimentación AC 220 V. ±10 % 50 Hz. 15 A