


# POR QUE COMPRAR AUTOCLAVES ICANCLAVE



MESTRA®

icanCLAVE

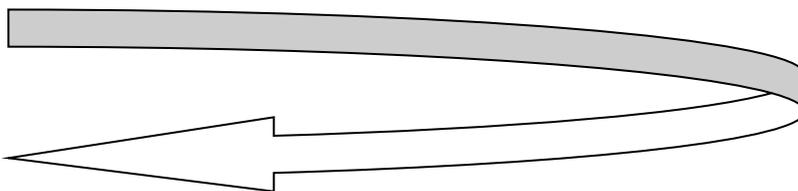

**"20 años de experiencia en la investigación y fabricación de autoclaves, actualmente presentes en más de 100 países alrededor del mundo y más de 80.000 unidades vendidas."**

## LÍDERES EN FABRICACIÓN DE AUTOCLAVES

Ningbo Ican Machines Co., Ltd se ha centrado constantemente en los productos de esterilización durante casi 20 años. Nosotros continuamos centrándonos en el desarrollo e innovación de productos de esterilización para ofrecer soluciones más sencillas, seguras y rápidas. Porque creemos que la especialización es el mejor método para lograr una gran calidad e innovación.

Nuestras líneas de esterilización incluyen esterilizadores de sobremesa desde 8 litros hasta 45, los cuales cumplen la normativa europea EN13060 y la certificación CE TUV Rheinland. Además, nuestra fábrica dispone de las certificaciones referentes al sistema de gestión de la calidad aplicable para dispositivos médicos ISO13485 y la Norte Americana CMDCAS.

Un producto excelente que cumple con todas las certificaciones y nuestro principio "la calidad en primer lugar, orientada al servicio" construyen un camino que dirige al "win to win" de nuestros clientes y distribuidores.

## SERVICIO ÓPTIMO POR PARTE DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

Nuestro experimentado servicio técnico está a su disposición para ayudarle en todos los problemas relacionados con los autoclaves y sus accesorios de esterilización. Los técnicos tienen un alto nivel de especialización y se involucran en todo el proceso del autoclave, lo cual les permite ofrecer un servicio eficiente y de calidad. El servicio técnico dispone de almacén de repuestos propio.

También ofrecen planes de mantenimiento periódicos, con equipos de sustitución para los clientes.

Después de cada **reparación** se efectúan siempre:

- 1- Prueba de vacío.
- 2- Helix test, con su respectivo reactivo químico.
- 3- Control biológico, es decir, sometemos esporas a un ciclo de esterilización y posteriormente incubamos la muestra para saber si el proceso de esterilización es correcto, siempre comparándola con una muestra sin esterilizar.

Por otro lado, las **validaciones-calibraciones**, incluyen lo anteriormente mencionado, si existe alguna reparación a efectuar antes de este servicio, y aparte de esto, comprobaciones mediante sensores externos de presión y temperatura y software específico para este fin, para contrastar el correcto funcionamiento del autoclave en el proceso.

Servicio Técnico con cobertura para toda España, ubicado en Valencia.

Correo electrónico de contacto: [europa@icanclave.com](mailto:europa@icanclave.com)