


GAMA DE ACCESORIOS



MEDIDAS Y PESO DE LOS ARTICULADORES				
Modelo	Ref. 010098	Ref. 010099	Ref. 010103	Ref. 010107
Alto (mm)	150	150	170	160
Ancho (mm)	180	170	170	148
Fondo (mm)	180	180	180	180
Peso	0,540 kg	0,689 kg	0,735 kg	0,697 kg

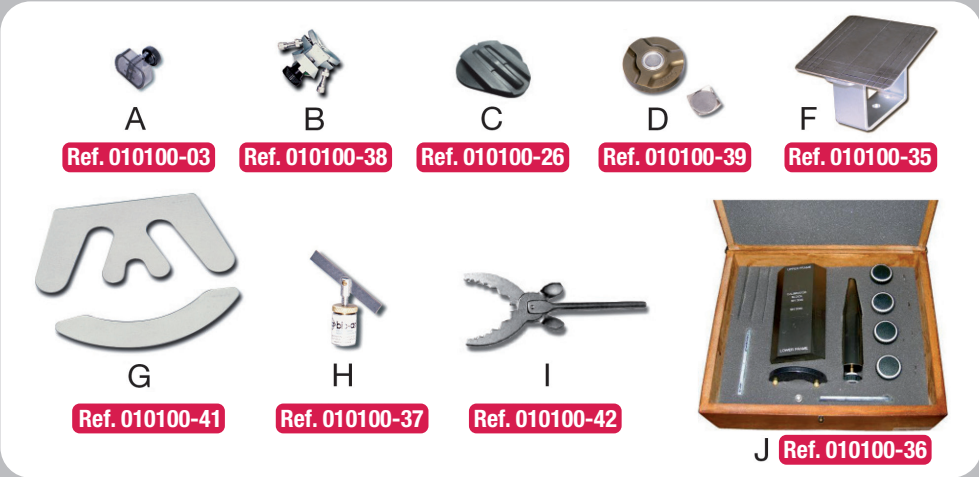

Ref. 010099

Articulador + Estuche



Ref. 010103

Articulador + Estuche



Ref. 010107

Articulador + Estuche



Ref. 010098

Articulador + Caja cartón

Los 4 modelos son perfectamente compatibles con los **arcos faciales tipo Estándar y Élite.**

ARTICULADORES ORIGINALES

Ref. 010098 - 010099 - 010100-55 - 010102-50 - 010103 - 010107



Articulador tipo arcón “ARQUÍMEDES PROFESIONAL” (semiajustable) A7 PLUS



Estructura robusta hecha en aluminio, garantizando mayor estabilidad. Diseño que proporciona mayor visibilidad.

- ✓ Semiajustable / Arcón.
- ✓ Distancia intercondilar fija (110 mm).
- ✓ Guía condilar curva.
- ✓ Regulación de la guía condilar.
- ✓ Regulación del ángulo de Bennet.
- ✓ Traba en céntrica.
- ✓ Sistema de estabilización del movimiento de la guía condilar con conexión de silicona.
- ✓ Pin de apoyo de la rama superior en posición abierta.



Ref. 010099



CE Producto Sanitario

Articulador tipo arcón “ARQUÍMEDES PROTRUSAL” (semiajustable) A7 Plus-E



Similar al modelo Arquímedes Profesional, posee guías condilares exclusivas en aluminio con ajuste milimétrico.

- ✓ Semiajustable / Arcón.
- ✓ Distancia intercondilar fija (110 mm).
- ✓ Regulación de la guía condilar.
- ✓ Regulación del ángulo de Bennet.
- ✓ Guía condilar plana.
- ✓ Sistema de trabamamiento bilateral.
- ✓ Pino de apoyo de la rama superior en la posición abierta.
- ✓ Sistema estabilizador de los movimientos con muelle.



Ref. 010103



CE Producto Sanitario

Articulador tipo arcón “4.000 S” (semiajustable) 4.000 S



- ✓ Semi-ajustable / Arcón.
- ✓ Distancia intercondilar ajustable (eje expansor).
- ✓ Guía condilar curva.
- ✓ Reglaje del ángulo de la guía condilar.
- ✓ Reglaje del ángulo de Bennet.
- ✓ Estabilización para los movimientos de articulación (O-ring).



Ref. 010107



CE Producto Sanitario

“ARQUÍMEDES JUNIOR” (semiajustable) A7 FIX

- ✓ Semiajustable / Arcón.
- ✓ Distancia intercondilar fija (110 mm).
- ✓ Guía condilar fija en la media 30°.
- ✓ Ángulo de Bennet fijo en la media 15°.
- ✓ Guía condilar curva.
- ✓ Sistema de estabilización magnético (embutido) para el movimiento de la guía condilar.
- ✓ Pin para soporte de la rama superior en posición abierta.



Ref. 010098



CE Producto Sanitario

Arco Facial Estándar

El arco facial Estándar es un aparato utilizado para registrar la posición espacial de la arcada dentaria superior del paciente en relación al cráneo y transferir el registro para el articulador. La transferencia del registro del paciente es realizada fijándose el arco facial completo en el articulador.



Ref. 010102-50



CE Producto Sanitario

Arco Facial Élite

El nuevo arco Élite trae un sistema de articulación y fijación del tenedor que permite un registro más rápido para el profesional y cómodo para el paciente. Posee un conjunto de transferencia que elimina la necesidad del arco en el proceso de montaje de los modelos en el articulador, volviendo en proceso más práctico y estable.

Su apoyo nasal con altura ajustable juntamente con el indicador infraorbital vuelve el registro aún más preciso. El arco es equipado con un sistema de deslizamiento suave (apertura y cerramiento) que facilita su manejo. Las aurículas son anatómicas, removibles y esterilizables químicamente.



Ref. 010100-55



CE Producto Sanitario