

GAMME D'ACCESSOIRES



MESURES ET POIDS DES ARTICULATEURS				
Modèle	Réf. 010098	Réf. 010099	Réf. 010103	Réf. 010107
Hauteur (mm)	150	150	170	160
Largeur (mm)	180	170	170	148
Profondeur (mm)	180	180	180	180
Poids	0,540 kg	0,689 kg	0,735 kg	0,697 kg




Réf. 010099
Articulateur + Étui



Réf. 010103
Articulateur + Étui



Réf. 010107
Articulateur + Étui

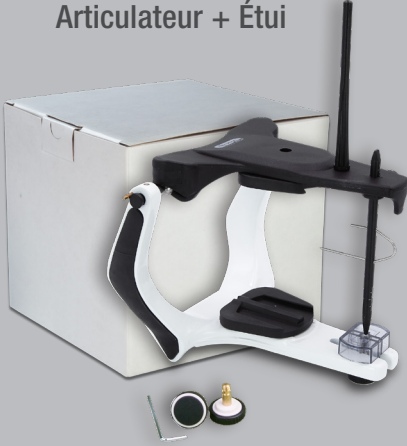

Réf. 010098
Articulateur + boîte en carton

Les 4 modèles sont parfaitement compatibles avec les arcs faciaux de type Standard et Élite.



Talleres Mestraitua SL
(+34) 944 530 388
info@mestra.es - www.mestra.es
48150 SONDIKA (Spain)



Système de
management
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 1100018003



ARTICULATEURS ORIGINAUX

Réf. 010098 - 010099 - 010100-55 - 010102-50 - 010103 - 010107



Articulateur type arcon “ARQUÍMEDES PROFESIONAL” (semi-adaptable) A7 PLUS



Structure robuste en aluminium, qui garantit une meilleure stabilité. Conçu pour procurer un grand champ visuel.

- ✓ Semi-ajustable / Arcon.
- ✓ Distance inter-condylienne fixe (110 mm).
- ✓ Guide condylien courbe.
- ✓ Réglage du guide condylien et de l'angle de Bennet.
- ✓ Repère central.
- ✓ Système de stabilisation du mouvement du guide condylien avec une connexion en silicone.
- ✓ Tige d'appui de la partie supérieure en position ouverte.



Réf. 010099



CE Dispositif médical

Articulateur type arcon “ARQUIMEDES PROTRUSAL” (semi-adaptable) A7 Plus-E



Semblable au modèle Archimède Pro, équipé de guides condyliens en aluminium avec ajustage millimétrique.

- ✓ Semi-ajustable / Arcon.
- ✓ Distance inter-condylienne fixe (110 mm).
- ✓ Réglage du guide condylien.
- ✓ Réglage de l'angle de Bennet.
- ✓ Guide condylien plat.
- ✓ Système de verrouillage bilatéral.
- ✓ Tige d'appui de la partie supérieure en position ouverte.
- ✓ Système stabilisateur des mouvements à ressort.



Réf. 010103



CE Dispositif médical

Articulateur type arcon “4.000 S” (semi-adaptable) 4.000 S



- ✓ Semi-ajustable / Arcon.
- ✓ Distance inter-condylienne ajustable (axe expenseur).
- ✓ Guide condylien courbe.
- ✓ Réglage du guide condylien.
- ✓ Réglage de l'angle de Bennet.
- ✓ Stabilisation pour les mouvements d'articulation (O-ring).



Réf. 010107



CE Dispositif médical

“ARQUIMEDES JUNIOR” (semi-adaptable) A7 FIX

- ✓ Distance inter-condylienne fixe (110 mm).
- ✓ Guide condylien fixe 30°.
- ✓ Angle de Bennet fixe 15°.
- ✓ Guide condylien courbe.
- ✓ Système de stabilisation magnétique (embouti) pour le mouvement du guide condylien.
- ✓ Tige d'appui de la partie supérieure en position ouverte.



Réf. 010098



CE Dispositif médical

Arc Facial Standard

Dispositif permettant d'enregistrer la position spatiale de l'arcade dentaire supérieure du patient par rapport au crâne et de transférer l'enregistrement sur l'articulateur. Le transfert du dossier du patient s'effectue en fixant l'arc facial complet dans l'articulateur.



Réf. 010102-50



CE Dispositif médical

Arc Facial Élite

Le nouvel arc Élite apporte un système de articulation et fixation du fourchette qui permet un enregistrement plus rapide pour le professionnel et plus confortable pour le patient. Il possède un ensemble de transfert qui élimine le besoin de l'arc dans le processus de montage des modèles sur l'articulateur, ce qui permet de revenir à processus plus pratique et stable.

Son support nasal réglable en hauteur ainsi que l'indicateur infra-orbitaire rend le registre encore plus précis. L'arc est équipé d'un système de glissement en douceur (ouverture et fermeture) qui facilite sa manipulation. Les oreillettes sont anatomiques, amovibles et stérilisables chimiquement.



Réf. 010100-55



CE Dispositif médical