



# SILLAS PONI

Refs. 100600 - 100602



# Silla PONI sin respaldo

Ref. 100600

La silla incorpora un sistema de frenado de seguridad. Cuando no hay nadie sentado las ruedas se bloquean para evitar que la silla se mueva accidentalmente. Cuando alguien se sienta, las ruedas se desbloquean y giran libremente.

## Especificaciones:


Altura máxima del asiento: 730 mm

Altura mínima del asiento: 530 mm

Fondo: 320 mm • Ancho: 360 mm

Peso: 7 kg • Carga máxima: 150 kg

## Ruedas con frenado de seguridad (EN 1335)

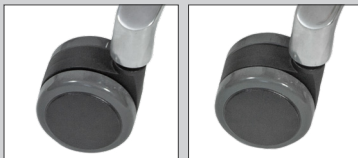

# Silla PONI con respaldo

Ref. 100602


## MULTIPLE ADJUSTABLE ROTATION

El respaldo se puede reclinar ligeramente de forma independiente.

Todo el respaldo se puede subir, bajar y quedar libre.


La barra de aire se puede subir, bajar y girar.

La polea puede girar 360°. Tono suave, no daña el suelo.

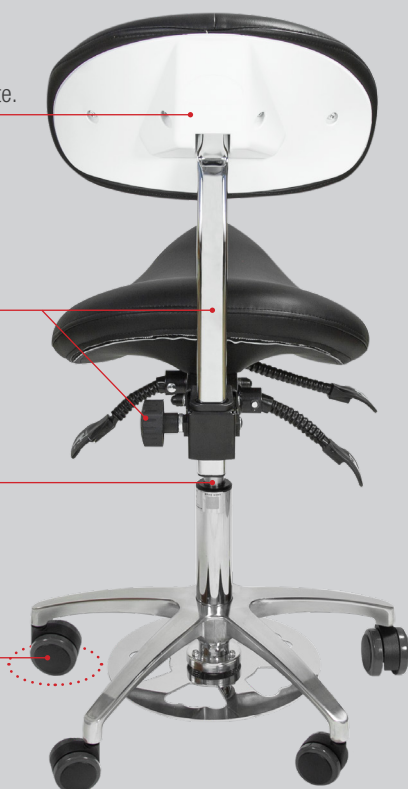

## FUNCIÓN DE RECLINAR

## Ruedas con frenado de seguridad (EN 1335)

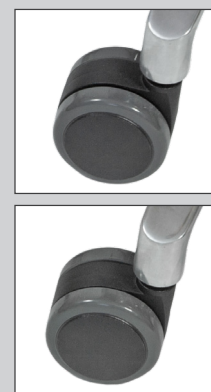

Sistema de elevación con el pie.



- ✓ **Altura ajustable.**
- ✓ **Cuero PU de alta calidad.**
- ✓ **Eficaz contra la desinfección de salas de tratamiento con productos de limpieza habituales.** No se decolora ni envejece fácilmente.
- ✓ **Espuma de alta resiliencia.** Control riguroso de las materias primas. Superior al estándar nacional de alta resiliencia, para brindar una mejor sensación al sentarse.

- ✓ **Barra neumática de entrada de cuatro etapas.** Seguro y fluido. Autenticación TÜV y SGS.
- ✓ **Sello de aceite hidráulico.** Protección múltiple: ¡sin fugas de aceite ni de aire! Larga vida útil.
- ✓ **Limpieza del filtro de aceite.** Dispositivo de raspado de aceite integrado. La parte saliente está libre de aceite y limpia, sin riesgo de contacto falso.

## Especificaciones:

Altura máxima del asiento: 640 mm

Altura mínima del asiento: 200 mm

Fondo: 320 mm • Ancho: 370 mm

Peso: 11 kg • Carga máxima: 150 kg



**MESTRA**

Talleres Mestraitua SL  
(+34) 944 530 388  
info@mestra.es - www.mestra.es  
48150 SONDIKA (Spain)



Sistema de Gestión  
ISO 9001:2015

www.tuv.com  
ID 1100018003