

**MESTRA**

AGITADOR DE CÁPSULAS

Ref. 100625

En la práctica odontológica moderna, la durabilidad y el éxito de una restauración dependen críticamente de la homogeneidad de la mezcla inicial. Una dosificación manual o un vibrado inestable comprometen seriamente las propiedades mecánicas del material.

El **agitador de cápsulas** ha sido diseñado bajo estrictos estándares para proporcionar un movimiento oscilatorio de alta velocidad -controlado por microprocesador-, que garantiza una mezcla libre de porosidades, con el brillo perfecto y el tiempo de fraguado exacto. En definitiva: Un material con calidad profesional, óptimo para su empleo.

Las características más significativas de este aparato son:



ALTA VELOCIDAD

Frecuencias de vibración ajustables de hasta 5000 rpm, lo que asegura una mezcla homogénea y una consistencia perfecta.



COMPATIBILIDAD UNIVERSAL

Diseñado para cápsulas de diferentes materiales. Un único equipo para múltiples soluciones de restauración.



CONTROL DIGITAL DE PRECISIÓN

Equipado con pantalla LCD y botones táctiles de membrana para una configuración rápida del temporizador y de la velocidad. Además, la limpieza es sumamente sencilla.



DISEÑO ERGONÓMICO Y SEGURO

Cuenta con una cubierta protectora transparente que aísla la zona de vibración durante el funcionamiento, garantizando la seguridad frente a eventuales roturas de la cápsula.




ESTABILIDAD Y FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO

Su avanzado sistema interno de amortiguación por muelles reduce drásticamente las vibraciones transferidas a la mesa de trabajo manteniendo un bajo nivel sonoro. Esto mejora el confort del paciente y del profesional.



DURABILIDAD

Fabricado con una carcasa robusta y componentes de alta resistencia para una larga vida útil.

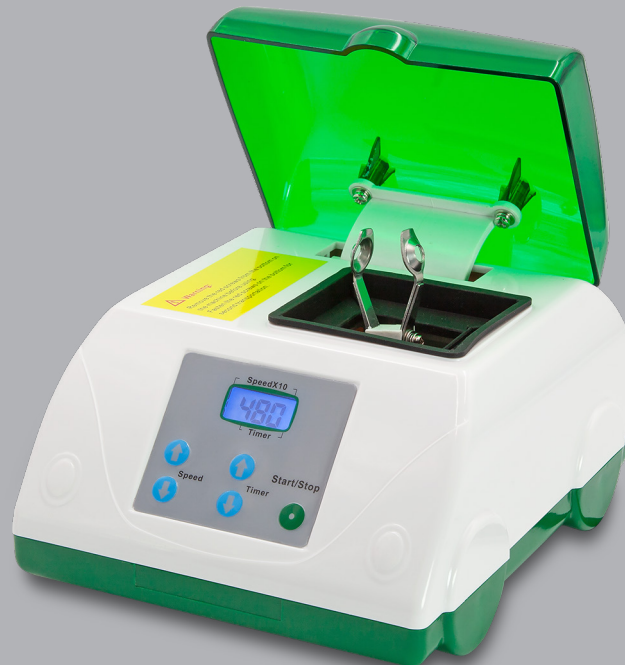

Características:

Dimensiones: 210 x 175 x 150 mm	Temporizador: 3 - 180 "
Dimensiones embalaje: 255 x 215 x 185 mm	Fusible: 2 A
Peso neto: 1,87 kg	Potencia: 40 W
Peso bruto: 2,1 kg	Tensión: 220 V, 50 Hz
Velocidad: 2800 - 5000 rpm	Ruido: ≤ 65 dB (A)

CONTENIDO DEL PAQUETE:

- ✓ 1 agitador.
- ✓ 2 fusibles de recambio.
- ✓ 2 muelles de recambio.

**MESTRA**

Talleres Mestraitua SL
(+34) 944 530 388
info@mestra.es - www.mestra.es
48150 SONDIKA (Spain)



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 1100018003