

AGITATEUR DE CAPSULES

Réf. 100625

Dans la pratique odontologique moderne, la durabilité et le succès d'une restauration dépendent de manière critique de l'homogénéité du mélange initial. Un dosage manuel ou une vibration instable compromettent sérieusement les propriétés mécaniques du matériau.

L'**agitateur de capsules** a été conçu selon des normes strictes pour fournir un mouvement oscillatoire à grande vitesse -contrôlé par microprocesseur-, garantissant un mélange sans porosités, avec une brillance parfaite et un temps de prise exact. En définitive: un matériau de qualité professionnelle, optimal pour son utilisation.

Les caractéristiques les plus significatives de cet appareil sont:



GRANDE VITESSE

Fréquences de vibration réglables jusqu'à 5000 tr/min, ce qui assure un mélange homogène et une consistance parfaite.



COMPATIBILITÉ UNIVERSELLE

Conçu pour des capsules de différents matériaux. Un seul équipement pour de multiples solutions de restauration.



CONTRÔLE NUMÉRIQUE DE PRÉCISION

Équipé d'un écran LCD et de touches tactiles à membrane pour une configuration rapide de la minuterie et de la vitesse. De plus, le nettoyage est extrêmement simple.



DESIGN ERGONOMIQUE ET SÛR

Il dispose d'un couvercle de protection transparent qui isole la zone de vibration pendant le fonctionnement, garantissant la sécurité face aux risques de rupture de la capsule.




STABILITÉ ET FONCTIONNEMENT SILENCIEUX

Son système interne avancé d'amortissement par ressorts réduit considérablement les vibrations transmises au plan de travail, tout en maintenant un faible niveau sonore. Cela améliore le confort du patient et du professionnel.



DURABILITÉ

Fabriqué avec un boîtier robuste et des composants à haute résistance pour une longue durée de vie.

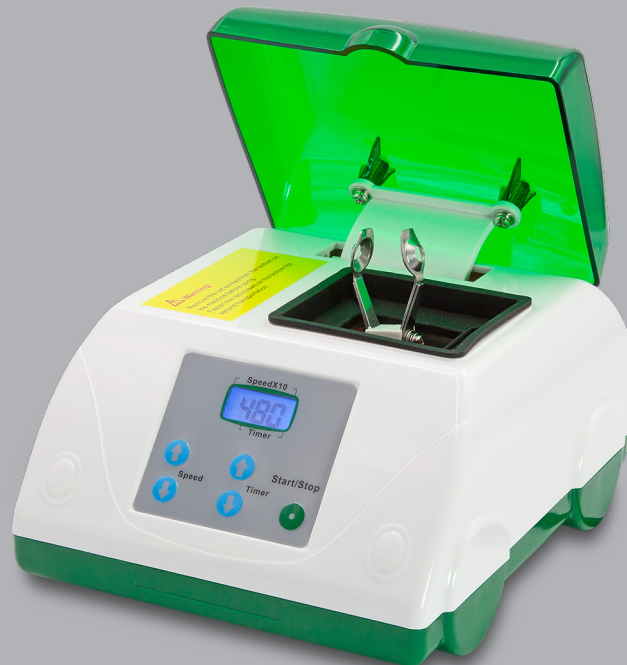

Caractéristiques:

Dimensions: 210 x 175 x 150 mm	Minuteur: 3 - 180 "
Dimensions de l'emballage: 255 x 215 x 185 mm	Fusible: 2 A
Poids net: 1,87 kg	Puissance: 40 W
Poids brut: 2,1 kg	Tension: 220 V, 50 Hz
Vitesse: 2800 - 5000 rpm	Niveau sonore: ≤ 65 dB(A)

CONTENU DU PAQUET:

- ✓ 1 agitateur.
- ✓ 2 fuseaux de rechange.
- ✓ 2 ressorts de rechange.



MESTRA

Talleres Mestraitua SL
(+34) 944 530 388
info@mestra.es - www.mestra.es
48150 SONDIKA (Spain)



Système de
management
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 1100018003