



MESTRA

Catálogo de **CLÍNICA**


**2
0
2
6**



www.mestra.es


Índice

Útiles de clínica	03
Limpieza y desinfección	17
Máquinas	28
Mobiliario	33
Iluminación	36
 Índice alfabético	 38

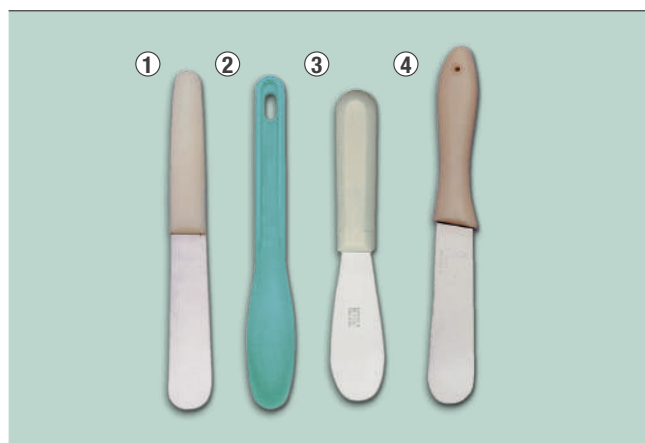

Espátulas y cuchillos

		Long. Total	Hoja	Peso
1. Ref. 060001	Espátula alginato acero inox. (Mango blanco)	205 mm	110 mm	0,061 kg
2. Ref. 060002	Espátula escayola-alginato (Plástico) 12 u.	208 mm	90 mm	0,024 kg
3. Ref. 060003	Espátula alginato acero inox. (Mango blanco)	190 mm	90 mm	0,037 kg
3. Ref. 060000	Espátula alginato	230 mm	110 mm	0,075 kg

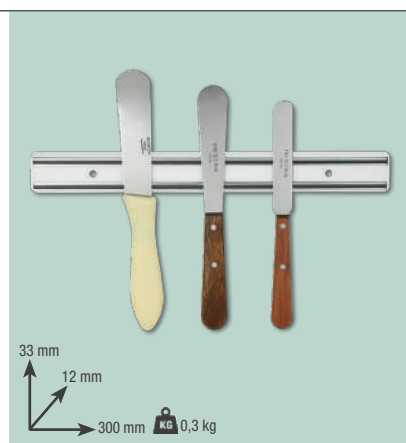

Barra magnética (porta-instrumentos)

Ref. 050362

De sencilla colocación, puede fijarse mediante tornillos a casi cualquier superficie.

(Espátulas no incluidas).



Taza para batir alginato

Ref. 060120

Diámetro	110 mm	Capacidad	400 cm³
Alto	78 mm	Peso	0,100 kg



Vasos Dappen

Ref. 070161 Ref. 070162 Ref. 070163 Ref. 070164

Referencia	Color
070161	Ambar (12 u.)
070162	Azul (12 u.)
070163	Transparente (12 u.)
070164	Verde (12 u.)

Ø 33 x (H) 35 mm | 0,042 kg (1 u.)

(L) 160 x (W) 110 x (H) 40 mm | 0,63 kg (12 u.)




Soporte vasos de dappen

Ref. 070165


Fabricado totalmente en acero inoxidable pulido con patas de silicona transparente que evitan deslizamientos.

(Vasos no incluidos).

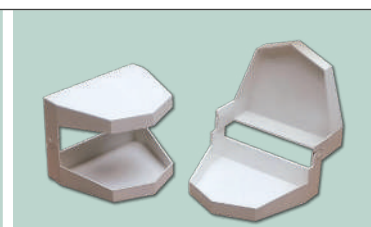

Articulador de plástico (para modelos de ortodoncia) 50 u.

Ref. 010110

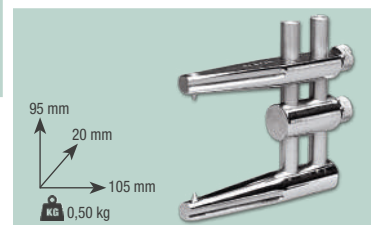

Oclusor doble guía (para ortopedia maxilar)

Ref. 010130




Zocaladores con imán

Ref. 050110=SP Ref. 050120=IP
Ref. 050130=SG Ref. 050140=IG

MODO DE EMPLEO

1. Colocar el zocalador con la lámina de metal.
2. Vaciar la impresión como acostumbra.
3. Aislar el modelo y colocar el imán sobre la lámina de metal.
4. Construir la contraforma que quedará fijada en el articulador vertiendo escayola de revestimiento sobre el modelo, dejándola polimerizar, separando después cuidadosamente el modelo de la contraforma (la contraforma le será reutilizable para otros modelos).

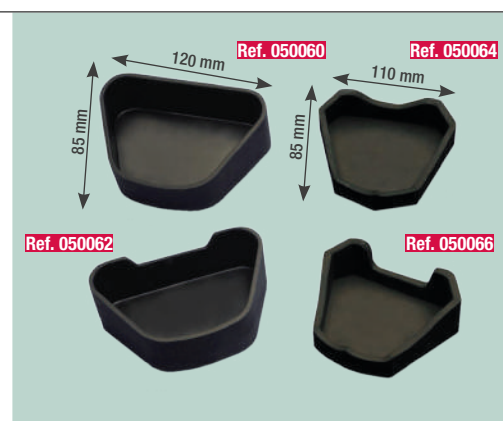

Zocaladores (prácticas ortodoncia)

S = Superior	I = Inferior	S = Superior	I = Inferior
Ref. 050060	Ref. 050062	Ref. 050064	Ref. 050066
0,081 kg	0,081 kg	0,073 kg	0,071 kg

Útiles de clínica




Instrumentos para modelar

Ref. 070320 (Kit 6 piezas) **Ref. 070330** (Kit 5 piezas)



Perforadora de diques

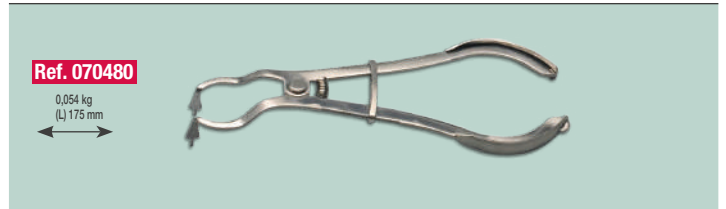


Tenaza porta clamps





Porta clamps: esterilizable

Ref. 070110 Fabricado en silicona. Esterilizable.

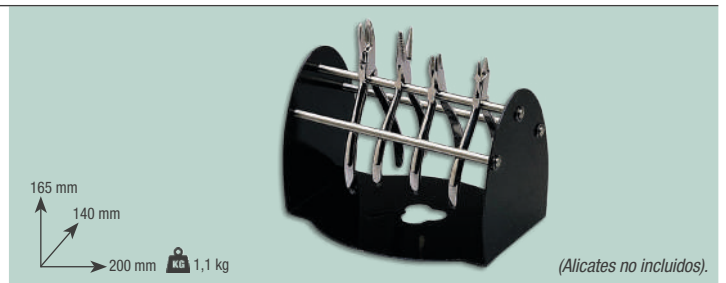

Soporte porta-alicates **Ref. 050364**


Sencillo y práctico elemento de sobremesa que permite mantener ordenada la mesa de trabajo.

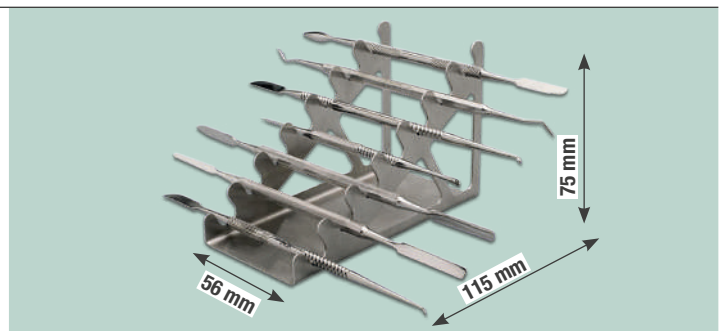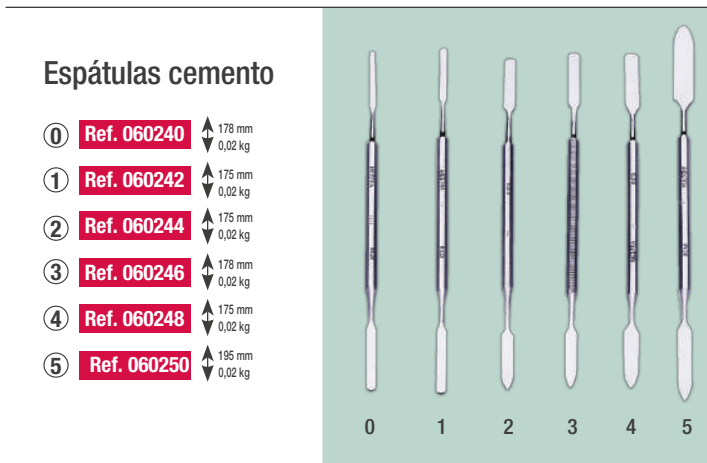


Soporte de acero inoxidable. Para instrumentos

Ref. 060235

Completamente fabricado en acero inoxidable. Permite almacenar hasta 7 útiles de trabajo. (Espátulas no incluidas).

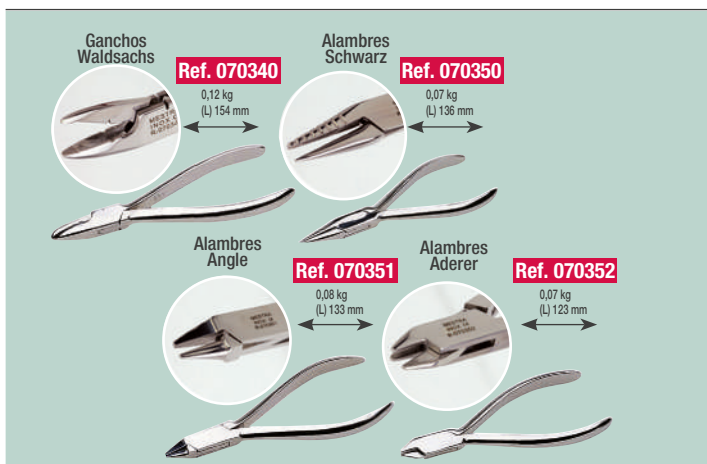

Alicates para doblar

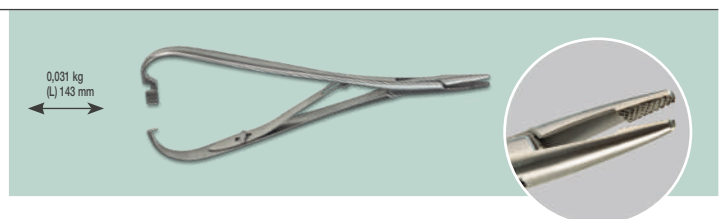


Pinza Mathieu **Ref. 070356**



Alicate Weingart **Ref. 070354**

Útiles de clínica

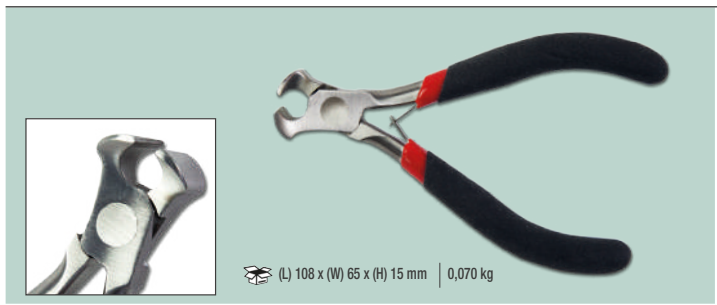


Alicates estándar (para corte de alambre)
Ref. 070339

(L) 108 x (W) 65 x (H) 15 mm | 0,070 kg

Martillo saca coronas

Ref. 070035-04
Punta larga
Ref. 070035-05
Punta corta

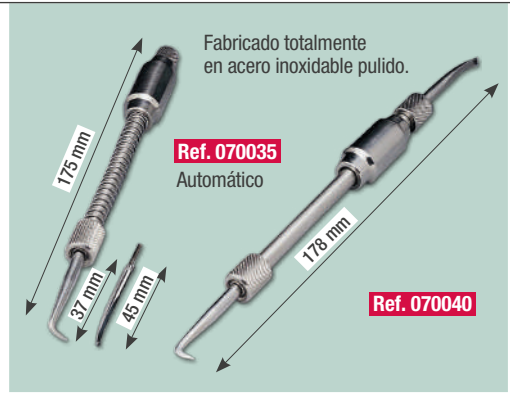


Fabricado totalmente en acero inoxidable pulido.




Algodonera sucio
Ref. 070155 (acero inoxidable)
Ø 60-51 x (H) 77 mm | 0,300 kg

Algodonera limpio
Ref. 070160 (acero inoxidable)

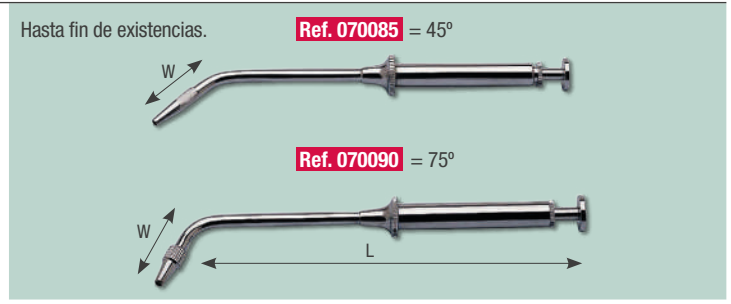

Aplicador de amalgama

Ref. 070085	(L) 145 x (W) 26 x Ø 14 mm	0,031 kg
Ref. 070090	(L) 133 x (W) 30 x Ø 14 mm	0,027 kg

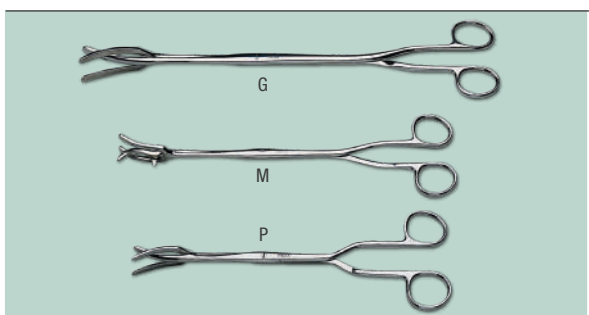


Tenazas

Ref. 070380 = G	(L) 300 x (W) 75 x (H) 25 mm	0,125 kg
Ref. 070390 = M	(L) 230 x (W) 66 x (H) 17 mm	0,059 kg
Ref. 070400 = P	(L) 200 x (W) 72 x (H) 20 mm	0,059 kg



Mortero para amalgamas
Ref. 060140
Fabricada en acero inoxidable.

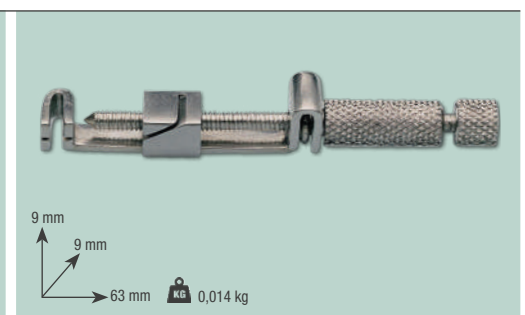

Portamatrices (universal)
Ref. 070409



Dispensador rollos algodón

Fabricado en plástico esterilizable a 135 C°.

Ref. 070061	(L) 120 x (W) 97 x (H) 55 mm 0,2 kg
(L) 120 x (W) 105 x (H) 60 mm 0,2 kg	
Ref. 070062	(L) 108 x (W) 100 x (H) 52 mm 0,3 kg
(L) 120 x (W) 105 x (H) 60 mm 0,3 kg	

Dosificador de líquidos

Ref. 070650
Botella de 400 cc. de capacidad ideal para dosificar todo tipo de líquidos con comodidad y precisión. Puede manejarse con una sola mano.
Dispone de dos escalas: una graduada en mililitros y la otra en dosis para la preparación de alginato.

Ø 77 x (H) 200 mm	0,061 kg
(L) 205 x (W) 80 x (H) 80 mm	0,102 kg



Dispensador de vasos

Ref. 070491	(L) 320 x (W) 100 x (H) 113 mm	0,354 kg
(L) 340 x (W) 135 x (H) 122 mm	0,490 kg	
Ref. 070490	(L) 358 x (W) 85 x (H) 85 mm	0,777 kg
(L) 373 x (W) 95 x (H) 95 mm	0,860 kg	



Porta fresas (de plástico)

Ref. 070142

Ø 90 x (H) 66 mm | 0,07 kg

(L) 91 x (W) 91 x (H) 71 mm | 0,09 kg



Porta fresas (clínica)

Ref. 070150


Sujeción de fresas por imán.
Fabricado en acero inoxidable
(ferrítico) con carenado de
plástico.

(L) 115 x (W) 45 x (H) 45 mm | 0,18 kg



Ref. 070151 = FG

Ref. 070152 = CA

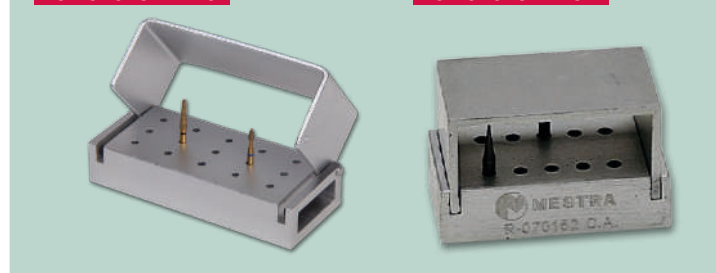

Porta fresas de aluminio

Ref. 070151 = FG | (L) 60 x (W) 25 x (H) 29 mm | 0,040 kg

Ref. 070152 = CA | (L) 40 x (W) 25 x (H) 27 mm | 0,046 kg



Mecha lamparillas:
Ref. 070065-03
Ref. 070065-10
Ref. 070065-11



Lamparillas de alcohol

Ref. 070065

(acero inoxidable)

Ø 76 x (H) 54 mm | 0,100 kg

Ref. 070070

(cristal)

Ø 60 x (H) 83 mm | 0,192 kg

Fresero magnético

Ref. 070115

Muy práctico y de agradable diseño.
Sus reducidas dimensiones permiten
ubicarlo en cualquier parte.

Se suministra en un lote de tres
productos de color rojo, verde y azul.
Ø 62 mm.

Ø 62 x (H) 49 mm (1 u.) | 0,182 kg

(L) 200 x (W) 40 x (H) 60 mm - Paking (3 u.)
0,583 kg



Descontaminadores de fresas

Ref. 070530

Ref. 070531



Fabricado en plástico resistente
a la temperatura. Capacidad para 36 piezas.
Se fabrican para: FG, CA, FG+CA.
Laboratorio.



Porta fresas (plástico esterilizable)

Ref. 070120 | (L) 75 x (W) 60 x (H) 35 mm | 0,060 kg

Ref. 070125 | (L) 75 x (W) 60 x (H) 35 mm | 0,060 kg

Ref. 070130 | (L) 75 x (W) 60 x (H) 35 mm | 0,060 kg


Ref. 070135 | (L) 75 x (W) 60 x (H) 55 mm | 0,072 kg

Ref. 070120 = FG

Ref. 070125 = CA

Ref. 070130 = FG+CA

Ref. 070135 = Laboratorio

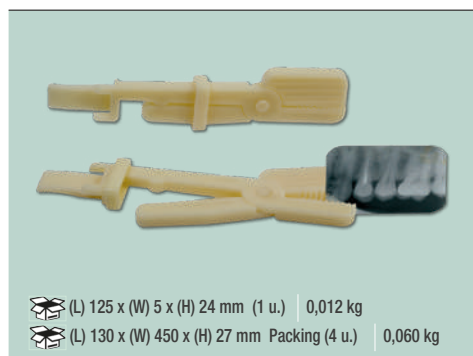


Pinza película dental (4 u.)

Fabricada en material plástico

Ref. 070194


Totalmente permeable a los rayos-X.
Muy duradera, fiable y fácil de usar.

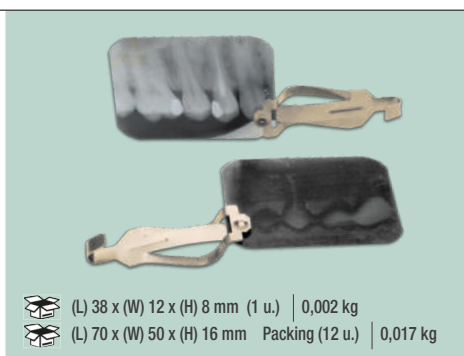

Pinza película dental (12 u.)

Acero inoxidable

Ref. 070190

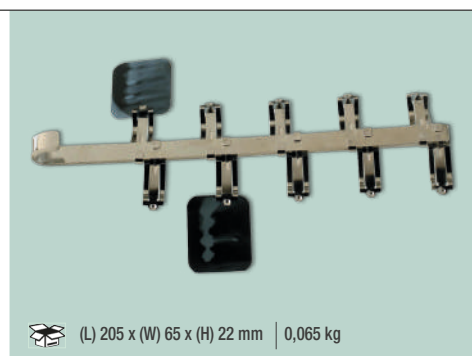

Soporte de 10 pinzas (para película dental)

Ref. 070192

Simplifica el manejo y la manipulación de hasta un total de 10 películas dentales. Fabricado enteramente en acero inoxidable.

Negatoscopios (planos)

Negatoscopios con pantalla de luz fría de 3500 Lux, alta luminosidad. Esta tecnología viene acompañada de un reducido consumo y de una duración prácticamente ilimitada (10.000 horas mínimo).

El modelo Ref.100132 dispone de una amplia pantalla retroiluminada por LED de tamaño SRA3 en la que se pueden visualizar films de gran formato. También cuenta con regulación de intensidad luminosa y dos tipos de funcionamiento: automático, al acercar el film el aparato se enciende sin necesidad de pulsar el botón; encendido convencional pulsando el botón.


	Área de visión	Área exterior		
Ref. 100131 DIN A4	300 x 210 mm	360 x 240 x 20 mm	Pared y sobremesa	1,700 kg
Ref. 100132 SRA3	430 x 355 mm	510 x 495 x 23 mm	Pared y sobremesa	3,076 kg
Ref. 100134 DIN A2	580 x 400 mm	700 x 520 x 33 mm	Pared	4,000 kg



(L) 410 x (W) 200 x (H) 88 mm | 4,032 kg
(L) 515 x (W) 350 x (H) 290 mm | 4,500 kg

Negatoscopio **Ref. 070460**

Se suministra con trípode de inclinación de 30°. Se puede colocar horizontal o atornillado a la pared. Incorpora un sistema de muelles que hace que la tapa amortigüe para poder sujetar las placas.

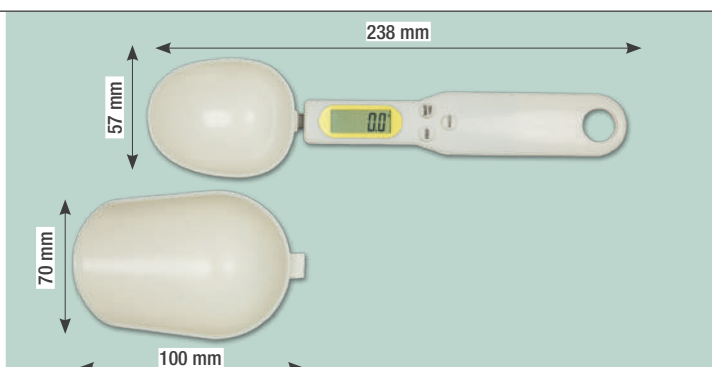

Cuchara dosificadora **Ref. 100270**


COMPROBADO: Ahorre entre un 20% y un 40% en escayola.

Ref. 100270 0,042 kg



Balanzas de precisión


Ref. 100040	(L) 150 x (W) 110 x (H) 36 mm	0,286 kg
Ref. 100041	(L) 248 x (W) 248 x (H) 100 mm	0,774 kg
Ref. 100042	(L) 300 x (W) 190 x (H) 55 mm	0,446 kg

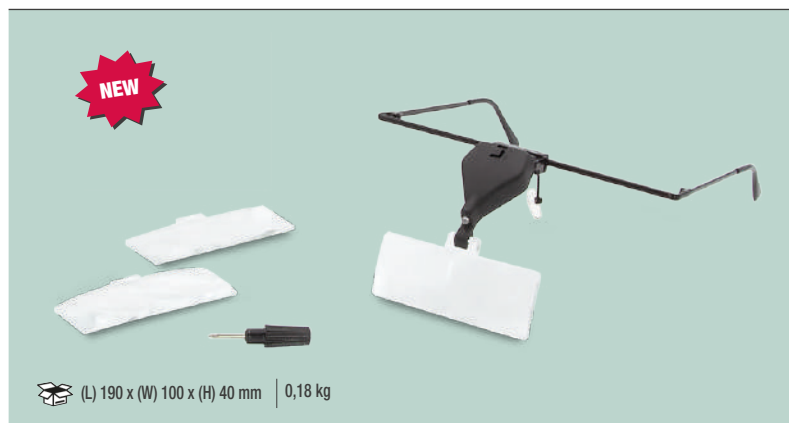

Lupa de aumento con montura

Ref. 100092

Se suministra con cuatro juegos de lentes: 1.5X, 2.5X y 3.5X aumentos.

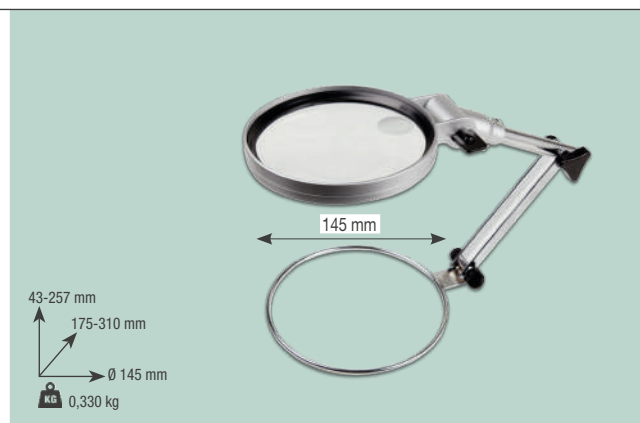

Lupa con pie


Ref. 100098

(L) 315 x (W) 154 x (H) 45 mm | 0,427 kg

Lupa de mano con luz

Ref. 100099


(L) 70 x (W) 50 x (H) 30 mm | 0,06 kg

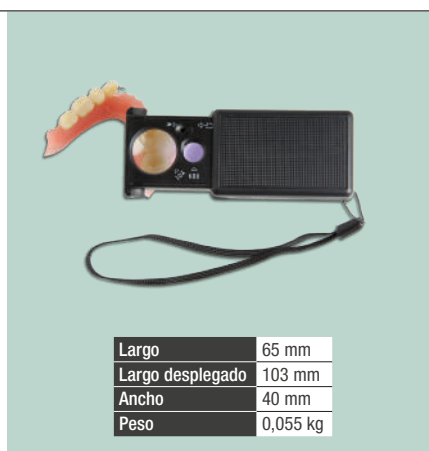


Pinzas de sujeción

Ref. 050554

(L) 120 x (W) 75 x (H) 68 mm
0,42 kg

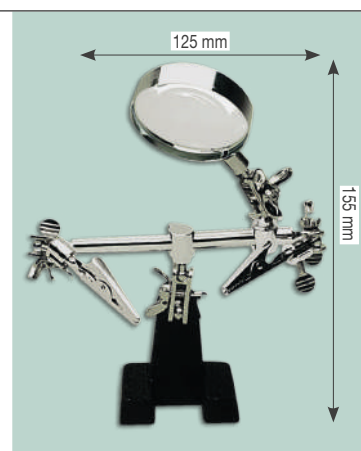

Medidores de coronas y calibre

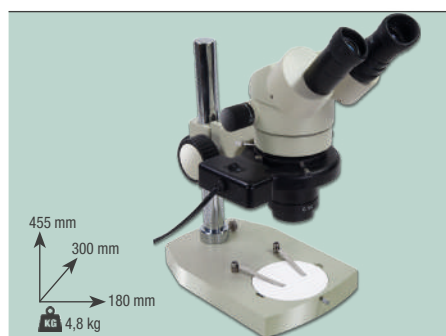

Microscopio con pie

Ref. 100097

Entre 5 y 15 aumentos. Distancia trabajo: 180 mm.

(L) 350 x (W) 275 x (H) 370 mm | 5 kg



Reveladora manual

Fabricada en plástico inyectado con filtro solar.

Ref. 070170

(L) 360 x (W) 230 x (H) 205 mm | 1,66 kg

(L) 520 x (W) 300 x (H) 360 mm | 2,8 kg



Reveladora manual (con negatoscopio)

Ref. 070180

(L) 360 x (W) 230 x (H) 270 mm | 3,5 kg

(L) 520 x (W) 300 x (H) 360 mm | 4,7 kg

Útiles de clínica

Lupas de aumento

Su sistema de fijación ajustable a la cabeza mantiene las manos libres para trabajar. Cuentan con cristales ultratransparentes de mínima absorción luminosa. Su diseño permite el uso simultáneo de gafas.

Se encuentran disponibles tres modelos distintos:

	Ref. 100079 (L) 285 x (W) 225 x (H) 89 mm	0,55 kg
	Ref. 100080 (L) 205 x (W) 185 x (H) 70 mm	0,25 kg
	Ref. 100090 (L) 175 x (W) 175 x (H) 70 mm	0,19 kg



Lupa de aumento binocular

Ref. 100096 2,5 Dioptrías.
Distancia de trabajo: 420 mm




Lupas dentales galileanas **Ref. 100093**

Sin mecanismo abatible, por lo que son más ligeras y la profundidad de campo y el campo de visión, es mayor y más amplio que con el sistema abatible. Cuatro tipos diferentes de gafas protectoras: SS, S, R, L.



Luz LED para lupas dentales galileanas **Ref. 100094**

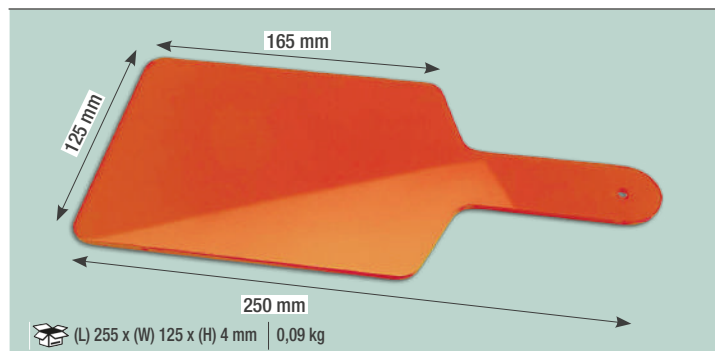

Escudo de protección rayos UV

Ref. 070515



Gafas de seguridad

Ref. 100011-12-13		(L) 160 x (W) 54 x (H) 56 mm	0,05 kg
Ref. 100014		(L) 180 x (W) 90 x (H) 65 mm	0,07 kg



Protectores faciales

Ref. 100021 (10 u.)	Ref. 100022 (10 u.)
 (L) 285 x (W) 185 x (H) 35 mm 0,23 kg	 (L) 308 x (W) 215 x (H) 35 mm 0,28 kg



Lupas Bioart

Aumento 2,5x Aumento 3,5x
Ref. 100076 **Ref. 100077**

Ligera, práctica y con excelente visión clara y panorámica. La lupa es imprescindible para procedimientos clínicos y de laboratorio. Fabricadas con resina CR-39, mayor resistencia contra abrasión y excelente transparencia.

Fabricado en plástico esterilizable a 135 C°.

Ref. 070054

Ref. 070051

Ref. 070053

Retractor labial Ref. 070055

Fabricado en plástico esterilizable a 135 C°.

(L) 120 x (W) 53 x (H) 18 mm (1 u.) 0,008 kg

(L) 145 x (W) 60 x (H) 25 mm - Paking (2 u.) 0,028 kg



Retractor labial Ref. 070056

Fabricado en plástico esterilizable a 135 C°.

(L) 115 x (W) 42 x (H) 18 mm (1 u.) 0,008 kg

(L) 140 x (W) 50 x (H) 25 mm - Paking (2 u.) 0,026 kg



Separador de mejillas

Ref. 070051 (L) 155 x (W) 10 x (H) 25 mm Paking (2 u.) 0,324 kg

Ref. 070053 (L) 155 x (W) 10 x (H) 25 mm Paking (2 u.) 0,355 kg

Ref. 070054 (L) 115 x (W) 70 x (H) 20 mm Paking (2 u.) 0,234 kg

(L) 150 x (W) 45 x (H) 20 mm (1 u.) 0,019 kg

(L) 170 x (W) 55 x (H) 30 mm - Paking (2 u.) 0,038 kg

Ref. 070057 A (L) 166 x (W) 55 x (H) 20 mm Paking (1 u.) 0,019 kg

Ref. 070057 B (L) 145 x (W) 45 x (H) 16 mm Paking (1 u.) 0,012 kg

Ref. 070057 A (L) 190 x (W) 60 x (H) 35 mm Paking (2 u.) 0,055 kg

Ref. 070057 B (L) 175 x (W) 50 x (H) 50 mm Paking (2 u.) 0,044 kg

Retractor labial (2 unidades) doble uso Ref. 070052

Fabricado en plástico esterilizable a 135 C°.

Retractor labial Ref. 070057A Ref. 070057B

Fabricados en plástico esterilizable a 135 C°.

Fabricado en plástico esterilizable a 135 C°.



Retractor labial Ref. 070058 A Ref. 070058 B Ref. 070058 C

Ref. 070058 A (L) 126 x (W) 50 x (H) 53 mm Paking (1 u.) 0,010 kg

Ref. 070058 B (L) 105 x (W) 48 x (H) 48 mm Paking (1 u.) 0,009 kg

Ref. 070058 C (L) 98 x (W) 42 x (H) 40 mm Paking (1 u.) 0,007 kg

Ref. 070058 (L) 145 x (W) 60 x (H) 55 mm Paking (2 u.) 0,034 kg

Retractor labial Ref. 070059

Fabricado en plástico esterilizable a 135 C°

(L) 73 x (W) 70 x (H) 28 mm (1 u.) 0,005 kg

(L) 130 x (W) 70 x (H) 80 mm Paking (10 u.) 0,052 kg

Servilletero (10 u.) Ref. 070060

(L) 520 mm (u.) 0,014 kg (u.)

(L) 100 x (W) 120 x (H) 30 mm (aprox.) 0,161 kg (10 u.)



Pinzas limpia-fresas Ref. 070520

Ideales para la inmersión de fresas y otros pequeños elementos en baños desinfectantes, ultrasonidos y autoclaves.

Fabricadas en acero inoxidable.

(L) 156 x (W) 45 x (H) 40 mm 0,021 kg



Plano de Fox (plástico) Ref. 070510

Fabricado en plástico esterilizable a 135 C°.


(L) 180 x (W) 130 x (H) 6 mm 0,038 kg



Arco porta cofferdam (young) Ref. 070045

Fabricado en plástico especial de alta resistencia a las temperaturas lo que se le permite ser esterilizable, irrompible y radiotransparente.

Ref. 070050 Metálico.

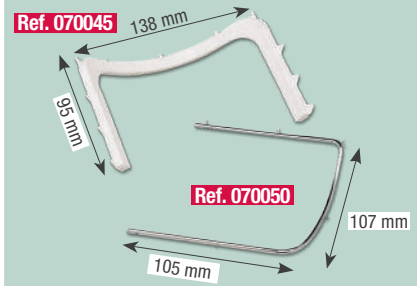



Microaplicadores (400 u. por caja)

Ref. 070667 **Ref. 070669** **Ref. 070671**



Cepillos desechables para profilaxis (100 u)

Ref. 070702 Duros **Ref. 070704** Blandos



Copas desechables para profilaxis (100 u)

Ref. 070706 Duras **Ref. 070708** Blandas



Mango para espejos

Ref. 070010
Acero inoxidable.

Ref. 070020
Aluminio anodizado.
Colores: Plata.

Ref. 070030
Acero inoxidable, el agarre de las puntas es seguro por estar su pinza seccionada en tres partes.



Bolsa surtido de juguetes

Ref. 160000

Surtido de 25 u.

Tamaño de la bola: Alto 550 mm x Ancho 500 mm



Espejos dentales (12 unidades)

De muy alta calidad y homologados. Todos son del tipo plano con chasis de acero inoxidable. Se encuentran disponibles en plata (tipo normal), y también en rodio.

El resultado es una imagen más nítida y sin distorsiones. Se suministran en cuatro tamaños diferentes, planos N°3, N°4, N°5, N°6 y con dos tipos de rosca: cónica y fina.

Rosca cónica

Plano	Normal	Rodio
N° 4	070551	070560
N° 5	070552	070561

Rosca simple

Plano	Normal	Rodio
N° 4	070556	070565
N° 5	070557	070566



Packing (12 u.) (L) 84 x (W) 52 x (H) 28 mm | 0,080 kg


Boquillas mezcladoras

Se suministran en bolsas de 50.

Compatibles con los principales sistemas de inyección del mercado.

REFERENCIA	COLOR
Ref. 100172	Amarillo (50 uds.)
Ref. 100176	Amarillo Puntas (50 uds.)
Ref. 100170	Verde (50 uds.)
Ref. 100178	Azul claro larga (50 uds.)
Ref. 100180	Azul claro corta (50 uds.)
Ref. 100184	Rosa (50 uds.)
Ref. 100187	Marrón (50 uds.)
Ref. 100187-01	Puntas 1,06 mm (50 uds.)
Ref. 100187-02	Puntas 2,00 mm (50 uds.)
Ref. 100185	Marrón corta (50 uds.)
Ref. 100186	Marrón larga (50 uds.)

(L) 160 x (W) 110 x (H) 45 mm | 0,12 kg

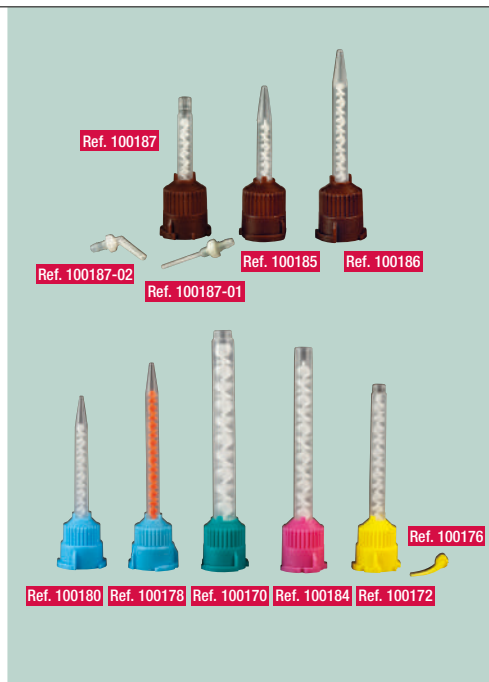

Pistola dispensadora

Reforzada

Ref. 100166

(L) 190 x (W) 120 x (H) 70 mm | 0,22 kg



Cubetas desechables (100 u.)

Ref. 100219 Kit completo

Cubetas de plástico higiénicas y desechables. Ahorran tiempo y detergente ya que evitan las operaciones de limpieza. Además se ajustan mediante la aplicación de calor a las dimensiones específicas de cada paciente.

Son transparentes para su uso en el campo de la implantología.

Disponibles en 10 formas y tamaños diferentes.

Contenido de la caja:

10 unidades - UL - UM - US - P1
10 unidades - LL - LM - LS - P2
10 unidades - PB - PA

Reposiciones: 25 unidades del modelo solicitado

Ref. 100220-UL - Superior Grande
Ref. 100220-UM - Superior Mediana
Ref. 100220-US - Superior Pequeña
Ref. 100220-LL - Inferior Grande
Ref. 100220-LM - Inferior Mediana
Ref. 100220-LS - Inferior Pequeña
Ref. 100220-PA - Parcial A
Ref. 100220-PB - Parcial B
Ref. 100220-P1 - Inferior Niños
Ref. 100220-P2 - Superior Niños

(L) 380 x (W) 290 x (H) 130 mm Paking (100 u.) | 1,526 kg

(L) 200 x (W) 200 x (H) 80 mm Paking (25 u.) | 0,246 kg



Cubetas desechables (100 u.) con retención

Ref. 100222 Kit completo


Fabricadas en plástico de alta resistencia. Rígidas e indeformables. Gracias a su diseño anatómico y a los diferentes tamaños, se adaptan a cualquier paciente. Tienen retención interna para evitar movimientos indeseados del alginato.

Además, la base está seccionada para poder abrir ventanas fácilmente -si fuera necesario-, con una fresa y librar así los postes de implante.

Contenido de la caja:

10 unidades UL1 - UM3 - US5
10 unidades LL2 - LM4 - LS6

10 unidades Q7 - Q8
10 unidades UA9 - LA10

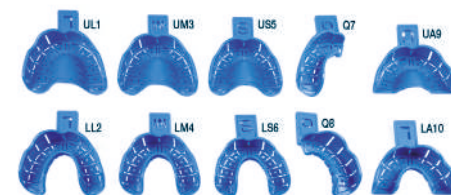

Reposiciones: 25 unidades del modelo solicitado

Ref. 100222-UL1 Superior Grande
Ref. 100222-UM3 Superior Mediana
Ref. 100222-US5 Superior Pequeña
Ref. 100222-LL2 Inferior Grande
Ref. 100222-LM4 Inferior Mediana
Ref. 100222-LS6 Inferior Pequeña
Ref. 100222-Q7 Parcial 7
Ref. 100222-Q8 Parcial 8
Ref. 100222-UA9 Superior Anterior
Ref. 100222-LA10 Inferior Anterior

(L) 380 x (W) 290 x (H) 130 mm | 1,526 kg

Cubetas para impresión (con retención) acero inox.

Ref. 070450 Set 6 cubetas


Ref. 070452 = L2 0,047 kg Ref. 070457 = U2 0,055 kg
 Ref. 070453 = L3 0,048 kg Ref. 070458 = U3 0,052 kg
 Ref. 070454 = L4 0,043 kg Ref. 070459 = U4 0,049 kg



Cubetas de impresión - Implantes (10 u.)

Ref. 100222


AZUL	100222-CA	Cuadrante	A
	100222-CB	Cuadrante	B
	100222-SG	Superior	Grande
	100222-IG	Inferior	Grande
	100222-SM	Superior	Mediana
	100222-IM	Inferior	Mediana
	100222-SP	Superior	Pequeña
	100222-IP	Inferior	Pequeña
	100222-SA	Superior	Anterior
	100222-IA	Inferior	Anterior

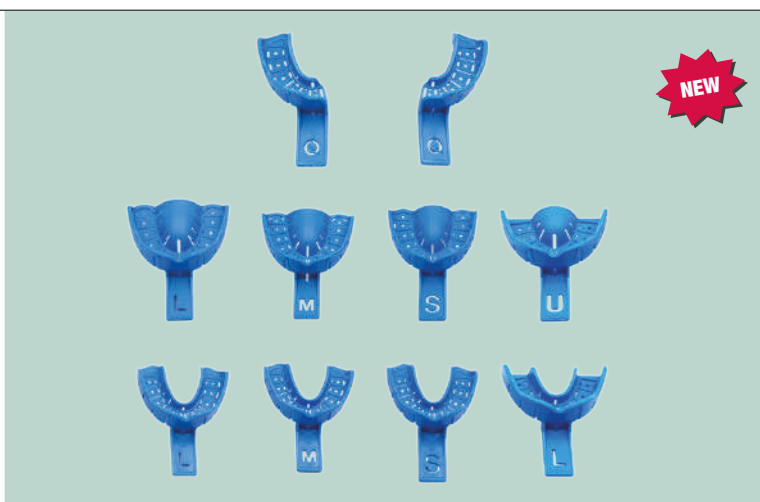

Cubetas de impresión - Autoclavables (12 u.)

Ref. 100223


VERDE	100223-CA	Cuadrante	A
	100223-CB	Cuadrante	B
	100223-SG	Superior	Grande
	100223-IG	Inferior	Grande
	100223-SM	Superior	Mediana
	100223-IM	Inferior	Mediana
	100223-SP	Superior	Pequeña
	100223-IP	Inferior	Pequeña
	100223-SA	Superior	Anterior
	100223-IA	Inferior	Anterior

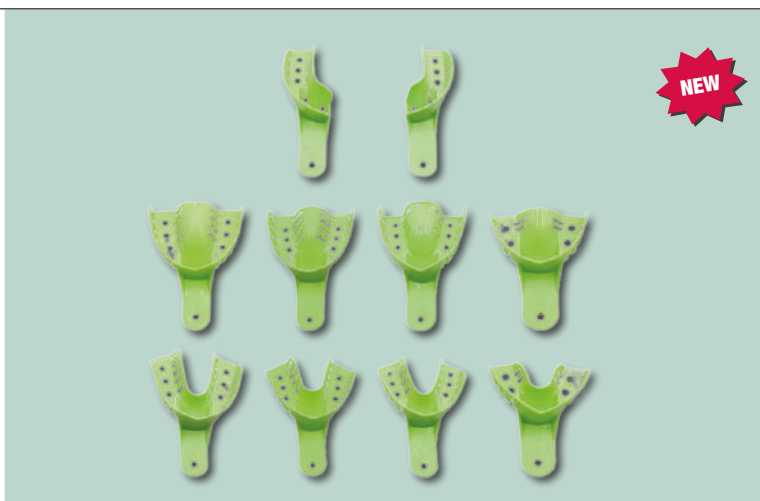

Cubetas para fluor (50 u.)

Ref. 100224

AZUL	100224-G	Dobles	Grande
AMARILLO	100224-M	Dobles	Mediana
VERDE	100224-P	Dobles	Pequeña

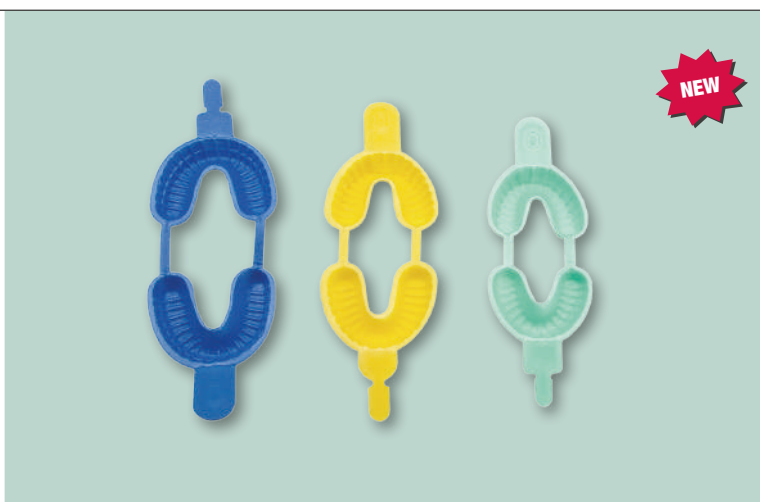

Cajas de transporte

Ref. 070605


Cordón para cajas.
Se suministran en 5 colores
surtidos (25 u.) 1 metro de largo

Ref. 070600

(25 u.) (L) 300 x (W) 180 x (H) 160 mm
0,74 kg (25 u.)



Dimensiones interiores

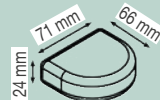

(25 u.) (L) 240 x (W) 160 x (H) 140 mm
0,54 kg (25 u.)




Cajas para prótesis y ortodoncia

Fabricada en plástico 25 u. surtidas

Ref. 070600

Dimensiones interiores

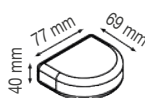


Cajas para ortodoncia

Fabricada en plástico 25 u. surtidas

Ref. 070590

Dimensiones interiores

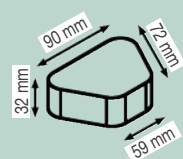


(100 u.) (L) 420 x (W) 380 x (H) 240 mm | 3,420 kg (100 u.)
(25 u.) (L) 300 x (W) 180 x (H) 160 mm | 0,742 kg (25 u.)



Ref. 070000-25 (25 u.)
Ref. 070001-25 (25 u.)

Dimensiones interiores

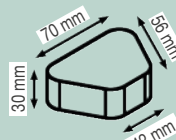

Ref. 070002-25 (25 u.) | **Ref. 070006-25** (25 u.)
Ref. 070007-25 (25 u.) | **Ref. 070008-25** (25 u.)
(100 u.) (L) 345 x (W) 305 x (H) 195 mm | 0,23 kg (100 u.)
(25 u.) (L) 240 x (W) 160 x (H) 140 mm | 0,23 kg (25 u.)



Cajas para prótesis

Fabricada en plástico

Ref. 070000 Azul (100 u.)

Ref. 070001 Rosa (100 u.)

Cajas para placas de ortodoncia

Fabricada en plástico de colores (100 u.)


Ref. 070002 Azul

Ref. 070007 Verde claro

Ref. 070006 Verde

Ref. 070008 Naranja

Dimensiones interiores

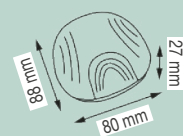


Cajas para prótesis

Fabricada en plástico 5 u. surtidas

Ref. 070622

NEW

Dimensiones interiores

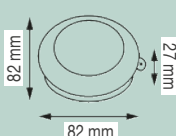


Cajas para prótesis

Fabricada en plástico 5 u. surtidas

Ref. 070616

NEW

Dimensiones interiores

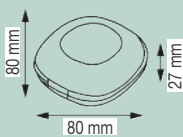

Cajas cuadradas para prótesis

Fabricadas en plástico (5 u. por cada color)

Ref. 070618 Blanco


Ref. 070619 Azul

Ref. 070620 Negro

NEW

Cajas para modelos de ortodoncia

Ref. 070570 (100 u.)

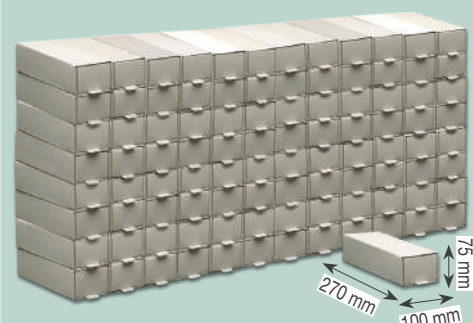

(100 u.) (L) 555 x (W) 390 x (H) 335 mm | 12,330 kg (100 u.)



Contenedores para modelos

Ref. 070003 6 modelos horizontales

Ref. 070004 12 modelos verticales

Ref. 070003 (L) 230 x (W) 240 x (H) 58 mm | 0,345 kg

Ref. 070004 (L) 290 x (W) 220 x (H) 75 mm | 0,425 kg

Cajas de transporte

Cajas con membrana

Fabricadas en plástico

Diseñadas específicamente para el transporte y entrega de elementos de alta calidad. El interior se encuentra acolchado por una membrana de gran flexibilidad, lo que provoca la ilusión óptica de que el contenido de su interior se encuentra suspendido en el aire.

Al ser transparente, el contenido se puede visualizar desde todos los ángulos y perspectivas. Fabricadas en material transparente de muy alta resistencia y con cierre de seguridad. Se suministran en bolsas de 10 unidades.

Ref. 100262	(L) 55 x (W) 49 x (H) 25 mm	0,023 kg u.
10 u.	(L) 147 x (W) 56 x (H) 56 mm	0,261 kg
Ref. 100263	(L) 60 x (W) 100 x (H) 22 mm	0,045 kg u.
10 u.	(L) 125 x (W) 105 x (H) 135 mm	0,475 kg
Ref. 100264	(L) 100 x (W) 100 x (H) 45 mm	0,081 kg u.
10 u.	(L) 430 x (W) 110 x (H) 100 mm	0,911 kg



Cajas con membrana (Fabricadas en plástico)

Interior acolchado por una membrana de gran flexibilidad. Al ser transparente, el contenido se puede visualizar desde todos los ángulos y perspectivas. Se suministran en bolsas de 10 unidades.


Ref. 100259	(L) 23 x (W) 23 x (H) 25 mm	0,026 kg u.
Ref. 100260	(L) 50 x (W) 50 x (H) 25 mm	0,023 kg u.
Ref. 100261	(L) 75 x (W) 75 x (H) 40 mm	0,045 kg u.



Cajas de transporte para brackets

Ref. 100263B (bolsas de 10 unidades) Fabricadas en plástico

Ref. 100263 (10 u.) | (L) 60 x (W) 100 x (H) 22 mm | 0,045 kg u.

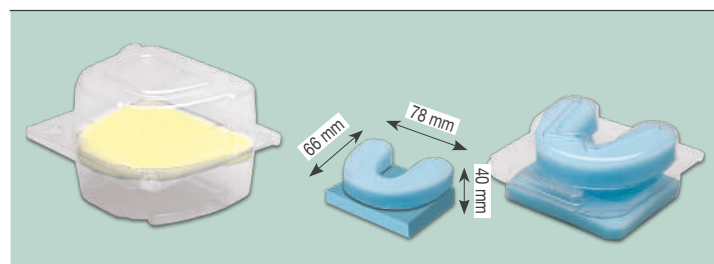

Cajas para modelos


Fabricadas en plástico

Caja Pequeña

Ref. 070033 (50 u.)

Caja Grande

Ref. 070034 (50 u.)

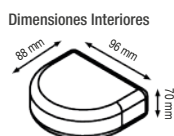

Ref. 070033	Packing (50 u.)	(L) 290 x (W) 225 x (H) 255 mm	1,121 kg
Ref. 070034	Packing (50 u.)	(L) 290 x (W) 225 x (H) 255 mm	0,930 kg



Cajas de transporte

y limpieza Fabricadas en plástico

Ref. 100265


(L) 115 x (W) 95 x (H) 46 mm	0,118 kg
(L) 120 x (W) 100 x (H) 50 mm	0,143 kg



Cajas para prótesis (con escurridera, 4 u.)

Ref. 100267 Fabricada en plástico

Ref. 100267	(L) 85 x (W) 76 x (H) 80 mm	0,082 kg
4 unidades	(L) 165 x (W) 165 x (H) 80 mm	0,389 kg

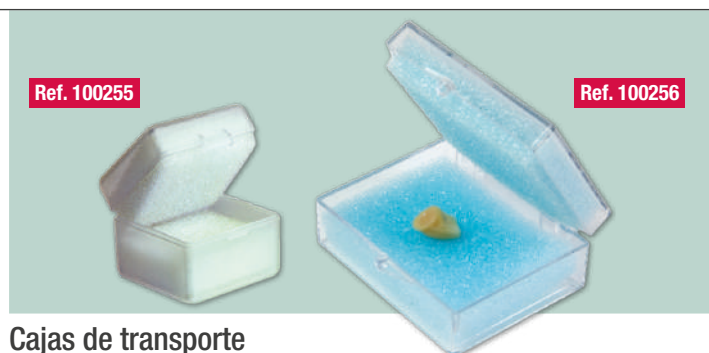


Cajas de transporte

Fabricadas en plástico

Ref. 100255	(L) 29 x (W) 29 x (H) 23 mm	0,005 kg u.
50 u.	(L) 178 x (W) 150 x (H) 44 mm	0,289 kg- 50 u.
Ref. 100256	(L) 56 x (W) 44 x (H) 23 mm	0,011 kg u.
24 u.	(L) 280 x (W) 235 x (H) 23 mm	0,318 kg- 25 u.



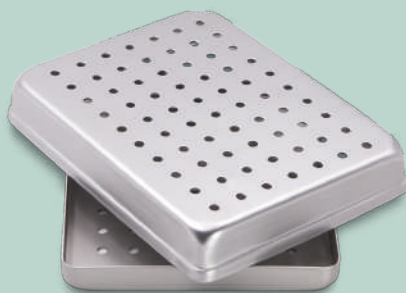

Ref. 070444	Pequeña	(L) 185 x (W) 145 x (H) 40 mm	0,241 kg
Ref. 070445	Grande	(L) 290 x (W) 190 x (H) 40 mm	0,400 kg


Bandejas porta instrumentos

Fabricadas en aluminio anodizado. (Color plata)

Ref. 070444 Pequeña **Ref. 070445** Grande

PEQUEÑO


Ref. 070430	Plata
Ref. 070431	Oro
Ref. 070432	Rojo
Ref. 070433	Azul
Ref. 070434	Verde

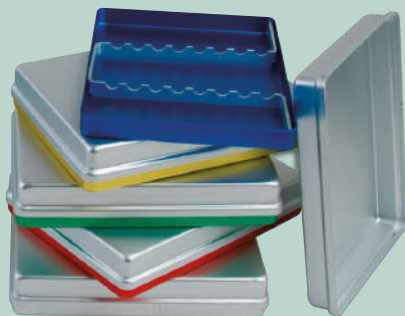

Ref. 070430-1-2-3-4 | (L) 185 x (W) 145 x (H) 40 mm | 0,250 kg

GRANDE

Ref. 070439	Verde
Ref. 070440	Plata
Ref. 070441	Oro
Ref. 070442	Rojo
Ref. 070443	Azul

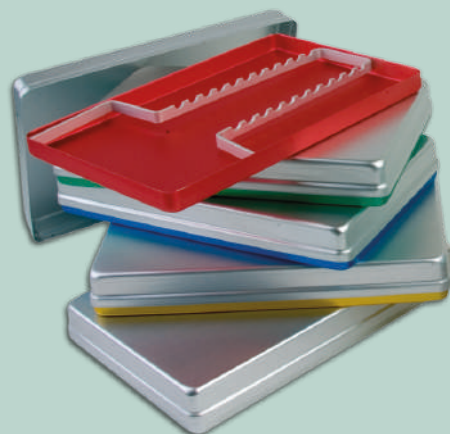

Ref. 070439-0-1-2-3 | (L) 290 x (W) 185 x (H) 40 mm | 0,414 kg


Bandejas porta instrumentos

Fabricadas en aluminio anodizado.



Caja acero inox.18/8.
Placa aluminio anodizado.

Ref. 070410 | (L) 210 x (W) 115 x (H) 45 mm | 1,127 kg

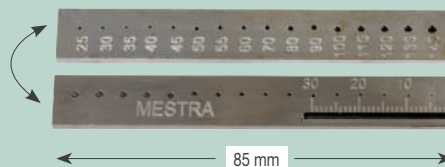

Ref. 070420 | (L) 85 mm | 0,017 kg

Caja para endodoncia

Ref. 070410

Regla (para calibrado de limas)

Ref. 070420

Horno de glaseado

Horno de glaseado

Ref. 100252

Lo que estabas esperando

¿QUÉ ES GLAZING AIR?

El glaseado es el proceso de post-procesamiento del circonio sinterizado. No solo otorga una alta estética al formar una capa de brillo en la prótesis, sino que también estabiliza su color y aumenta la dureza superficial para incrementar la resistencia a la abrasión dental y a las fracturas.

Las prótesis de circonio se han convertido en tendencia, y cada vez más clientes deben comprar un horno de porcelana solo para el glaseado.

El **GLAZING AIR** es un **horno exclusivo para el glaseado de circonio**, que excluye audazmente las funciones de vacío que no se utilizan para este proceso. Es un producto asequible que mantiene únicamente una tecnología de control de temperatura rápida y precisa, un tamaño compacto y un costo económico.

VENTAJAS

HORNO ASEQUIBLE EXCLUSIVO PARA GLASEADO



Horno especializado para glaseado de circonio que prescinde de funciones como el vacío, conservando absolutamente las funciones necesarias.

GLASEADO RÁPIDO



Alcanza los 1000 °C en menos de 10 minutos (promedio de 5 minutos) utilizando una resistencia Kanthal® con buena conductividad térmica.

CONTROL DE TEMPERATURA PRECISO



El control preciso de la temperatura proporciona el resultado perfecto para cualquier marca.

ALTA COMODIDAD PARA EL USUARIO



- Se pueden utilizar simultáneamente el teclado membrana y el táctil.
- Mejora la comodidad del usuario al incluir en el diseño un pedestal auxiliar (para colocar el resultado).

Potencia nominal	Máx. 1,3 kW
Fuente de alimentación de entrada	AC 220~240V 50/60Hz
Fusible	10 A
Temperatura máxima	1000 °C



Autoclave 18-D, clase B 18 L

Ref. 100365




- ✓ Autoclave de sobremesa de 18 litros clase B.
- ✓ Componentes internos de alta calidad de marcas italianas, japonesas y estadounidenses.
 - Válvulas ODE.
 - Bomba de vacío ULUAK.
 - Bomba de agua ULKA.
- ✓ Ultra silencioso (nivel de sonoridad inferior a 70 dB).
- ✓ Sistema de vacío triple fraccionado con un generador independiente de vapor, el cual garantiza ciclos de esterilización rápidos y seguros.
- ✓ Sistema de control de alta precisión para unos resultados de esterilización perfectos (EN13060).
- ✓ Autodiagnóstico con códigos de error.
- ✓ Completamente automático con ciclos de esterilización pre-programados.
- ✓ Cámara y puerta en acero inoxidable, con acabado de electro-pulido.
- ✓ Tanque de agua tipo abierto, lo que permite fácil llenado y limpieza.
- ✓ Pantalla LCD, que muestra información sobre el proceso de los ciclos: tiempo, temperatura, presión, alerta de procesos.
- ✓ Diferentes idiomas para elegir.
- ✓ Impresión del reporte de esterilización y display disponible en varios idiomas.
- ✓ Incluye USB e impresora.
- ✓ Test: Test de vacío / Test de Bowie & Dick / Test de Helix.
- ✓ Válvula de seguridad de presión evita la sobrepresión en la cámara y el generador de vapor.

Voltaje Nominal	220-240 V 50/60 Hz.
Disyuntor	F16 A / 400 V
Potencia Nominal	1750 V
Temp. de esterilización	121 / 134 °C
Capacidad tanque agua destilada	2.5 litros
Temp. de operación (°C)	5-40
Humedad relativa de operación	Máx. 80 %, no condensada
Nivel máx. de ruido	< 70 dB
Presión atm. de operación (kPa)	76-106

(L) 690 x (W) 575 x (H) 525 mm | 51 kg

icanCLAVE

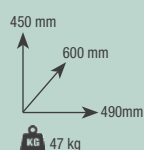

Dimensiones cámara: 247 / 350 mm



Tanque de llenado.



Válvula de seguridad.



Cierre de seguridad.



Filtro Bacteriológico.

NORMATIVAS

- ✓ 97/23/EEC Directiva de Equipos a Presión.
- ✓ Reglamento (UE) 2017/745 sobre productos sanitarios (MDR).
- ✓ EN 13060 Esterilizadores de vapor de agua pequeños.

- ✓ EN 61326, EN 61000 Compatibilidad electromagnética.
- ✓ EN 61010-1, UL 61010-1 Requisitos de seguridad.
- ✓ EN 61010-2-040, IEC 61010-2-040 Requisitos específicos para esterilizadores de vapor usados para tratamientos de materiales médicos.

- ✓ EN 13485:2012/AC:2012
- ✓ ISO 13485:2003

Servicio Técnico Oficial ICANCLAVE en España

Autoclave icanCLAVE 3F

Ref. 100367



icanCLAVE 3F es un autoclave superrápido, especial para la esterilización de instrumental sin envolver, que mejora enormemente la tasa de rotación del instrumental quirúrgico y la comodidad de pequeñas operaciones como odontología.


- ✓ **Puerto de impresora:** Se utiliza para conectar una impresora externa e imprimir el informe del ciclo automáticamente.
- ✓ **Puerto USB:** Se utiliza para conectar un disco USB, todos los datos de esterilización se emiten automáticamente en el disco USB y pueden estar listos directamente en cualquier PC y almacenarse electrónicamente.
- ✓ **Memoria interna:** Los últimos 9999 ciclos pueden almacenarse automáticamente en el sistema de autoclave, pudiendo imprimirse en cualquier momento.
- ✓ **Puerto de impresora de etiquetas de código de barras:** Se utiliza para conectar una impresora de código de barras opcional imprime etiquetas de código de barras que contienen la información relacionada con el ciclo de esterilización.
- ✓ **Maleta para transportar.**

CARACTERÍSTICAS:

- ✓ **Ciclos estándar preprogramados:** Quick S, Standard B, Soft B, Prion 134°C, test B&D, Test Helix, Test de vacío.
- ✓ Otros ciclos: Descalc (limpieza del generador de vapor y del tubo).
- ✓ Generador de vapor incorporado con una potencia nominal de 2000W.
- ✓ Conexión a depósitos de agua limpia y usada (no incluidos).
- ✓ Sistema de puerta manual.
- ✓ Pantalla táctil en color.
- ✓ Sistema de aviso de desbloqueo de puerta.
- ✓ Sistema de identificación de la presión atmosférica.
- ✓ **Sistema de seguridad:**
 - Válvula de seguridad de sobrepresión.
 - Interruptor de sobretensión.
 - Sistema de bloqueo que impide el cierre incorrecto de la puerta.
 - Disyuntores que protegen la máquina en caso de cortocircuito o sobrecorriente.
 - Aviso automático de mantenimiento.



Pantalla táctil.

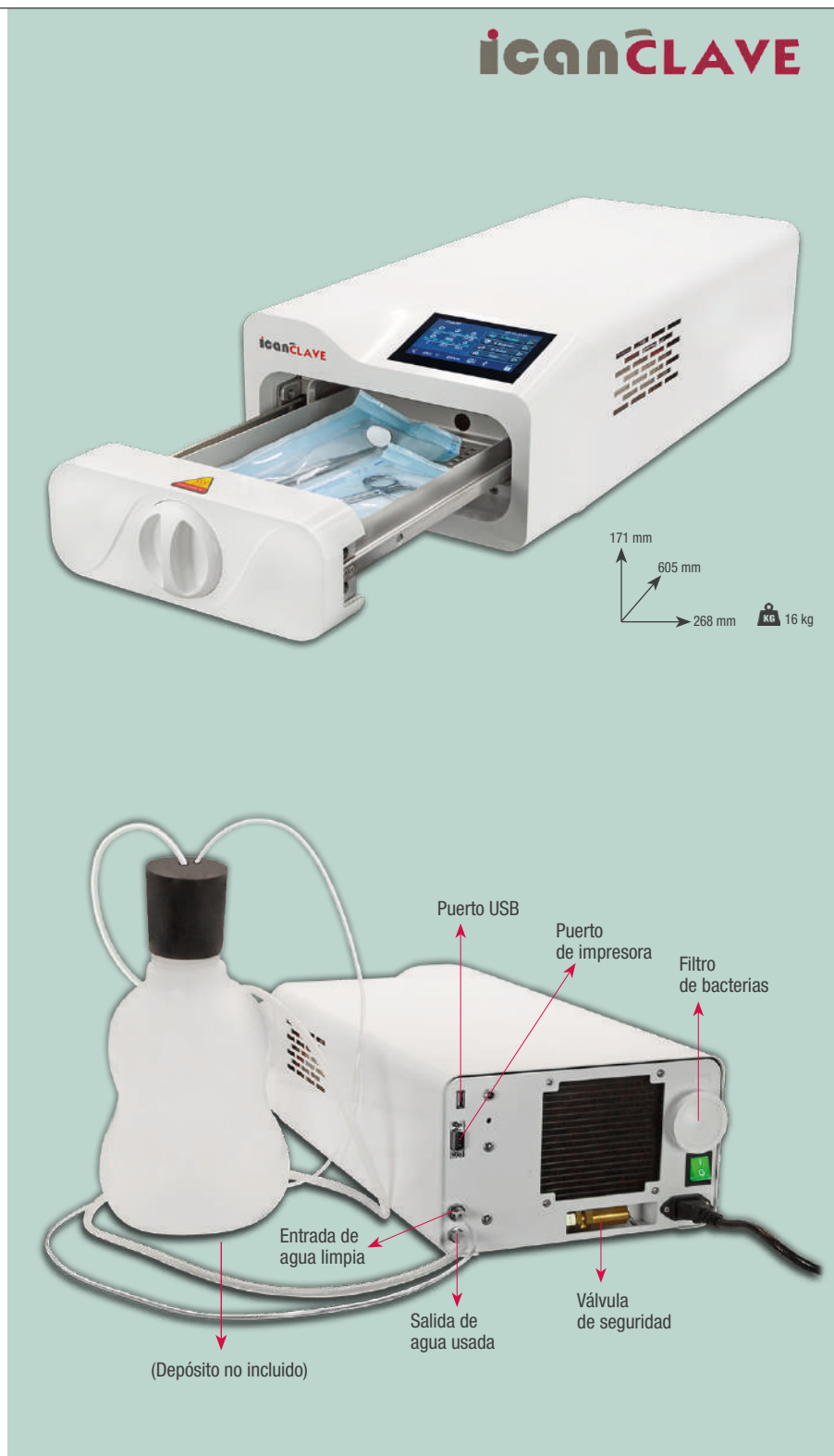

Modelo	STE-3-F
Dimensión de la cámara (mm)	192(W) x 45(H) x 285(D)
Volumen de la cámara	Aprox. 3L
Número de bandejas	1
Material bandejas	Aluminio
Tamaño bandejas	178 x 285mm
Voltaje, Frecuencia	220/110V, 50/60Hz
Potencia	2300 W

NORMAS:

- Directiva 93/42/CEE sobre productos sanitarios.
- Directiva 2014/68/UE sobre equipos a presión.
- EN 13060 Esterilizadores de vapor pequeños.
- EN 61326, EN 61000 Compatibilidad electromagnética.
- EN 61010-1, UL 61010-1 Requisitos de seguridad.
- EN 61010-2-040, IEC 61010-2-040.
- Directiva RoHS 2011/65/UE.

Maleta para transportar.



Limpieza y desinfección



Depósito de agua destilada

Ref. 080620

Depósito especialmente diseñado para el almacenamiento y suministro de agua destilada a presión en el sector dental. Está fabricado en acero inoxidable, con regulador de presión y doble válvula de seguridad.

Antes de llenar el depósito, debe limpiarse y esterilizarse convenientemente. No utilizar detergentes que contengan ácido hidroclórico o similares.

- ✓ Presión de trabajo: 5 bar
- ✓ Conexión: tubo Ø 6 mm.
- ✓ Está fabricado en acero inoxidable.
- ✓ Regulador de presión y doble válvula de seguridad.

Inox



680 mm
Ø 255 mm
255 mm
2,4 kg

Equipo de microchorreado (Laboratorio)

Ref. 100122

Imprescindibles para la limpieza y adecuación de microrreteniones, coronas, arenamientos oclusares, ajuste de contactos interproximales, y un sin fin de operaciones de arenado de precisión. **Este modelo es para laboratorio de prótesis dental; no puede ser utilizado para aplicaciones intra-oral.**

Capacidad	18 litros
Peso	4,7 kg

Incubadores biológicos de esporas

Aparatos incubadores de esporas sencillos y fáciles de manejar. Resultan imprescindibles para realizar las pruebas necesarias que confirman el adecuado funcionamiento de los aparatos de esterilización. Se encuentran disponibles dos modelos: **Elite**, con display digital y temperatura regulable; y **Practic**, muy funcional y económico. Ambos tienen cuatro cámaras para poder realizar al mismo tiempo otras tantas verificaciones.

Por su parte el modelo **Elite** cuenta además con una pantalla que indica la temperatura a la que se realiza la prueba y el tiempo que resta hasta que ésta finalice. Su control electrónico también alerta de anomalías tales como cortes en el suministro eléctrico para evitar resultados incorrectos.

Los dos aparatos realizan la prueba a 57,5°C, aunque el modelo Elite permite operar también a 35°C en función del tipo de esporas utilizadas.

35°C +- 2,5°C para Bacillus Subtilis.
57,5°C +- 2,5°C para Geobacillus stearothermophilus.

Referencia	Elite Ref. 100370	Practic Ref. 100375
Tensión	230 V 50/60 Hz	90-250 V 50/60 Hz
Consumo	25 W	10 W
Temperatura de uso	57,5 +- 2,5°C e 35 +- 2,5°C	57,5°C
Alto	80 mm	90 mm
Ancho	105 mm	75 mm
Fondo	165 mm	75 mm
Peso	0,750 kg	0,239 kg

Ref. 100370	(L) 210 x (W) 260 x (H) 175 mm	1,1 kg
Ref. 100375	(L) 103 x (W) 110 x (H) 95 mm	0,3 kg



Ref. 100370

Ref. 100375

Destilador/descalcificador

Ref. 100210

Basta con llenar la cuba con agua del grifo para obtener 4 litros de agua destilado en un tiempo aproximado de 5 horas. El agua resultante tiene una alta pureza (entre 2 y 10 mg/litro de residuo sólido) y puede emplearse en multitud de aplicaciones en la clínica y el laboratorio dental (autoclaves, realización de mezclas, máquinas generadoras de vapor, etc.).

El aparato se suministra con un tanque de PVC de 4 litros; un juego de filtros de carbono activo; y un bote de ácido cítrico para la limpieza del tanque.

IMPORTANTE: El agua suministrada por el aparato corresponde al tipo "DESTILADA". Sin embargo, no puede ser empleada para uso en inyectables, viales, limpieza de heridas y en general cualquier aplicación de tipo quirúrgico que requiera pureza del tipo TRI-DESTILADA.

Ref. 100210-01

Recambio limpiador destilador (500 g.)

Ref. 100210-02

Recambio filtros destilador (6 u.)



Dimensiones	280 x 250 x 365 mm
Peso	3,5 kg
Tensión	230 V 50/60 Hz
Potencia	580 W
Capacidad	4 l.

(L) 285 x (W) 285 x (H) 400 mm | 5 kg



Limpiador de ultrasonidos DA10

Ref. 100750

ELECTRÓNICA DE ALTO RENDIMIENTO

- ✓ Equipado con un chipset de última generación y algoritmos avanzados.
- ✓ Distingue automáticamente entre diente y encía.
- ✓ Garantiza una experiencia de limpieza cómoda y segura.

PIEZA DE MANO DE ALTA CALIDAD CON ILUMINACIÓN

- ✓ Diseño desmontable que permite esterilización a alta temperatura y presión.
- ✓ Luz con tonalidad que mejora la visibilidad durante el tratamiento.

RETROALIMENTACIÓN INTELIGENTE DEL NIVEL DE POTENCIA

- ✓ Ajusta automáticamente la potencia según la dureza del cálculo.
- ✓ Mayor eficiencia en la limpieza.



NEW

Peso	1,3 kg
Pot. entrada	35VA
Pot. salida	3W-29W
Frecuencia	18kHz-45kHz
Voltaje	230 V, 50 Hz

Limpiador de ultrasonidos Q5

Ref. 100755

- ✓ Ajuste de potencia (100-800 Mn).
- ✓ **3 modos de funcionamiento:** Limpieza general, Tratamiento periodontal, Tratamiento endodóntico.
- ✓ Suministro automático de agua desde una botella integrada en el aparato.
- ✓ **Panel de control impermeable.**
- ✓ **Tanque de agua de gran capacidad (800 ml)**
- ✓ **Incluye pedal inalámbrico IPX4:** Elimina enredos de cables.

TECNOLOGÍA DE ONDA SINUSOIDAL

Evita el impacto instantáneo que produce la onda cuadrada tradicional, proporcionando una amplitud estable y vibraciones regulares y potentes. Eficiencia y comodidad para una limpieza dental sin dolor.

TECNOLOGÍA PAINLESS
Reduce al máximo la sensibilidad del paciente.



NEW

ACCESORIOS INCLUIDOS

- ✓ Piezas de mano LED PH-2 x4
- ✓ Pedal inalámbrico x1
- ✓ Pedal con cable x1
- ✓ Cable de alimentación x1
- ✓ Botella de agua x1
- ✓ Llave endodóntica x1
- ✓ Puntas de limpieza x16
- ✓ Carátula impermeable x1
- ✓ Limas endodónticas #25 x12

Peso	1,8 kg
Pot. entrada	35VA
Pot. salida	3W-20W
Frecuencia	25kHz-35kHz
Voltaje	230 V, 50 Hz

Limpiador de ultrasonidos Q6

Ref. 100760

6 funciones en 1 sólo aparato:

- ✓ Limpieza ultrasónica.
- ✓ Terapia periodontal.
- ✓ Irrigación de conductos radiculares.
- ✓ Pulido supragingival con aire.
- ✓ Pulido subgingival con aire.
- ✓ Mantenimiento de implantes.

PANEL TÁCTIL:

Interfaz clara con sensores ultrasensibles, diseño resistente al polvo y al agua. Funciona incluso con guantes, gotas de agua o cubiertas protectoras.

DISEÑO DE DOBLE TANQUE DE AGUA:

Cambio rápido entre tanques para usar agua pura o soluciones medicadas con un solo clic.

PUNTAS DE ALEACIÓN DE TITANIO

Baja dureza para proteger dientes y encías.



NEW

Peso	1,5 kg
Pot. entrada	30 VA ~ 48 VA
Pot. salida	3 W ~ 20 W
Frecuencia	25kHz-35kHz
Voltaje	100 V-240 V~, 50/60 Hz

TECNOLOGÍA PAINLESS
Reduce al máximo la sensibilidad del paciente.

Lámpara de curado básica V200

Ref. 100700


El robusto cañón de fibra óptica dirige la luz de manera efectiva consiguiendo una **polimerización homogénea de los composites**.

Destaca por su **relación calidad-precio, convirtiéndose en una opción ideal para clínicas nuevas, o como una segunda unidad indispensable**, que ofrece tranquilidad ante imprevistos.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Intensidad de luz constante.
- ✓ Hasta 600 polimerizaciones con una sola recarga.
- ✓ Diseño cómodo y ergonómico. Sencillez de manejo.
- ✓ Apagado automático en caso de no utilización.
- ✓ Radiación: entre 1600 ~ 2000 W/cm²
- ✓ Límite de emisión 3,9 X 10J
- ✓ Longitud de onda polimerizadora: 420~480nm.

Dimensiones	243 mm x Ø25 mm
Peso	390 g
Capacidad	2200mAh
Voltaje	3.7V
Batería	Recargable

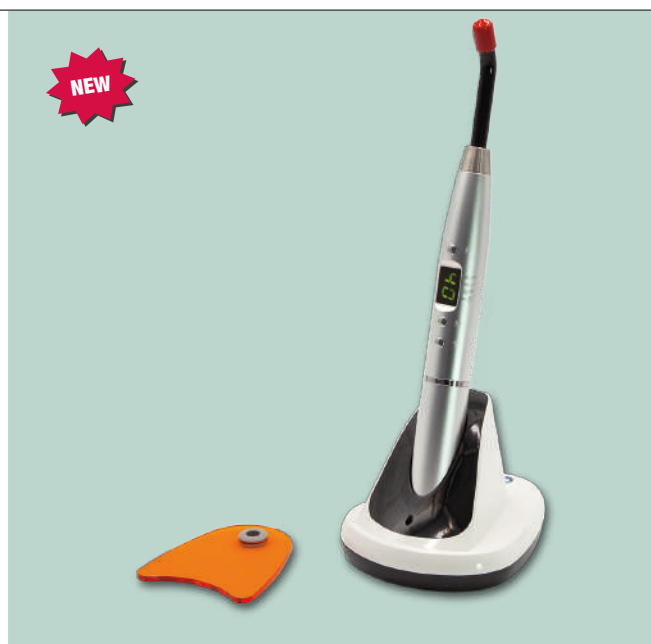

Lámpara de curado de gama media DV 50


Ref. 100705

Diseñada para optimizar cada paso de la polimerización de composites.

La principal innovación de la DV50 reside en la ubicación directa del emisor LED. Esto se traduce en una densidad de potencia significativamente mayor, alcanzando hasta 2600 mW/cm². Como resultado el curado se realiza de manera muy rápida, minimizando el tiempo de exposición.

Ergonómico y práctico. Su forma recta y estilizada permite un acceso sin esfuerzo a las zonas posteriores de la arcada, como las molares y terceros molares, eliminando las incomodidades asociadas a otras lámparas.

Dimensiones	217 mm x Ø 22,5 mm
Peso	117 g
Intensidad máxima	2600mW/cm ²
Longitud de onda	385 nm-515 nm
Batería	Recargable de 2200mAh
LED	Emisor de 10 W
Adaptador de corriente	≈ 100-240 V 50/60 Hz.
Función de medición de intensidad luminosa.	

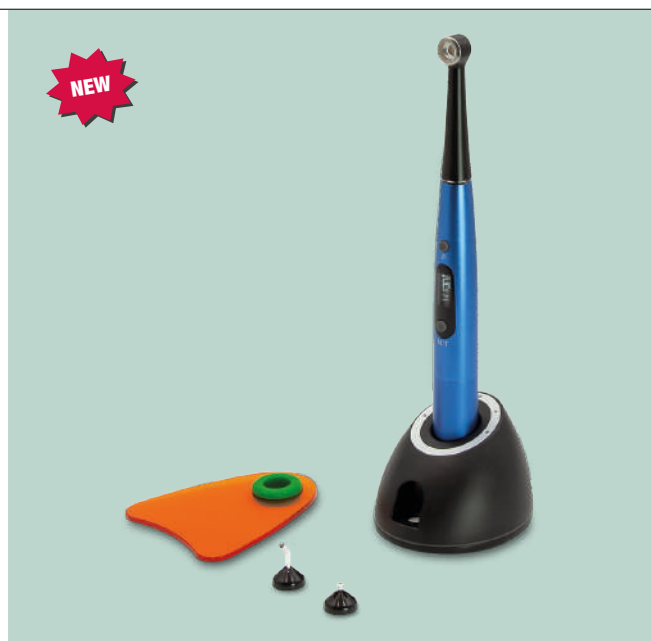

Lámpara de curado de gama alta VAFU

Ref. 100710

Un equipo encuadrado en la gama premium de la polimerización dental. Su potencia luminosa alcanza los 3200 mW/cm², lo que permite un curado ultrarrápido en tan solo 1 o 2 segundos, minimizando drásticamente el tiempo de permanencia de la lámpara en boca y optimizando la comodidad del paciente.

Cabezal multi-LED avanzado, compuesto por cuatro pastillas independientes.

Cada una emite a una frecuencia distinta, logrando un espectro de luz excepcionalmente amplio (385 nm a 515 nm). Esto asegura la polimerización eficaz en tiempo récord, de prácticamente la totalidad de los materiales dentales disponibles en el mercado.

Dimensiones	33 x 27 x 206 mm
Potencia	3200 mW/cm ²
Longitud de onda	385nm-515nm
Batería	Recargable de 2200 mAh.
Adaptador de corriente	≈ 100-240 V 50/60 Hz.
Función de medición de intensidad luminosa.	



INCLUYE:

- ✓ 1 unidad principal.
- ✓ 1 cargador.
- ✓ 1 batería.
- ✓ 1 juego de lentes (4 unidades)
- ✓ 1 escudo protector de luz.
- ✓ 1 cabezal detector de caries.
- ✓ Gafas.


Limpieza y desinfección

Selladora de bolsas automática

Ref. 080435

- ✓ Pantalla táctil de 7" con indicaciones.
- ✓ Sistema de calentamiento rápido para un sellado perfecto.
- ✓ La temperatura de sellado puede ser regulada por el usuario.
- ✓ Su impresora integrada, permite marcar los registros obtenidos, para una correcta trazabilidad tanto en la clínica como en el laboratorio.
- ✓ Conforme a las normas: ISO11607-2: 2006 y EN868-5-2009

Start Date: 20200512 Exp. Date: 20200611 Batch No.: 00000000 Operator: Higienista Department: Sección esteril Nota: Prog. envuelto ID: 5119C032

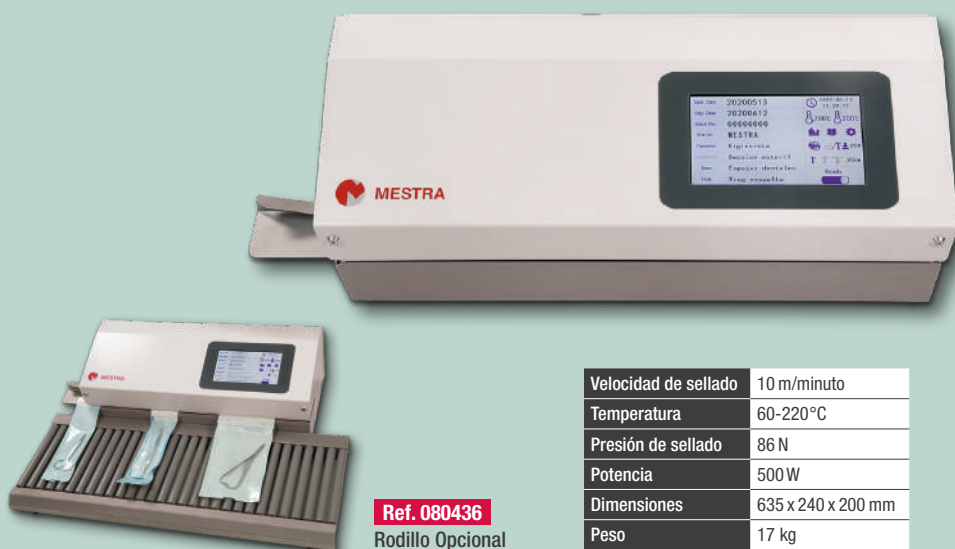

Velocidad de sellado	10 m/minuto
Temperatura	60-220°C
Presión de sellado	86 N
Potencia	500 W
Dimensiones	635 x 240 x 200 mm
Peso	17 kg

Ref. 080436
Rodillo Opcional



NEW

Film protector

Ref. 080439

Este film adhesivo ofrece una solución práctica y efectiva para entornos dentales, proporcionando una capa de protección para instrumentos y materiales.

Cada rollo contiene 1200 adhesivos precortados de 10 x 15 cm. Color azul.

Selladora de bolsas

Ref. 080433

Aparato sencillo y de línea agradable.

Pese a sus reducidas dimensiones, tiene una longitud de sellado de 305 mm y una anchura de sellado de 12 mm, lo que la convierte en una selladora de prestaciones similares a modelos de mucho mayor coste.

Ideal para su empleo en la clínica dental.

Alto	210 mm
Ancho	430 mm
Fondo	335 mm
Peso	6.5 kg
Tensión	230 V 50/60 Hz
Potencia	100 W

Ⓛ (L) 500 x (W) 415 x (H) 245 mm | 8,7 kg



Bobinas para selladoras

Ref. 080441	5 cm x 200 m
Ref. 080442	7.5 cm x 200 m
Ref. 080443	10 cm x 200 m
Ref. 080444	15 cm x 200 m

Ref. 080445	20 cm x 200 m
Ref. 080446	25 cm x 200 m
Ref. 080447	30 cm x 200 m

Productos Sanitarios Clase I (MDR 2017/745)
Conforme a las normas ISO 11607-1:2017 y EN 868-5:2009

Nuevas bolsas 5x9 cm, 200 unidades por paquete.
¡LAS MÁS PEQUEÑAS DEL MERCADO!

NEW



Bolsa autoadhesiva para esterilización

Ref. 080448	5 x 24 cm	Ref. 080454	19 x 36 cm
Ref. 080449	7 x 26 cm	Ref. 080455	25 x 40 cm
Ref. 080450	9 x 26 cm	Ref. 080456	30 x 40 cm
Ref. 080451	5 x 9 cm	Ref. 080457	30 x 45 cm
Ref. 080452	14 x 28 cm	Ref. 080458	30 x 45 cm
		Ref. 080459	5.7 x 13 cm

Productos Sanitarios Clase I (MDR 2017/745)
Conforme a las normas ISO 11607-1:2017 y EN 868-5:2009

Limpieza y desinfección



Ultrasonidos para férulas

Ref. 100162



Aparato de limpieza por ultrasonidos para elementos dentales, con lámpara UV que sirve para desinfectar durante la limpieza. Sus 28 W de potencia aseguran unos resultados excelentes. Sus reducidas dimensiones lo hacen indicado en entornos domésticos y en los viajes. Cuenta también con un temporizador digital.




Baño de ultrasonidos 2,5 l.

Ref. 100140

Muy cómodo y práctico para la limpieza de pequeños objetos en Laboratorio y Clínica Dental. Su cuba de 2,5 l. de capacidad tiene las dimensiones adecuadas para albergar en su interior instrumentos usuales en la clínica dental. Cuenta con un sistema de calentamiento y con un temporizador electrónico.

(L) 360 x (W) 275 x (H) 240 mm | 3,5 kg

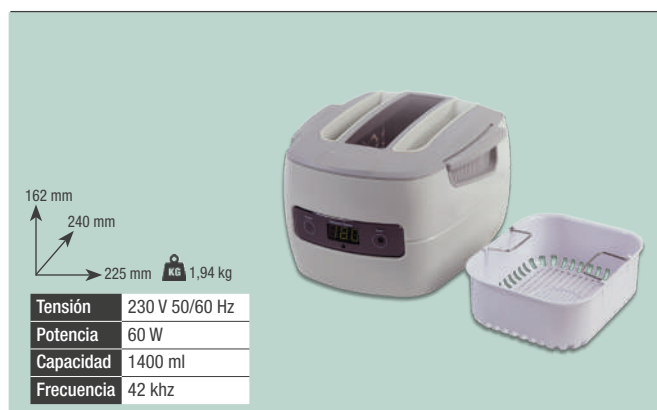

Baño de ultrasonidos 1,4 l.

Ref. 100141

Herramienta imprescindible tanto en el laboratorio como en la clínica dental. Los 60 W. de potencia real entregada garantizan un excelente poder de limpieza. Dispone de temporizador electrónico con display de 7 segmentos.

(L) 430 x (W) 270 x (H) 270 mm | 2,5 kg



Baño de ultrasonidos (mini)

Ref. 100144



Baño de ultrasonidos

Ref. 100160 **Ref. 100160-10** (10 u.)

Para limpieza de dentaduras.



Baño de ultrasonidos, 3 l.

Ref. 100142

Para la limpieza de pequeños objetos en el laboratorio y la clínica dental. Con cable desmontable, válvula de drenaje y manguera. Cestillo protector de plástico y manguera de desagüe incluidos.



Ref. 080422-26

Cesta larga (no incluida, opcional)

Baño ultrasonidos Calypso 4l.

Ref. 080422

El modelo **Calypso** representa un baño de limpieza por ultrasonidos de última generación, que incorpora los más novedosos avances: transductores de tipo sandwich, con una potencia real de 100 W transmitida a la cuba, frecuencia de funcionamiento de 40 kHz, lo que supone un compromiso óptimo entre sonoridad y potencia de limpieza. Control de tiempo electrónico gobernado por microprocesador con display digital y señales acústicas de aviso, sistema de calentamiento automático del líquido de limpieza, carcasa fabricada en poliuretano de alta densidad, material con especial resistencia a los agentes químicos, 4 litros de capacidad de cuba, desagüe, etc.

El equipo se suministra de serie con los siguientes accesorios:

- ✓ Una cesta de Acero Inoxidable para la limpieza de instrumental.
- ✓ Un vaso de cristal para la limpieza de pequeños instrumentos y su soporte.
- ✓ Una tapa, que elimina ruido durante el funcionamiento del aparato y evita que la suciedad se deposite en el baño.
- ✓ Una pinza limpiafresas (Ref. 070520)

Alto	220 mm
Ancho	425 mm
Fondo	270 mm
Peso	4,5 kg
Capacidad Cuba	4 l
Alimentación	230 V - 50/60 Hz
Potencia transductores	100 W
Frecuencia	40 khz

(L) 420 x (W) 360 x (H) 300 mm | 9 kg



Ref. 100152 - 5,8 L

Medidas interiores:

Alto 155 mm
Ancho 298 mm
Fondo 152 mm

Ref. 100151 - 3,4 L

Medidas interiores:

Alto 100 mm
Ancho 298 mm
Fondo 152 mm

Ref. 100150 - 2,8 L

Medidas interiores:

Alto 100 mm
Ancho 238 mm
Fondo 140 mm

Baños de ultrasonidos: 5,8l - 3,4l - 2,8l

Fabricados en acero inoxidable: alta resistencia al desgaste y larga vida útil. Control de tiempo digital, de fácil uso.

Dispone de desagüe en la parte lateral. Tiempos de 1 a 99 minutos. Temperatura de 1 a 80 °C. Aptos para la limpieza de modelos impresos en 3D con resina.



Referencia	R-100152	R-100151	R-100150
Alto	290 mm	290 mm	245 mm
Ancho	365 mm	365 mm	300 mm
Fondo	180 mm	165 mm	165 mm
Peso	5,400 kg	5,2 kg	3,980 kg
Cap. cuba	5,8 L	3,4 l	2,8 L
Tensión	230 V 50/60 Hz	220-240 V, 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz
Potencia Ultr.	180 W	180 W	120 W
Pot. Calent.	200 W	200 W	100 W
Frecuencia	40 Khz	40 kHz	40 Khz

Limpieza y desinfección

Sistema de succión extraoral

Ref. 100347

Posicione la boquilla junto a la boca del paciente y evite la propagación de todo tipo de aerosoles, partículas en suspensión, vapores y olores en la clínica. Reduzca en gran medida el riesgo de contaminación cruzada entre profesionales y pacientes y proteja la salud respiratoria.

- ✓ Dos niveles de potencia.
- ✓ 2 cartuchos de filtro compuestos por:
 - Filtro grueso para partículas pequeñas.
 - Filtro de carbono activo.
 - Filtro HEPA H13.
- ✓ Luz UV.
- ✓ Generador de plasma.
- ✓ Forma ergonómica y fácil de mover para tener una buena posición de trabajo.
- ✓ Brazo de succión semirrígido, autoportante y fácil de limpiar.
- ✓ Carcasa de fácil limpieza.
- ✓ Contador de horas de uso.

Voltaje	220 V, 50 Hz
Potencia	1000 W.
2 niveles de potencia	(50-100 %)
Ruido	60 dB.
Caudal	4000 L/min.
Vacío máx.	-25 kPa.
Lámpara UV	254 nm
Generador plasma	5000 V
Grado HEPA	H13 (0.3 µm, > 99.97 %).
Longitud brazo	1.3 m.



Alimentación	230 V / 50 Hz
Potencia	1.000 W
Tanque	5 L
Volumen spray	470 ml/minuto
Tamaño gotícula	Ajustable: 100 - 150 µm
Rango lanzamiento	Ajustable: 3-8 m.



Purificador / Nebulizador

Ref. 100520

Aparato purificador-nebulizador de elevada eficiencia, capaz de atomizar la disolución desinfectante creando una finísima niebla que penetra en todos los rincones.

- ✓ El tamaño de las gotículas puede ser ajustado, así como la distancia de lanzamiento de chorro.

- ✓ Desinfecta eficientemente grandes superficies en apenas unos minutos (hasta 100 m² en sólo 10 minutos).
- ✓ Empleo cómodo, eficaz y seguro.
- ✓ Imprescindible para desinfectar superficies de tamaño medio.



Unidad dental portátil

Ref. 100650

Concebida para llevar la capacidad operativa de un gabinete dental completo a cualquier ubicación o situación compleja.

Su diseño compacto y altamente integrado, contiene todos los elementos esenciales en la práctica odontológica.

Tensión	220V - 240V AC / 50 Hz
Potencia Nominal	600 W
Flujo de Aire de Salida	118 L/min a 0 bar
Presión Pieza de mano	0,2 - 0,25 MPa (2,0 - 2,5 bar)
Presión Aspiración	0,06 - 0,1 MPa (0,6 - 1,0 bar)
Sonoridad	40 - 45 dB

Limpieza y desinfección

Purificadores de aire

Familia de purificadores de aire de tres tamaños diferentes. Actúan sobre el aire viciado de cualquier recinto eliminando polvo, suciedad y gérmenes. Después del tratamiento, el aire queda mucho más limpio y respirable.


El proceso de purificación se inicia con una batería de filtros de tres niveles diferentes: HEPA bacteriano, carbón activo y fotocatalítico. Posteriormente, una lámpara UV de alto rendimiento prosigue con la labor de limpieza.

*La purificación se completa con una ionización y la posibilidad de activación de un generador de ozono.

Referencia	100510	100512	100514
Potencia	36 W	45 W	72 W
Ruido	≤40 dB(A)	≤45 dB(A)	≤45 dB(A)
Volumen purificado	150 m³/h	280 m³/h	560 m³/h
Área de purificación recomendada	25 m²	30-35 m²	60-70 m²
Filtrado de 3 niveles (HEPA, carbón activo, catalítico)	Sí	Sí	Sí
Limpieza UV + Ionización	Sí	Sí	Sí
Frecuencia lámpara UV	254 nm	254 nm	254 nm
Generador de ozono	Sí	Sí	—
Control remoto	Sí	Sí	Sí
Indicadores de: Temperatura Humedad / Calidad del aire / Cambio de filtros	No	Sí	Sí


Purificador 25 m²

Ref. 100510

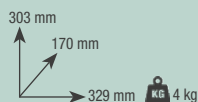


Purificador 30-35 m²

Ref. 100512

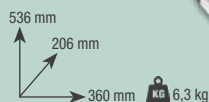

Purificador 60-70 m²

Ref. 100514

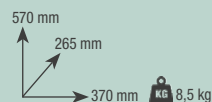

Ref. 100500

Ideal para pequeños objetos como teléfonos móviles, mascarillas, llaveros, monedas, joyas, etc. Con función de secado mediante resistencia calefactora.

120 x 296 x 195 mm | 1 kg



Ref. 100502

De tamaño medio. Su cámara permite procesar el mismo tipo de artículos que el modelo anterior, pero en mayor cantidad; o si se prefiere, objetos de mayor tamaño. Ideal para clínicas y laboratorios.

300 x 290 x 200 mm | 4,5 kg

Cabinas UV

Referencia	100500	100502
Tensión	110~240 V, 50 Hz	220 V, 50 Hz
Potencia	150 W	4 W
Temporizador	10 min.	0-60 min/continuo



Cámara de almacenamiento higiénico Ref. 100505

Protección continua para el instrumental y material de trabajo en clínica y laboratorio.

- ✓ Tecnología de luz ultravioleta (UV).
- ✓ Tecnología dual (UV + CALOR).
- ✓ Control de ciclos automatizado.
- ✓ Función de secado integrada.
- ✓ Construcción profesional.

Volumen interior	38 L
Material de la cámara	Acero inoxidable
Potencia eléctrica	460 W
Alimentación	230 V, 50 Hz



Prime 221 - Conexión intramatic

Ref. 100237

Dimensión	90 x 191 x 130 mm	Potencia	120 W
Peso	2,8 kg	Tensión de salida	0~36 V
Velocidad máxima	50000 rpm	Peso pieza de mano	205 g
Torque	5.8 N-cm		



Sense A3 - Conexión intramatic

Ref. 100239

Dimensión	88 x 147 x 120 mm	Potencia	70 W
Peso	1,15 kg	Tensión de salida	0~33 V
Velocidad máxima	35000 rpm	Peso pieza de mano	215 g
Torque	3.0 N-cm		

Sirocco S

Ref. 080534



Aspiración especialmente indicada para entornos de clínica y válida también para laboratorio, que cuenta con el tamaño perfecto para un uso de sobremesa y una estética estilizada.

El modelo Sirocco S incorpora dos etapas de filtrado; un primer filtro HEPA (recogedor de partículas de alta eficiencia) circular y un segundo filtro HEPA interior.

Gracias a su eficiente diseño, la operación de cambio de filtros es extremadamente sencilla. La unidad cuenta además con un sistema de detección de micromotor externo y con ajuste de potencia en siete niveles diferentes.

- ✓ Potente motor de inducción.
- ✓ Intuitivo teclado del tipo "táctil".
- ✓ Facilidad de uso y cambio de filtro.
- ✓ Extraordinariamente silencioso.


Potencia	350 W
Ruido	55 dB

135 mm
280 mm
280 mm

3,1 kg

Aspiración inducción "S" + tubo LED

Ref. 080534AT

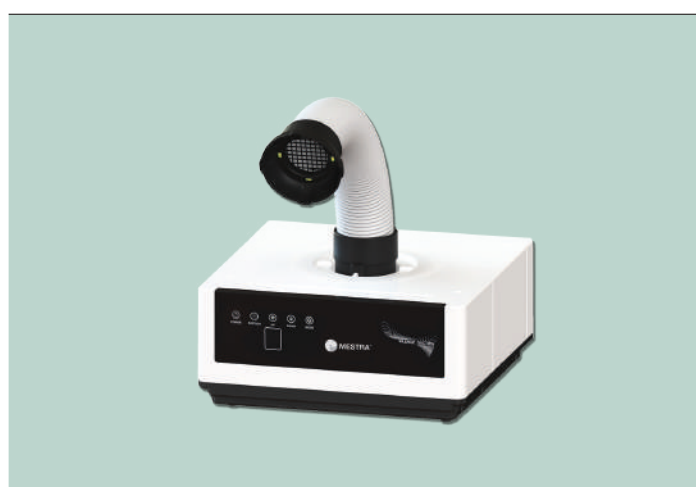

Configuración básica del modelo S, con tubo flexible y extensible hasta 70 cm que dirige la aspiración al área de trabajo. Gracias a su luz LED permite pequeñas y delicadas operaciones de pulido y repaso.

- ✓ Facilidad de orientar la boca de aspiración
- ✓ Iluminación LED incorporada

Tubo 700 mm • Ø 45 mm • Peso 3.8 kg

Aspiración inducción "S" + caja de repaso laboratorio

Ref. 080534AL



Aspiración Sirocco S y caja de repaso para laboratorio dental totalmente compatible con la unidad de sobremesa, con la que forma un conjunto muy compacto y equilibrado.

- ✓ Diseño amplio y robusto.
- ✓ LED interior para una iluminación perfecta.
- ✓ Reposabrazos cómodos y prácticos.

Alto 365 mm • Ancho 345 mm
Fondo 400 mm • Peso 5.5 kg

Mezcladora de alginato

Ref. 080515

Práctica herramienta para la elaboración de pasta de alginato en la Clínica Dental. Su funcionamiento es sencillo: basta con depositar el polvo y el agua en la taza y pulsar el botón correspondiente a la velocidad de rotación (rápida / lenta). Durante el giro, el usuario puede amasar con una espátula la mezcla hasta darle la consistencia y textura adecuadas.

El proceso se encuentra en todo momento controlado visualmente por el técnico, lo que da garantía de que la mezcla elaborada se encuentra en óptimo estado para su aplicación. Para facilitar la posterior limpieza la taza es desmontable. Se suministra con una taza y una espátula especial de plástico.

Dimensiones

250 x 175 x 230 mm (con taza)
Peso 3 kg
Potencia 60 W

Ref. 080515-02

Taza 750 cc
Diámetro 130 mm
Altura 110 mm
Peso 0.2 kg



CE Producto Sanitario MDR 2017/745

(L) 300 x (W) 310 x (H) 195 mm | 3.9 kg

Mezcladora automática de alginato

Ref. 100191

Basta llenar la taza con alginato y agua, introducirla en la máquina, pulsar el botón y en apenas unos segundos se consigue una mezcla perfectamente homogénea y lista para su uso. Silenciosa, de reducidas dimensiones, cómoda y sobre todo económica y fiable.

Se suministra con un juego de tazas, una espátula de plástico y un práctico dosificador de agua. También puede usarse como batidora de escayola con resultados sorprendentes.



MEZCLA MÁXIMA

80 grs. agua + alginato

Dimensiones	265 x 205 x 305 mm
Peso	17 kg
Tensión	230 V 50/60 Hz
Consumo	350 W

(L) 300 x (W) 420 x (H) 430 mm | 18,5 kg

La máquina se suministra con cuatro tazas, un práctico dosificador de agua, un agitador, una espátula y un soporte.



Depósito estanco para alginato

Ref. 100189



Dimensiones	220 x 150 x 190 mm
Peso	0,467 kg
Capacidad	1 kg

(L) 220 x (W) 155 x (H) 200 mm | 0,62 kg

Mezcladora de siliconas

Ref. 100360

Mezcladora de material e impresión sencilla, rápida, fiable y segura. De dimensiones reducidas para poder ubicarla en cualquier lugar del laboratorio.

exenta de burbujas sin esfuerzo alguno. Todo esto se traduce en la reducción de tiempos, material y en la mejora de la calidad de los trabajos.


La operación de inserción/retirada del cartucho se realiza fácilmente en unos pocos segundos. Dispone de tres velocidades de vertido que se ajustan a las necesidades de cada trabajo. Su extraordinaria robustez junto a la potencia de sus motores originan una masa totalmente fluida, de viscosidad óptima y completamente

Compatible con la práctica totalidad de los cartuchos del tipo 380 ml. presentes en el mercado. Apta para el 99% de siliconas.

Temp. Ambiente	5-40°C
Alimentación	240 V 50 Hz
Potencia	150 W
Empuje	450 kg +/-10



290 mm
170 mm
250+150 mm | 7,1 kg

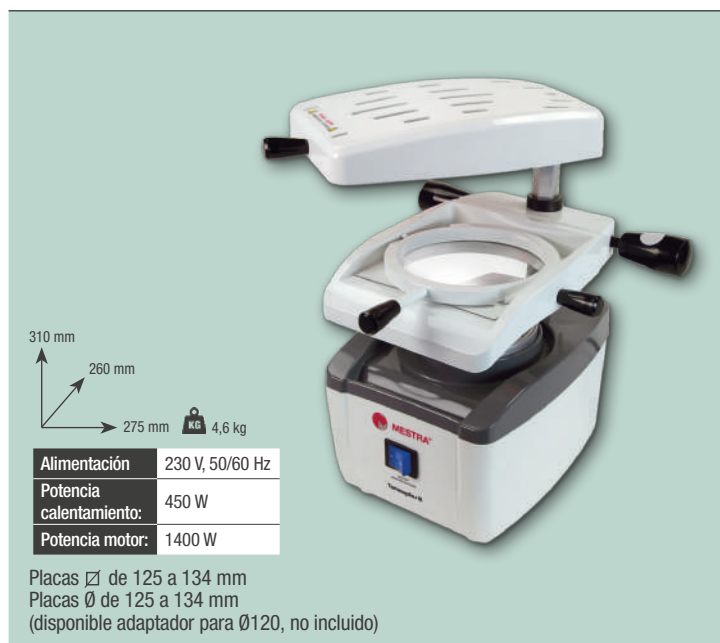

Máquina de termoconformado

Ref. 080542

Dispone de un potente motor de aspiración con conexión automática al bajar el portaplacas. Usa una resistencia de carbono, lo que permite un calentamiento suave y uniforme del material a conformar, además, se suministra con un portamodelos plano y con una cesta que, rellena de granalla (se incluye un bote con el equipo), reduce la profundidad de conformado. Sirve para placas cuadradas.

(L) 197 x (W) 267 x (H) 337 mm | 5,7 kg



Termoconformadora por presión PlastPress

Ref. 080544

La termoconformadora de presión positiva más compacta del mercado. Mayor fidelidad de copia y menor ruido en comparación con las máquinas de vacío. Práctica y versátil, admite placas redondas y cuadradas de hasta 6 mm de espesor. Debe conectarse directamente a un compresor (entre 3 y 8 bar).

(L) 310 x (W) 270 x (H) 310 mm | 8,5 kg



Termoconformadora por presión

Ref. 080543

La fuerte presurización permite un moldeado preciso, independientemente del recorte del modelo, así como diversos grosores (0.5 a 4.0 mm) y se pueden usar placas cuadradas y redondas (127, 125, 120 mm).

Dimensiones	260 x 410 x 545 mm	Consumo	450 W
Peso	15 kg	Presión	4-6 bar



Horno de secado para placas de termoconformado

Ref. 080118

Un ventilador hace circular el aire caliente para un secado uniforme.

- ✓ Extrae la humedad y mantiene secas las láminas de termoconformado, para evitar la formación de poros.
- ✓ Secado de instrumental de modelos de escayola, etc.
- ✓ Carcasa y 6 bandejas de acero inox.
- ✓ Temporizador de 24 horas.

Dimensiones	450 x 340 x 310 mm	Consumo	550-650 W
Peso	8,3 kg	Temperatura	35-75°C

Láminas de termoconformado

MESTRA

DOBLE BOLSA:

- Bolsa exterior metalizada, al vacío, con autocierre.
- Bolsa interior que contiene las láminas.

MATERIAL	MM	QTY	REFERENCIA
CLEAR Duras Hart Hard Rígidas Rígides Rigide	0,8	10	080801-10
		25	080801-25
	1,0	10	080802-10
		25	080802-25
	1,5	10	080803-10
		25	080803-25
	2,0	10	080804-10
		25	080804-25
	1,0	10	080812-10
	1,5	10	080813-10
MOUTHGUARD Blandas Weich Soft Flexíveis Souples Morbide	2,0	10	080814-10
	3,0	5	080815-05

PARA TODO TIPO DE USOS:

- Alineadores de ortodoncia
- Aparatos de ortodoncia.
- Alineadores dentales.
- Mantenedores de espacio.
- Férulas de descarga (bruxismo).
- Planchas de registro para guía quirúrgica.
- Postratamiento protésico.
- Planchas de registro.
- Desprogramadores.
- Placas base para prótesis totales.
- Cubetas individuales.
- Guías quirúrgicas.
- Aparatos de apnea.
- Cubetas para blanqueamiento.
- Cubetas para fluoración.
- Protectores bucales deportivos.

Láminas de termoconformado



Fabricadas en plásticos de alta calidad con certificados CE como producto sanitario. No aparece hollín o humos en el calentamiento. La ausencia de material reciclado evita que se desgarren al someterlas a vacío.

Ref.	Tipo	Dureza	Apariencia	Tamaño	Espesor	Cant.
080574	Cristal	Duras	Transparente	126x126	0.3 mm	10
080575	Cristal	Duras	Transparente	126x126	0.75 mm	5
080576	Cristal	Duras	Transparente	126x126	1.0 mm	5
080577	Cristal	Duras	Transparente	126x126	1.5 mm	5
080578	Cristal	Duras	Transparente	126x126	2.0 mm	5
080579	Lechosa	Duras	Translúcida	126x126	0.6 mm	10
080580	Soft	Blandas	Translúcida	131x131	1.0 mm	10
080581	Soft	Blandas	Translúcida	131x131	1.5 mm	10
080582	Soft	Blandas	Translúcida	131x131	2.0 mm	10
080583	Soft	Blandas	Translúcida	131x131	3.0 mm	5
080584	Soft	Blandas	Translúcida	131x131	4.0 mm	5

Ref.	Tipo	Dureza	Apariencia	Tamaño	Espesor	Cant.
080574R	Cristal	Duras	Transparente	Ø125	0.3 mm	10
080575R	Cristal	Duras	Transparente	Ø125	0.75 mm	5
080576R	Cristal	Duras	Transparente	Ø125	1.0 mm	5
080577R	Cristal	Duras	Transparente	Ø125	1.5 mm	5
080578R	Cristal	Duras	Transparente	Ø125	2.0 mm	5
080579R	Lechosa	Duras	Translúcida	Ø125	0.6 mm	10
080580R	Soft	Blandas	Translúcida	Ø125	1.0 mm	10
080581R	Soft	Blandas	Translúcida	Ø125	1.5 mm	10
080582R	Soft	Blandas	Translúcida	Ø125	2.0 mm	10
080583R	Soft	Blandas	Translúcida	Ø125	3.0 mm	5
080584R	Soft	Blandas	Translúcida	Ø125	4.0 mm	5




CE Producto sanitario

MÉTODOS DE CIERRE:

Además de usar el autocierre del sobre, es aconsejable efectuar un doble pliegue en el extremo y fijarlo con pinzas o clips para asegurar un sellado hermético.



CE Producto sanitario

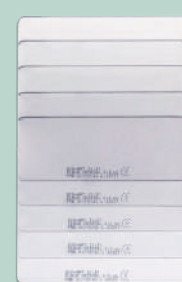

Motor endodoncia

(sin cables)

Ref. 100350

- ✓ Diseño optimizado para la interfaz de usuario.
- ✓ Cuerpo ergonómico y compacto.
- ✓ Funciones inversas auto y autostop.
- ✓ 5 Programas de memoria.
- ✓ De 100 a 600 r.p.m.



Máximo	100-600 rpm
Torque	1-4 N-cm
Potencia	230 W
Alimentación	Pilas

(L) 240 x (W) 170 x (H) 80 mm
0,7 kg




Localizador de ápices

Ref. 100330

- ✓ Calibración automática, pantalla LCD con una imagen clara y precisa.
- ✓ Con colores diferentes.
- ✓ Accesorios esterilizables.
- ✓ Batería recargable.

Dimensiones	80 x 138 x 110 mm
Peso	0,4 kg


(L) 230 x (W) 155 x (H) 112 mm | 0,8 kg

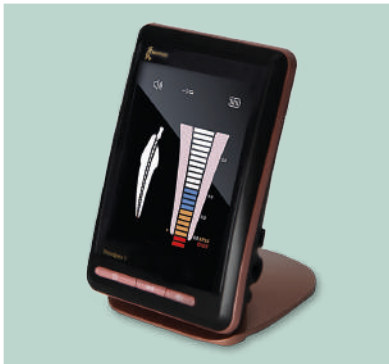

Cortador de gutapercha

Ref. 100349

- ✓ La punta tiene un diseño flexible para que se pueda cortar sin problemas.
- ✓ La punta se calienta inmediatamente hasta 500°C.
- ✓ Suelte el botón y la punta se enfriará rápidamente.
- ✓ Cubra la punta con el tapón después del uso.
- ✓ Coloque el aparato en la base del soporte.

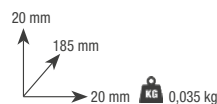

Voltaje	2 baterías AA (3V cc)
Temperatura	>500 °C
Enfriamiento	Menos de un segundo
Soporte	3 cm x 2,5 cm
3 puntas	(L: 2,0 mm - M: 1,2 mm - S: 0,5 mm)


(L) 180 x (W) 70 x (H) 35 mm
0,12 kg

NEW




2 pilas
AA (3V cc)

- ✓ Amplio espectro de iluminación (desde 420 a 472 nm)
- ✓ Potencia (hasta 2000 mW/cm²).
- ✓ Ajustable en altura y orientación.
- ✓ Display digital.
- ✓ Mando a distancia.
- ✓ Se suministra completa para su uso y con 20 férulas bucales desechables, dos gafas de protección y un retractor labial.

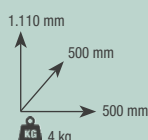

- ✓ Amplio espectro de iluminación.
- ✓ 5 luces azules, 2 luces rojas.
- ✓ 3 tipos diferentes de luz LED: azul, rojo, (rojo + azul).
- ✓ 8 luces violetas con efecto de esterilización.
- ✓ Fabricada en material metálico, fácil de montar.
- ✓ Tiempo de blanqueo ajustable.

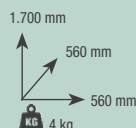

Lámpara de blanqueamiento


Ref. 100340

Lámpara de blanqueamiento

Ref. 100341



Frecuencia de mezclado	5000 rpm
Rango del temporizador	4 ~ 60 s
Potencia del motor	40 W
Alimentación	230 V, 50 Hz

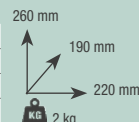

Agitador de cápsulas

Ref. 100625

- ✓ Alta velocidad.
- ✓ Compatibilidad universal.
- ✓ Control digital de precisión.
- ✓ Diseño ergonómico y seguro
- ✓ Estabilidad y funcionamiento silencioso.
- ✓ Durabilidad.


NEW

Cámara intraoral

(con autofocus y acople brazo)

Ref. 100336

- ✓ Pantalla táctil LCD de 21,5 pulgadas.
- ✓ Cámara de alta definición (4K).
- ✓ Autofocus.
- ✓ Grabación de imágenes y vídeo en memoria USB.
- ✓ Código QR para descarga de imágenes por WIFI.
- ✓ Soporte a barra.
- ✓ Sistema Android.
- ✓ Visualización de 1 o 4 imágenes en pantalla.

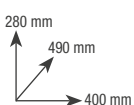


Monitor: 2,52 kg
Cámara: 0,1 kg

Calentador de composite

Ref. 080077

Dispositivo para mantener caliente las jeringuillas de composite.

Temperatura	40-50 y 70°C
Ø de agujeros	16 mm
Alimentación	100 a 240 V

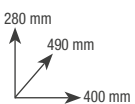

Monitor: 2,52 kg
Cámara: 0,1 kg



NEW

Fabricada en España

Silla Puesto de trabajo

Ruedas con frenado de seguridad (EN 1335-2:2009)

Ref. 100300

(Kit) Mesa de trabajo

Ref. 100301 K2

- ✓ Mesa metálica, encimera de madera.
- ✓ Silla para puesto trabajo.
- ✓ Pulidora + 2 bandejas.
- ✓ Micromotor.
- ✓ Lámpara LED

OBSEQUIO:
→ Lupa de mesa.
→ Fresero magnético.

(L) 950 x (W) 610 x (H) 100 mm | 63 kg

Fabricada en España

- 1 100301-04 Astillera de aspiración.
- 2 100301-05 Soporte de astillera.
- 3 100301-02 Tubo metálico.
- 4 080530-04 Tubo flexible (1 m.)


Mesa de trabajo

Ref. 100301

Mesa de trabajo metálica con encimera de madera.

El montaje es sencillo. Disponen de todos los elementos y accesorios para el trabajo en entornos dentales: 2 enchufes, estante, cajón, etc.

(L) 900 x (W) 600 x (H) 660 mm | 46 kg

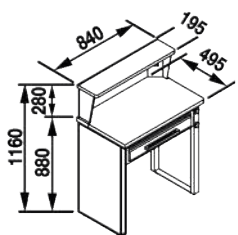

Sillas puesto de trabajo

NEW

Sillas de trabajo especialmente diseñadas para el laboratorio dental.

Cómodas, ergonómicas y de fácil limpieza. Permite 1 regulación de altura del asiento. De poliuretano esponjoso en color negro.

	Ref. 100297	Ref. 100298
Altura máx. asiento	660 mm	555 mm
Altura mín. asiento	460 mm	420 mm
Fondo asiento	450 mm	450 mm
Ancho asiento	460 mm	460 mm
Peso	9 kg	8 kg

Ruedas con frenado de seguridad (EN 1335)



Silla puesto trabajo

Ref. 100299

Permite 4 regulaciones diferentes, altura e inclinación del asiento y altura y ángulo de inclinación del respaldo.

Altura máx.	555 mm
Altura mín.	420 mm
Fondo	450 mm
Ancho	460 mm
Peso	10.3 kg

Ruedas con frenado de seguridad (EN 1335)



Silla puesto trabajo

Ref. 100300

Permite 4 regulaciones diferentes: altura e inclinación del asiento y altura y ángulo de inclinación del respaldo.

Ruedas con frenado de seguridad (EN 1335)

Altura máx. asiento	515 mm
Altura mín. asiento	390 mm
Fondo asiento	420 mm
Ancho asiento	420 mm
Peso	9 kg

(L) 610 x (W) 610 x (H) 325 mm | 10,5 kg



Silla Poni sin respaldo

Ref. 100600



Ruedas con frenado de seguridad (EN 1335)

Altura máx. asiento	730 mm
Altura mín. asiento	530 mm
Fondo asiento	320 mm
Ancho asiento	360 mm
Peso	7 kg

NEW




Silla Poni con respaldo

Ref. 100602

- ✓ Altura ajustable.
- ✓ Cuero PU de alta calidad.
- ✓ Espuma de alta resiliencia.
- ✓ Barra neumática de entrada de cuatro etapas. Segura y suave. Certificación TUV y SGS.
- ✓ Sello de aceite hidráulico. Protección múltiple, sin fugas de aceite ni aire. Larga vida útil.
- ✓ Limpieza del filtro de aceite. Dispositivo de raspado de aceite integrado.



Ruedas con freno de seguridad (EN 1335)

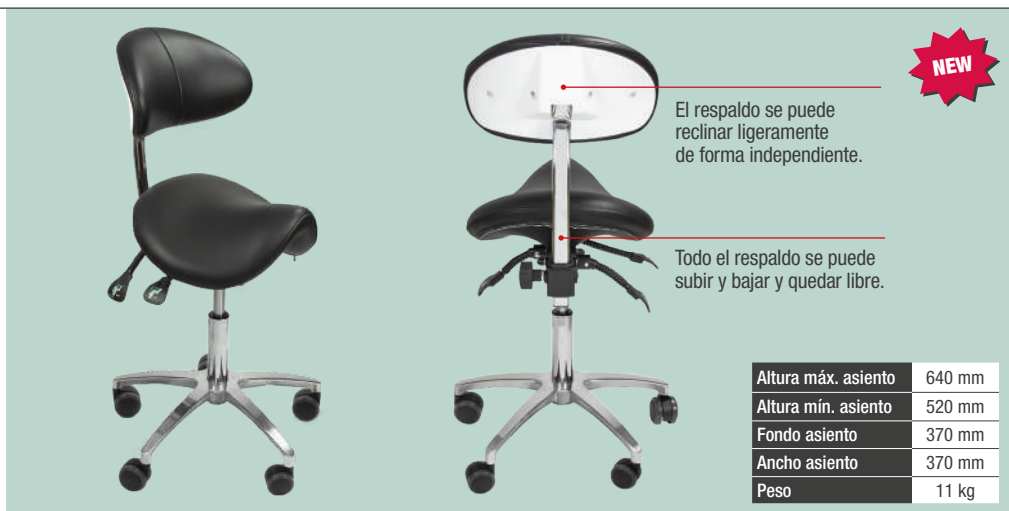

Carro 2 ruedas

Ref. 100451

- ✓ Fabricado en acero inoxidable.
- ✓ Bandeja extraíble (495 x 345 mm)



Carro 5 ruedas

Ref. 100452

- ✓ Fabricado en acero inoxidable.
- ✓ Bandeja extraíble (495 x 345 mm)



Carro para escáner

Ref. 100450

- ✓ Material: plástico antibacteriano, aluminio y acero.



Carro para escáner intraoral con soporte CPU

Ref. 100449


- ✓ Material: plástico antibacteriano, aluminio y acero.

Carrito móvil eléctrico

Ref. 100305

Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco.

- ✓ 3 bandejas de 40 x 30 cm.
- ✓ 2 tomas de corriente para alimentar los equipos.
- ✓ 4 ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.

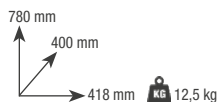

(L) 510 x (W) 420 x (H) 840 mm | 15 kg




Carrito móvil eléctrico

Ref. 100306

Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco.

- ✓ 3 bandejas de cristal.
- ✓ 2 tomas de corriente para alimentar los equipos.
- ✓ 4 ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.

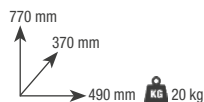

(L) 575 x (W) 560 x (H) 845 mm | 25,5 kg




Carrito móvil eléctrico

Ref. 100307

Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco.

- ✓ 3 bandejas de 290 x 396 mm.
- ✓ 3 tomas de corriente para alimentar los equipos.
- ✓ 4 ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.
- ✓ Peso soportado por bandeja, 5 kg.

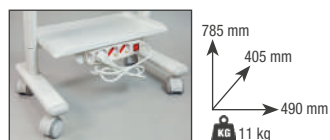

(L) 430 x (W) 520 x (H) 860 mm | 12 kg




Carrito móvil eléctrico

Ref. 100308

Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco.

- ✓ 3 bandejas de 290 x 396 mm
- ✓ 3 tomas de corriente.
- ✓ 1 cajón.
- ✓ 4 ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.
- ✓ Peso soportado por bandeja, 5 kg.

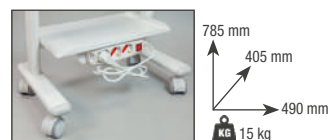

(L) 430 x (W) 520 x (H) 860 mm | 16 kg




Carrito móvil eléctrico

Ref. 100309

NEW

Carrito metálico con ruedas para la clínica dental. Fabricado en resistente acero esmaltado blanco y resina.

- ✓ 3 enchufes universales.
- ✓ 3 cajones.
- ✓ 1 tomas de corriente.
- ✓ Color blanco.
- ✓ Deslizamiento suave.

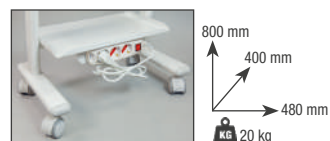

(L) 480 x (W) 540 x (H) 840 mm | 21 kg




Carrito móvil montable

Ref. 100307M

NEW

Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco.

- ✓ 3 bandejas de 290 x 396 mm
- ✓ 3 tomas de corriente para alimentar los equipos.
- ✓ 4 ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.
- ✓ Peso soportado por bandeja, 5 kg.

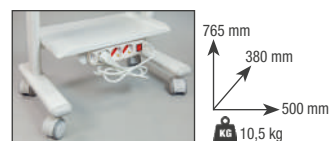

EMBALAJE REDUCIDO:
(L) 460 x (W) 780 x (H) 120 mm | 11,5 kg



Soporte de escáner para carro

Ref. 100450-01

NEW

Carro para residuos

Ref. 100440

Ref. 100442

Dos contenedores móviles diseñados para el transporte seguro de residuos médicos infecciosos. Gracias a su diseño sencillo y funcional, se adaptan a cualquier tipo de entorno.

Disponible para 40 L o 60 L.

Ref. 100440 - 40 L	
Alto 568 mm	Ancho 296 mm
Largo 404 mm	Peso 11 kg

Ref. 100442 - 60 L	
Alto 618 mm	Ancho 346 mm
Largo 454 mm	Peso 14 kg



NEW

Calentador de placas de cera

Ref. 080078

Aparato muy útil en aquellas aplicaciones que precisan de un calentador que mantenga la temperatura del agua de manera precisa (polimerización de pequeños elementos; planchas de cera para la Toma de Registro Intraoclusares, etc.). Dispone de una cuba de 1 L. de capacidad máxima fabricada en acero inoxidable de fácil limpieza. La carcasa está construida en poliuretano de alta densidad, material muy resistente a los agentes químicos.

El control de la temperatura del baño se realiza mediante un termostato electrónico que combina sencillez de manejo con una gran precisión en el mantenimiento de la temperatura programada. El margen de temperaturas va de los 30 a los 75°C. Una potente resistencia de caldeo permite alcanzar la temperatura de consigna en pocos minutos.

Alto	146 mm	Alimentación	230 V
Ancho	230 mm	Rango temperaturas	30-75 °C
Fondo	195 mm	Potencia	310 W
Peso	1.7 kg	Capacidad	1 l.

(L) 300 x (W) 300 x (H) 200 mm | 2 kg



Compresores a pistón seco

NO APTOS PARA FRESADORAS

Familia de cuatro compresores integrada por dos tamaños de 80 y 160 litros/min. a los que se les puede acoplar un secador con purga automática. Funcionamiento extremadamente silencioso (60 dB), sencillo mantenimiento (pistón seco) y excelente fiabilidad.

Se suministran con dos manómetros (presión de calderín y de servicio), manorregulador de salida y juego completo de válvulas para el purgado. La presión de servicio puede alcanzar los 8 bares.

Ref. 110300 - Compresor: 80 l/min
Ref. 110310 - Compresor: 80 l/min (con secador)
Ref. 110330 - Compresor: 160 l/min
Ref. 110340 - Compresor: 160 l/min (con secador)




¿Cómo sé si mi compresor cumple la normativa europea de seguridad?

Es fácil encontrar compresores dentales fabricados en oriente que no cumplen la normativa europea de seguridad vigente.

Por este motivo, es recomendable comprobar su timbre de características y seguridad: se trata de una chapa soldada en el calderín similar a la fotografía adjunta. Junto al símbolo CE, se puede apreciar el número del Organismo Notificado que ha validado su adecuación a normas europeas.

1. La **Ref. 110340** está también disponible con filtro HEPA (H14) **Ref. 110340H**
2. El filtro de carbón activo **Ref. 110300-53** está disponible como accesorio para todos los compresores.

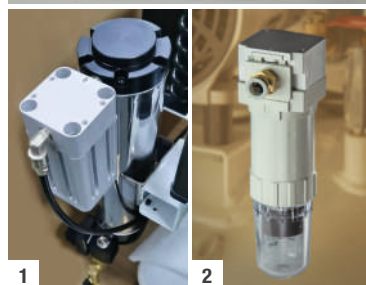

Referencia	110300	110310	110330	110340
Potencia	750 W	750 W	1500 W	1500 W
Caudal efectivo (a 4 bares)	80 l/min	80 l/min	160 l/min	160 l/min
Ruido	53 dB	53 dB	54 dB	54 dB
Presión	5-8 bar	5-8 bar	5-8 bar	5-8 bar
Capacidad calderín	30 l	30 l	50 l	50 l
Nº Cabezales	1	1	2	2
Largo	390 mm	540 mm	370 mm	480 mm
Ancho	390 mm	390 mm	680 mm	680 mm
Alto	650 mm	650 mm	750 mm	750 mm
Peso	30 kg	37 kg	58 kg	66 kg

Certificado por TÜV SÜD Certificado de tipo N° 12202200491258001
Directiva 2014/29/UE (recipiente a presión)

Aspiración de anillo húmedo

Ref. 100345


Diseñada para una sencilla y fiable operativa, esta unidad cuenta con una rápida respuesta: detecta la señal de encendido y alcanza el nivel óptimo de vacío en un tiempo record. Su funcionamiento es extremadamente silencioso y además no requiere de operaciones de mantenimiento, por tratarse de una tecnología que separa automáticamente el aire del agua con

los residuos. La potencia de succión se mantiene en todo momento estable, sin que puedan apreciarse altibajos o fallas. Esta unidad es válida para un puesto de trabajo con un uso intensivo, o para dos puestos de trabajo en el caso de uso moderado.

(L) 470 x (W) 430 x (H) 650 mm | 25 kg

Dimensiones	360 x 405 x 585 mm
Peso	27 kg
RPM	0-4000
Flujo de aire	300 l/min
Potencia	750 W
Nivel sonoro	58 dB




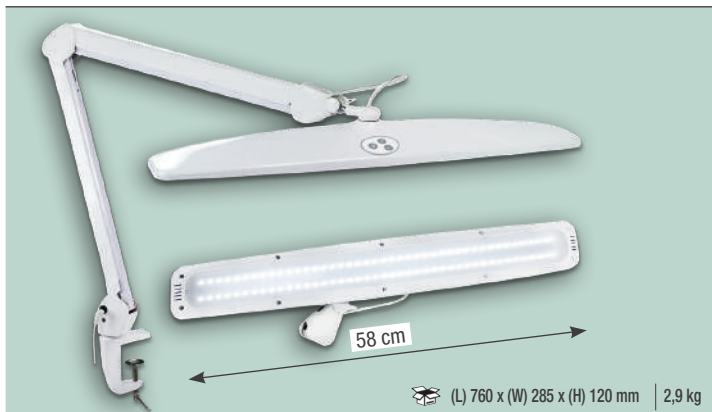

Lámpara LED (brazo articulado)

Ref. 100288


- ✓ 84 LEDs grandes
- ✓ Temperatura de color 6000 - 7000 K
- ✓ Energía consumida 2 a 21 W
- ✓ Intensidad de luz regulable táctil.
- ✓ Exento de efecto Flicker (parpadeo)
- ✓ Con pinza para sujeción a la mesa.
- ✓ Brazo articulado muy resistente.

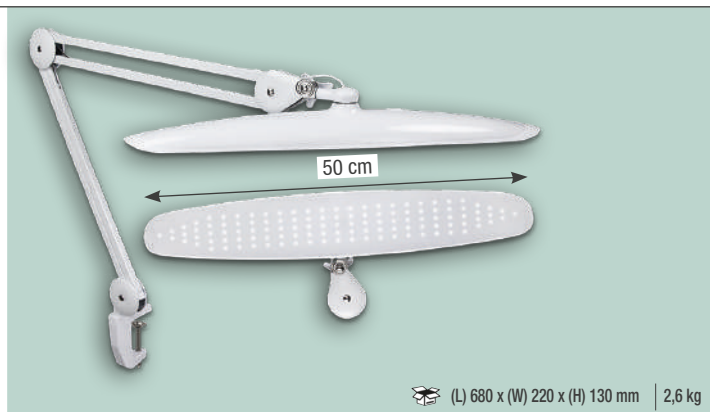

Lámpara LED (brazo articulado)

Ref. 100290

- ✓ 117 pequeños LED
- ✓ Temperatura color 5600 - 6000 K
- ✓ Energía consumida 6 - 24 W
- ✓ Exento de efecto Flicker (parpadeo)
- ✓ Con pinza de sujeción a mesa

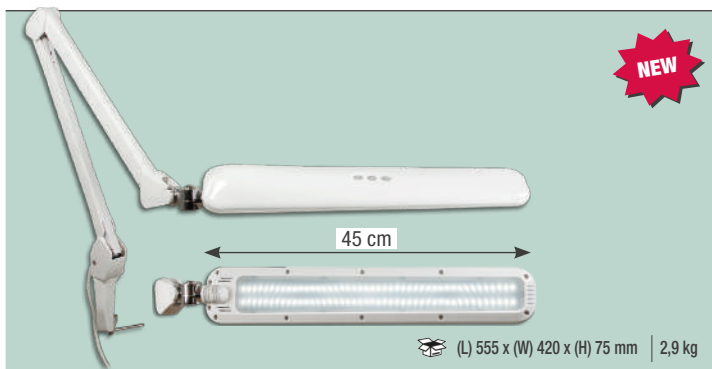

Lámpara LED (brazo articulado)

Ref. 100289

- ✓ 90 LEDs grandes.
- ✓ Temperatura color 6000 - 7000 K
- ✓ Intensidad de luz regulable táctil.
- ✓ Con pinza para sujeción a la mesa.




Lupa iluminada LED

Ref. 100287 (3 dioptrías)

Ref. 100287-5x (5 dioptrías)

- ✓ 90 LEDs blancos.
- ✓ Lentes de 3 y 5 dioptrías.
- ✓ Diámetro lupa 120 mm.
- ✓ Con pinza para sujeción a la mesa.

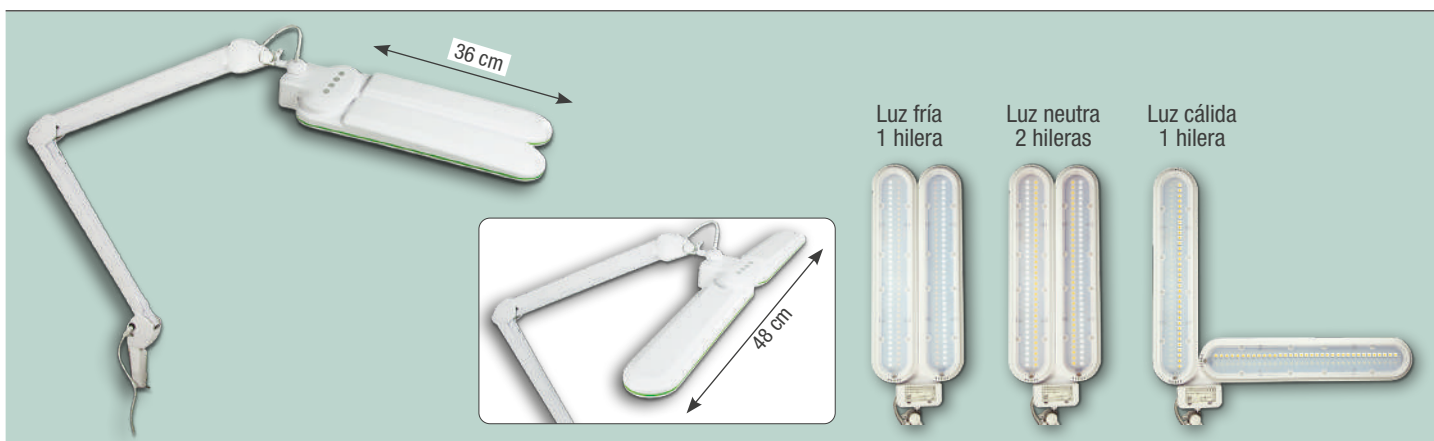

Lámpara LED (brazo articulado)

Ref. 100289V

- ✓ 180 LEDs.
- ✓ Temperatura color 6500 - 200 K
- ✓ Energía consumida 30 W
- ✓ 3 tipos de luz: fría, neutra y cálida.
- ✓ Intensidad de luz regulable táctil.
- ✓ Exento de efecto Flicker (parpadeo).
- ✓ Con pinza de sujeción a mesa.



Accesorios para lámparas y lupas

Ref. 100287 - 100287-5X - 100288 - 100290

Índice alfabético

Descripción	Página
ADERER, ALICATES	4
AGUA DESTILADA, DEPÓSITO	19
AIRE, PURIFICADOR	26
ALCOHOL, LAMPARILLA	11
ALGINATO, DEPÓSITO	30
ALGINATO, ESPÁTULA	3
ALGINATO, MEZCLADORA	30
ALGINATO, TAZA	3
ALGODÓN, DISPENSADOR DE ROLLOS	11
ALGODONERA	11
ALICATES	4
ALICATES, SOPORTE	4
AMALGAMA, APLICADOR	5
AMALGAMAS, MORTERO	5
ANGLE, ALICATES	4
ANILLO HÚMEDO, ASPIRACIÓN	32
ÁPICES, LOCALIZADOR	31
APLICADOR AMALGAMA	5
ARCO FACIAL	9
ARCO PORTA COFFERDAM	9
ASPIRACIÓN DE ANILLO HÚMEDO	32
ASPIRACIÓN EXTRAORAL	25
AUTOCLAVE 18D	17
AUTOCLAVE 3F	18
BALANZA	8
BANDEJA PORTATRABAJOS	18
BLANQUEAMIENTO, LÁMPARA	31
BOBINA PARA SELLADORA	24
BOLSA AUTOADHESIVA PARA ESTERILIZACIÓN	24
BOQUILLAS MEZCLADORAS	12
CABINA HIGIENIZADORA UV	27
CAJA DE TRANSPORTE	14
CAJA PARA ENDODONCIA	13
CAJAS	13
CAJAS MODELOS DE ORTODONCIA	13
CAJAS ORTODONCIA	13
CAJAS PARA MODELOS	14
CAJAS PARA PLACAS DE ORTODONCIA	13
CAJAS PARA PRÓTESIS	13
CALENTADOR DE COMPOSITOS	31
CALENTADOR PLACAS CERA	34
CALIBRADOR	6
CALYPSO	22
CÁMARA INTRAORAL	31
CARRO	35
CARRO ESCÁNER	34
CARRO RESIDUOS	35
CEMENTO, ESPÁTULA	4
CEPILLOS DESECHABLES PARA PROFILAXIS	10
COPAS DESECHABLES PARA PROFILAXIS	10
CERA, INSTRUMENTOS PARA MODELAR PK THOMAS	4
CLAMPS, PORTA	4
CLAMPS, TENAZA	4
COFFENDAM, ARCO	9
COMPOSITOS, CALENTADOR	31
COMPRESORES	32
CONTENEDOR PARA MODELOS	13
CORDONES	13
CORTADOR DE GUTAPERCHA	31
CUBETAS PARA IMPRESIÓN	12
CUCHARA DOSIFICADORA	8
DAPPEN, VASOS	8
DEPÓSITO DE AGUA DESTILADA	19
DEPÓSITO ESTANCO PARA ALGINATO	30
DESCONTAMINADOR DE FRESAS	10
DESINFECTANTE, NEBULIZADOR	27
DESTILADOR - DESCALCIFICADOR	19
DISPENSADOR DE ROLLOS DE ALGODÓN	11

Descripción	Página
DISPENSADOR DE VASOS	11
DOSIFICADOR DE LÍQUIDOS	11
DOSIFICADORA, CUCHARA	8
ENDODONCIA, CAJA	16
ENDODONCIA, MOTOR	31
ENDODONCIA, REGLA CALIBRADO	16
ESCAYOLA, ESPÁTULA	3
ESCUDO DE PROTECCIÓN RAYOS UV	7
ESPÁTULA ALGINATO	3
ESPÁTULA ESCAYOLA	3
ESPÁTULA PARA CEMENTO	4
ESPEJOS	5
ESPORAS, INCUBADORA	19
ESTERILIZACIÓN TENAZA	5
ESTERILIZACIÓN, RECIPIENTE FRESAS	10
EXTRAORAL, ASPIRACIÓN	25
FOX, PLANO	9
FILM PROTECTOR	24
FRESAS, ESTERILIZACIÓN	10
FRESAS, PINZA LIMPIEZA	9
FRESERO	10
GAFAS DE SEGURIDAD	7
GUTAPERCHA, CORTADOR	31
HORNO DE SECADO	28
IMPRESIÓN, CUBETAS	12
INCUBADORA DE ESPORAS	19
INSTRUMENTOS PARA MODELAR PK THOMAS	4
INTRAORAL, CÁMARA	31
IVORY, PERFORADORA DE DIQUES	4
LÁMINAS DE TERMOCONFORMADO	29
LÁMPARA DE BLANQUEAMIENTO	31
LÁMPARA DE CURADO	21
LÁMPARA DE POLIMERIZACIÓN LED.C	21
LÁMPARAS LED	36
LAMPARILLA DE ALCOHOL	11
LIMPIADOR DE ULTRASONIDOS	23
LOCALIZADOR DE ÁPICES DPEX III	31
LUPA CABEZA	7
LUPA ILUMINADA	36
LUPAS	7
MAGNÉTICO, FRESERO	10
MAGNÉTICO, SOPORTE PORTAINSTRUMENTOS	3
MANGOS PARA ESPEJOS	5
MANGOS PARA PUNTA MORSE	5
MARTILLO SACA CORONAS	5
MATHIEU, PINZA	4
MESA DE REPASO-TRABAJO	33
MEZCLADORA DE ALGINATO	30
MEZCLADORA DE SILICONAS	30
MICROAPLICADORES	10
MINI MÓDULO MICROCHORREADO	19
MORTERO PARA AMALGAMAS	5
MOTOR DE ENDODONCIA	31
NEBULIZADOR PARA DESINFECTANTE	27
NEGATOSCOPIO	8
OCLUSOR DOBLE GUÍA	3
PELÍCULA DENTAL, PINZA	8
PERFORADORA DE DIQUES	4
PIE DE LÁMPARA	36
PINZA LIMPIA FRESAS	9
PINZA PELÍCULA DENTAL	8
PINZAS PARA SOLDADURA	6
PISTOLA DISPENSADORA DE SILICONA	12
PISTOLA MICROCHORREADO	19
PK THOMAS INSTRUMENTOS PARA MODELAR	4
PLACAS DE TERMOCONFORMADO	29
PLANO DE FOX	9
PLASTPRESS	28

Descripción	Página
PORTA CLAMPS	4
PORTA FRESAS	10
PORTAMATRICES	5
PROFILAXIS, CEPILLOS DESECHABLES	10
PROFILAXIS, COPAS DESECHABLES	10
PROTECTOR FACIAL	7
PURIFICADOR DE AIRE	26
RECIPIENTE PARA LA ESTERILIZACIÓN DE FRESAS	10
REGLA CALIBRADO DE LIMAS DE ENDODONCIA	16
RETRACTOR LABIAL	9
REVELADORA MANUAL	6
SCHWARZ, ALICATES	4
SECADO, HORNO	28
SELLADORA DE BOLSAS	24
SEPARADOR DE MEJILLAS	9
SERVILLETEROS	9
SILICONAS, MEZCLADORA	30
SILLA PARA PUESTO DE TRABAJO	33-34
SOLDADURA, PINZAS	6
SOPORTE BANDEJAS, BARRA	15
SOPORTE PARA INSTRUMENTOS	4
SOPORTE PORTA ALICATES	4
SOPORTE PORTAINSTRUMENTOS MAGNÉTICO	3
TAZA PARA ALGINATO	3
TENAZA PARA CLAMPS	4
TENAZA PARA ESTERILIZACIÓN	5
TERMOCONFORMADO, LÁMINAS	29
TERMOCONFORMADORA	28
TERMOPLAST	28
TRANSPORTE, CAJA	14
ULTRASONIDOS SOBREMESA	22
ULTRASONIDOS, BAÑO	22-23
UV, CABINA HIGIENIZADORA	27
UV, ESCUDO DE PROTECCIÓN	7
UV, GAFAS DE PROTECCIÓN	7
VASOS DAPPEN	3
VASOS, DISPENSADOR	11
WALDSACHS, ALICATES	4
WEINGART, ALICATES	4
ZOCALADORES	3



MESTRA

Talleres Mestraitua SL
(+34) 944 530 388
info@mestra.es - www.mestra.es
48150 SONDIKA (Spain)



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 1100018003