



MESTRA

CABINET DENTAIRE

Catalogue


**2
0
2
6**



www.mestra.es/fr


Table des matières

Matériel	03
Nettoyage et désinfection	17
Machines	28
Etablis	33
Éclairage	36
 Index alphabétique	 38

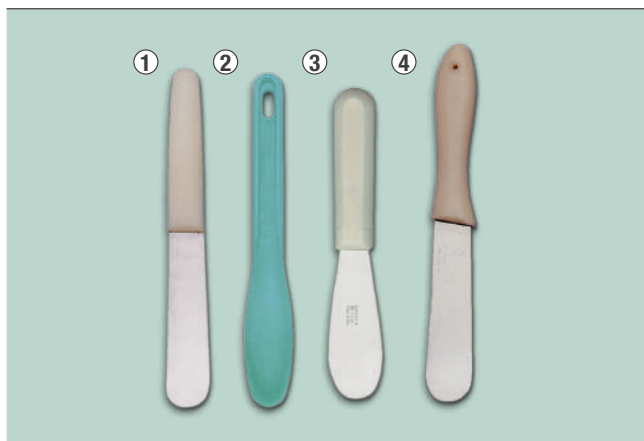

Spatules et couteaux

		Long. Total	Lame	Poids
1. Réf. 060001	Spatule pour alginate (acier inox. manche blanc)	205 mm	110 mm	0,061 kg
2. Réf. 060002	Spatule pour plâtre-alginate (plastique) 12 u.	208 mm	90 mm	0,024 kg
3. Réf. 060003	Spatule pour alginate (acier inox. manche blanc)	190 mm	90 mm	0,037 kg
3. Réf. 060000	Spatule pour alginate	230 mm	110 mm	0,075 kg

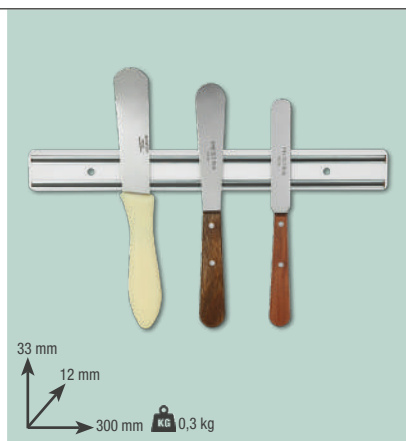

Barre magnétique (range-outils)

Réf. 050362

Facile à placer, on peut le fixer n'importe où à l'aide de vis.
(Spatules non incluses).



Bol à alginate

Réf. 060120

Diamètre	110 mm	Capacité	400 cm³
Hauteur	78 mm	Poids	0,100 kg




Godets Dappen

Réf. 070161 Réf. 070162 Réf. 070163 Réf. 070164

Référence	Couleur
070161	Ambre (12 u.)
070162	Bleu (12 u.)
070163	Transparent (12 u.)
070164	Vert (12 u.)

Ø 33 x (H) 35 mm | 0,042 kg (1 u.)
(L) 160 x (W) 110 x (H) 40 mm | 0,63 kg (12 u.)

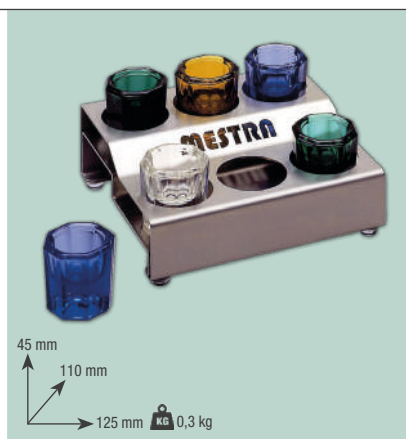

Support pour godets Dappen

Réf. 070165

En acier inoxydable dépoli muni de pieds en silicone antidérapants. Très pratique pour organiser la table de travail.


Dispose de 6 emplacements à godets
(Non fournis).



Articulateur plastique

(pour modèles d'orthodontie) 50 u.

Réf. 010110

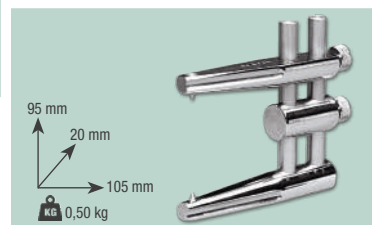

Occlusion à double guide

(pour orthopédie du maxillaire)

Réf. 010130




Socles à aimant

Réf. 050110=SP Réf. 050120=IP
Réf. 050130=SG Réf. 050140=IG

MODE D'EMPLOI

- Positionner le socle avec sa rondelle (pointe rétentive vers le haut).
- Couler le modèle comme à votre habitude.
- Une fois sec et demoulé retournez-le et isolez-le en plaçant l'aimant sur la rondelle.
- Couler par dessus le plâtre de mise en articulation en le fixant en même temps sur l'articulateur. Laisser prendre le plâtre puis séparer soigneusement le modèle du sabot de l'articulateur, celui-ci pourra servir pour d'autres modèles.

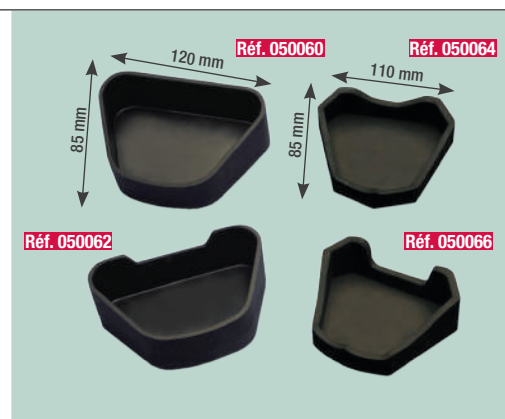

Moules à socle pour modèles

S = Supérieur	I = Inférieur	S = Supérieur	I = Inférieur
Réf. 050060	Réf. 050062	Réf. 050064	Réf. 050066
0,081 kg	0,081 kg	0,073 kg	0,071 kg



Instruments à modeler

Réf. 070320 (Kit 6 pièces) **Réf. 070330** (Kit 5 pièces)



Porte clamps: stérilisable


Réf. 070110 Fabriqué en silicone. Stérilisable.



Perforeuse de digues



Tenaille pour clamps


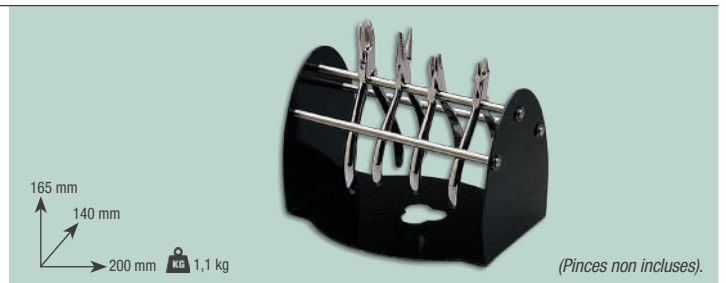


Support porte-pincettes **Réf. 050364**

Élément de rangement simple et pratique qui permet de garder la table de travail en ordre.

Spatules à ciment


- ① **Réf. 060240** 178 mm
0,02 kg
- ① **Réf. 060242** 175 mm
0,02 kg
- ② **Réf. 060244** 175 mm
0,02 kg
- ③ **Réf. 060246** 178 mm
0,02 kg
- ④ **Réf. 060248** 175 mm
0,02 kg
- ⑤ **Réf. 060250** 195 mm
0,02 kg

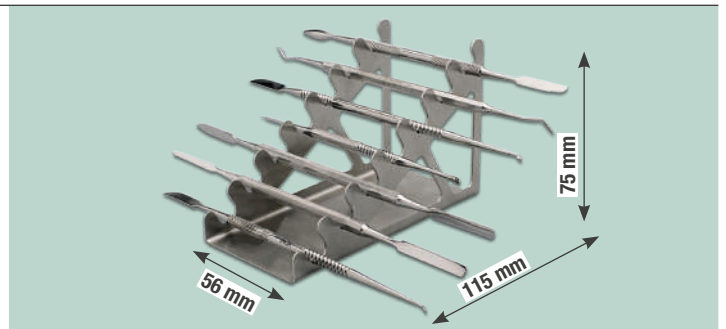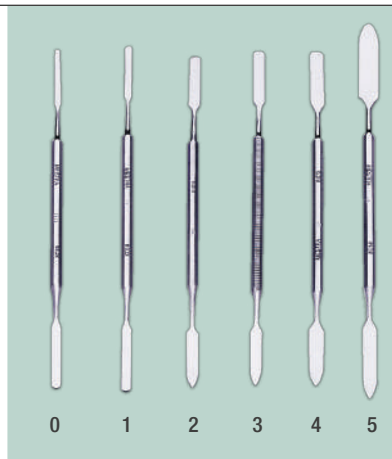


Support acier inox. Pour instruments

Réf. 060235

Entièrement fabriqué en acier inoxydable. Permet de stocker jusqu'à 7 outils de travail. (Spatules non inclus).

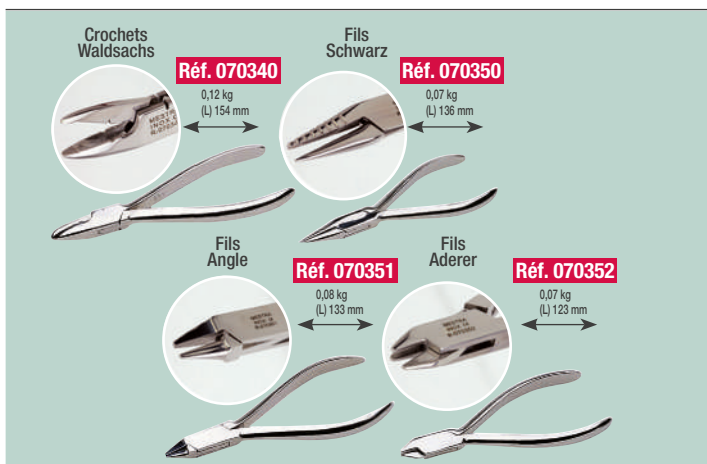


Pincettes à crochets

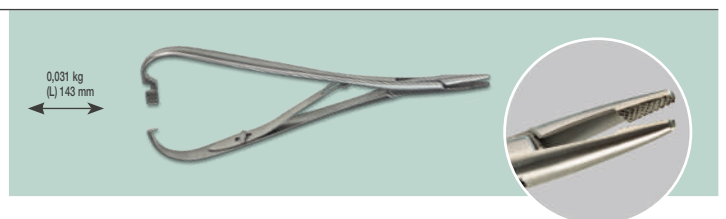

Pince Mathieu **Réf. 070356**




Pince Weingart **Réf. 070354**

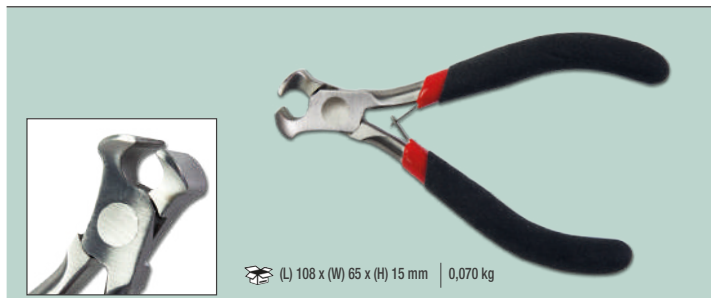

Pince standard (bending fil)

Réf. 070339

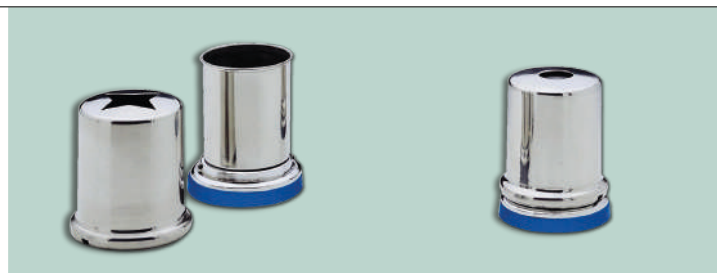

Boîte pour cotons sales

Réf. 070155 (acier inoxydable)

Ø 60-51 x (H) 77 mm | 0,300 kg

Boîte pour cotons propres

Réf. 070160 (acier inoxydable)



Marteau arrache-couronnes

Réf. 070035-04

Pointe longue


Réf. 070035-05

Astuce courte

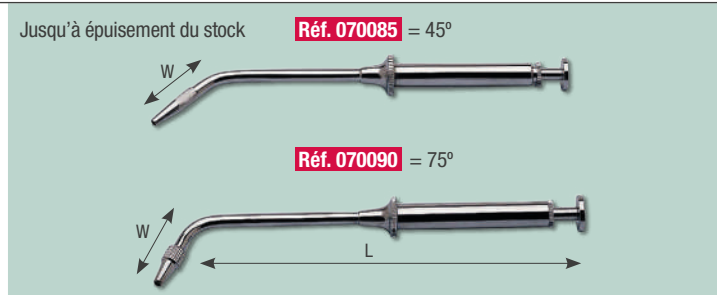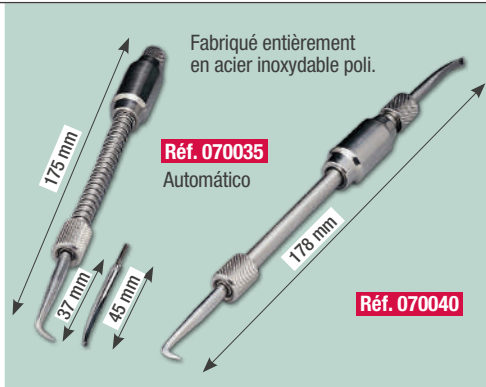

Applicateur d'amalgames

Réf. 070085	(L) 145 x (W) 26 x Ø 14 mm	0,031 kg
Réf. 070090	(L) 133 x (W) 30 x Ø 14 mm	0,027 kg

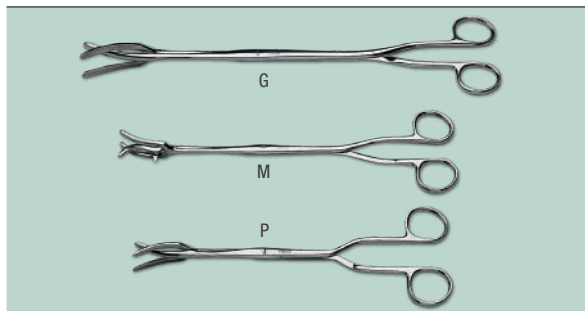

Pincettes


Réf. 070380 = G	(L) 300 x (W) 75 x (H) 25 mm	0,125 kg
Réf. 070390 = M	(L) 230 x (W) 66 x (H) 17 mm	0,059 kg
Réf. 070400 = P	(L) 200 x (W) 72 x (H) 20 mm	0,059 kg



Mortier à amalgames

Réf. 060140

Fabricada en acero inoxidable.

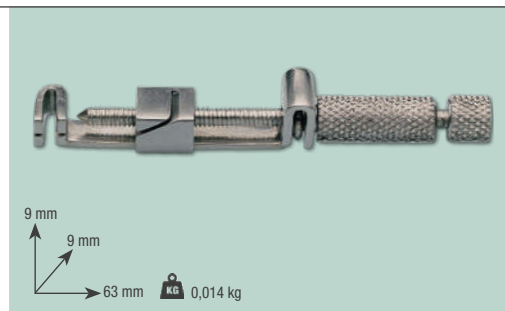

Porte-matrices (universel)

Réf. 070409



Distributeur de rouleaux de coton

Fabriqué en plastique stérilisable à 135 C°.

Réf. 070061	(L) 120 x (W) 97 x (H) 55 mm 0,2 kg
Réf. 070062	(L) 120 x (W) 105 x (H) 60 mm 0,2 kg
Réf. 070062	(L) 108 x (W) 100 x (H) 52 mm 0,3 kg
Réf. 070062	(L) 120 x (W) 105 x (H) 60 mm 0,3 kg

Doseur de liquides

Réf. 070650

Flacon de 400 cc. Capacité adéquate pour tout type de liquides en laboratoire ou en cabinet. Peut être utilisé d'une seule main.

Deux types de graduation: en ml et en doses pour la préparation d'alginates.

Ø 77 x (H) 200 mm	0,061 kg
(L) 205 x (W) 80 x (H) 80 mm	0,102 kg



Distributeur de gobelets

Réf. 070491	(L) 320 x (W) 100 x (H) 113 mm	0,354 kg
Réf. 070491	(L) 340 x (W) 135 x (H) 122 mm	0,490 kg
Réf. 070490	(L) 358 x (W) 85 x (H) 85 mm	0,777 kg
Réf. 070490	(L) 373 x (W) 95 x (H) 95 mm	0,860 kg



Porte-fraises (plastique)

Réf. 070142

Ø 90 x (H) 66 mm | 0,07 kg

 (L) 91 x (W) 91 x (H) 71 mm | 0,09 kg



Porte-fraises (Clinique)

Réf. 070150


Fixation des fraises par aimant.
Fabriqué en acier inoxydable
(ferritique) avec carénage en
plastique.

 (L) 115 x (W) 45 x (H) 45 mm | 0,18 kg



Réf. 070151 = FG

Réf. 070152 = CA

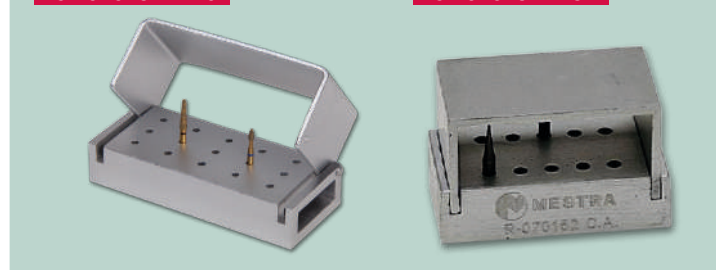

Porte-fraises aluminium

Réf. 070151 = FG | (L) 60 x (W) 25 x (H) 29 mm | 0,040 kg

Réf. 070152 = CA | (L) 40 x (W) 25 x (H) 27 mm | 0,046 kg

Porte-fraises

magnétiques **Réf. 070115**

Très pratique et d'un design agréable.
Ses dimensions réduites permettent
de lui trouver facilement une place.

Conditionné par 3 unités:
rouge, vert et bleu. Ø 62 mm.

Ø 62 x (H) 49 mm (1 u.) | 0,182 kg

 (L) 200 x (W) 40 x (H) 60 mm - Paking (3 u.)
0,583 kg



Lampe à alcool

Réf. 070065

(acier inoxydable)

Ø 76 x (H) 54 mm | 0,100 kg

Mecha lamparillas:

Réf. 070065-03

Réf. 070065-10

Réf. 070065-11



Réf. 070070

(verre)

Ø 60 x (H) 83 mm | 0,192 kg

Stérilisateur de fraises (acier inoxydable)

Réf. 070530

Réf. 070531



Ø 70 x (H) 35 mm | 0,119 kg

Ø 90 x (H) 80 mm | 0,122 kg



Seule la base, en plastique résistant aux
hautes températures. Capacité pour 36 pièces.
Fabriqués pour: FG, CA, FG+CA, Laboratorio.



Porte-fraises (plastique stérilisable)

Réf. 070120 | (L) 75 x (W) 60 x (H) 35 mm | 0,060 kg

Réf. 070125 | (L) 75 x (W) 60 x (H) 35 mm | 0,060 kg

Réf. 070130 | (L) 75 x (W) 60 x (H) 35 mm | 0,060 kg


Réf. 070135 | (L) 75 x (W) 60 x (H) 55 mm | 0,072 kg

Réf. 070120 = FG

Réf. 070125 = CA

Réf. 070130 = FG+CA

Réf. 070135 = Laboratorio

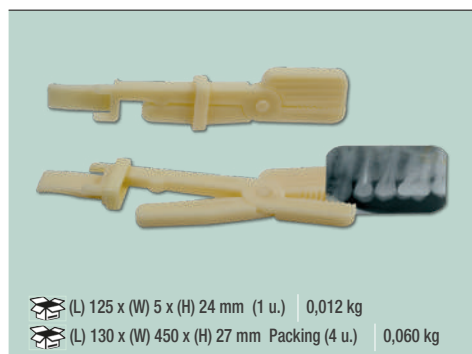


(L) 125 x (W) 5 x (H) 24 mm (1 u.) | 0,012 kg
(L) 130 x (W) 450 x (H) 27 mm Packing (4 u.) | 0,060 kg

Pince film dentaire (4 u.)

Fabriquée en plastique

Réf. 070194

Fabriquée en matériau plastique totalement perméable aux rayons X. Grande longévité, fiable et facile à utiliser.

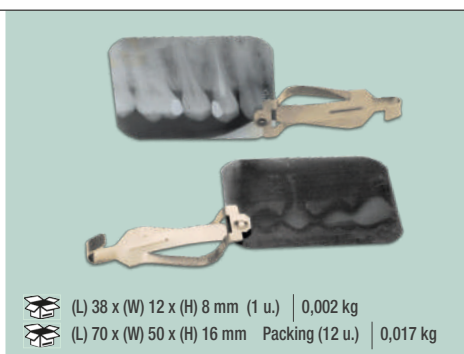


(L) 38 x (W) 12 x (H) 8 mm (1 u.) | 0,002 kg
(L) 70 x (W) 50 x (H) 16 mm Packing (12 u.) | 0,017 kg

Pince film dentaire (12 u.)

Acier inoxydable

Réf. 070190

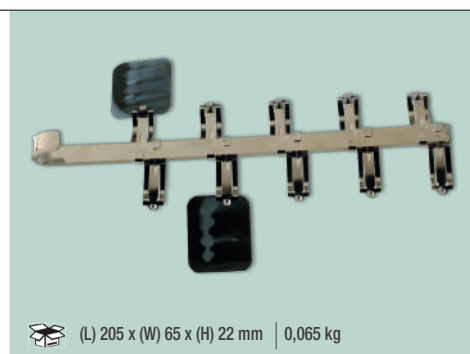

(L) 205 x (W) 65 x (H) 22 mm | 0,065 kg

Support de 10 pinces (pour radios dentaires)

Réf. 070192

Il facilite la manipulation des radios dentaires. Fabriqué en acier inoxydable.

Négatoscopes (plats)

Négatoscopes avec écran à lumière froide de 3500 lux à haute luminosité. Cette technologie est accompagnée d'une consommation réduite et d'une durée de vie pratiquement illimitée (10000 heures minimum).

Le modèle Réf.100132 dispose d'un grand écran rétroéclairé par LED de taille SRA3 sur lequel les films grand format peuvent être visualisés. Cela a aussi régulation de l'intensité lumineuse et deux types de fonctionnement: automatique, lorsque le film s'approche de l'appareil s'allume sans appuyer sur le bouton; allumé en appuyant sur le bouton.


		Surface de vision	Dim. générales		
Réf. 100131	DIN A4	300 x 210 mm	360 x 240 x 20 mm	Mural et support table	1,700 kg
Réf. 100132	SRA3	430 x 355 mm	510 x 495 x 23 mm	Mural et support table	3,076 kg
Réf. 100134	DIN A2	580 x 400 mm	700 x 520 x 33 mm	Mural	4,000 kg



(L) 410 x (W) 200 x (H) 88 mm | 4,032 kg
(L) 515 x (W) 350 x (H) 290 mm | 4,500 kg

Négatoscope **Réf. 070460**

Fourni avec support incliné (30°). Il peut également être installé horizontalement ou vissé sur un mur. Ils est muni d'un système de ressorts pour amortir le couvercle et retenir les films. Mesures 400 x 200 mm.

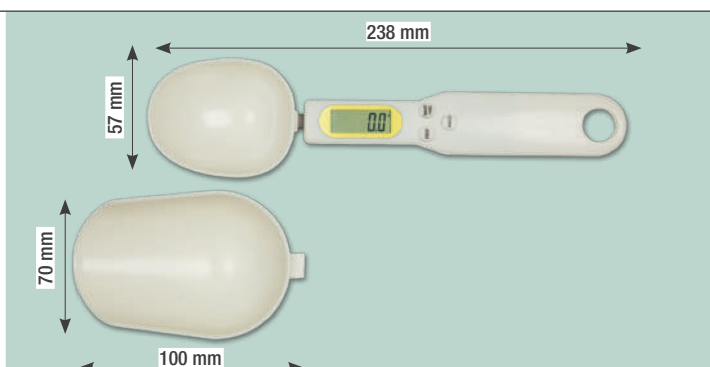

Cuillère doseur **Réf. 100270**

APRES ESSAI: Réalisez une économie de 20% à 40% de plâtre.

Réf. 100270 0,042 kg



Réf. 100041

Avec une précision de 0,1 g. pèse jusqu'à 3.000 gr. fonction de "comptage des pièces" très utile pour le comptage de petits éléments tels que les plots, les pins, etc.

Réf. 100040

D'une précision de 0,05 g entre 0 et 1000 g et de 0,1 g entre 1000 et 2000 g

Réf. 100042

Precise resolution of 0.1 g and high weighing capacity (1000 g).

Balances de précision

Réf. 100040	(L) 150 x (W) 110 x (H) 36 mm	0,286 kg
Réf. 100041	(L) 248 x (W) 248 x (H) 100 mm	0,774 kg
Réf. 100042	(L) 300 x (W) 190 x (H) 55 mm	0,446 kg



Loupe avec monture


Réf. 100092

Elle est livrée avec 4 jeux de lentilles:
1.5x, 2.0x, 2.5x et 3.5x dioptries

Loupe à main avec lumière

Réf. 100099

(L) 70 x (W) 50 x (H) 30 mm | 0,06 kg

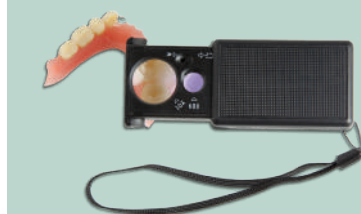

Longueur	65 mm
Hauteur dépliée	103 mm
Largeur	40 mm
Poids	0,055 kg



Loupe sur pied



Réf. 100098

(L) 315 x (W) 154 x (H) 45 mm | 0,427 kg

Support à pinces

Réf. 050554

(L) 120 x (W) 75 x (H) 68 mm
0,42 kg

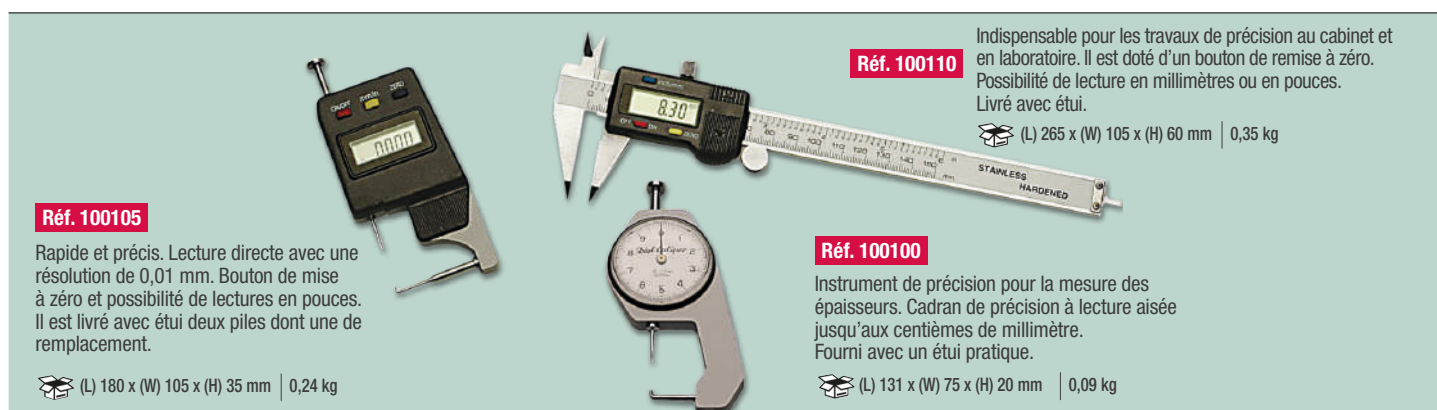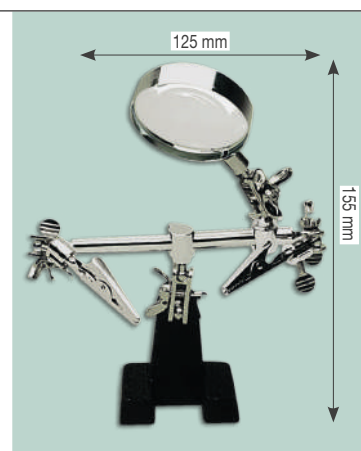

Réf. 100105

Rapide et précis. Lecture directe avec une résolution de 0,01 mm. Bouton de mise à zéro et possibilité de lectures en pouces. Il est livré avec étui deux piles dont une de remplacement.

(L) 180 x (W) 105 x (H) 35 mm | 0,24 kg

Réf. 100110

Indispensable pour les travaux de précision au cabinet et en laboratoire. Il est doté d'un bouton de remise à zéro. Possibilité de lecture en millimètres ou en pouces. Livré avec étui.


(L) 265 x (W) 105 x (H) 60 mm | 0,35 kg

Réf. 100100

Instrument de précision pour la mesure des épaisseurs. Cadran de précision à lecture aisée jusqu'aux centièmes de millimètre. Fourni avec un étui pratique.

(L) 131 x (W) 75 x (H) 20 mm | 0,09 kg

Compas d'épaisseur

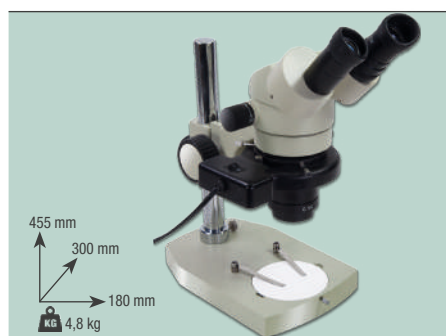

Binoculaire avec pied

Réf. 100097

Entre 5X et 15X
Distance travail: 180 mm.

(L) 350 x (W) 275 x (H) 370 mm | 5 kg

Accessoires:

- ✓ 2 pinces porte-radiographies (inox.)
- ✓ 3 Verres



Développeuse manuelle

Fabriquée en plastique injecté avec filtre solaire.

Réf. 070170

(L) 360 x (W) 230 x (H) 205 mm | 1,66 kg

(L) 520 x (W) 300 x (H) 360 mm | 2,8 kg



Développeuse manuelle

(avec négatoscope) Réf. 070180

(L) 360 x (W) 230 x (H) 270 mm | 3,5 kg

(L) 520 x (W) 300 x (H) 360 mm | 4,7 kg

Loupes frontales

Son système de fixation ajustable à la tête permet d'avoir les mains libres pour travailler. Elle est fournie avec des verres très transparents à faible absorption de la lumière.

Conçues pour pouvoir être portées en même temps que des lunettes. 3 modèles distincts:

	Réf. 100079 (L) 285 x (W) 225 x (H) 89 mm	0,55 kg
	Réf. 100080 (L) 205 x (W) 185 x (H) 70 mm	0,25 kg
	Réf. 100090 (L) 175 x (W) 175 x (H) 70 mm	0,19 kg



Loupe binoculaire

Réf. 100096 2,5 Dioptries.
Distance de travail: 350 mm



- ✓ Loupes 3.0X
- ✓ Etui de protection
- ✓ Lunettes SS/S/R/L
- ✓ Etui
- ✓ Sac en tissu
- ✓ Chiffon de nettoyage
- ✓ Ruban de corde

Distance de travail	420 ± 20mm
Prof. de vision	90mm 90mm
Champ de vision	80mm 90mm
Poids	85g


Loupes dentaires galiléennes Réf. 100093

Sans mécanisme de bascule, elles sont donc plus légères et la profondeur de champ et le champ de vision sont plus grands et plus larges qu'avec le système de bascule. 4 types de lunettes de protection: SS, S, R, L.



Éclairage LED pour loupes dentaires galiléennes Réf. 100094

- ✓ Éclairage LED + filtre jaune.
- ✓ Contrôleur de lumière sans fil (x2).
- ✓ Adaptateur de commutation.
- ✓ Câble de charge.

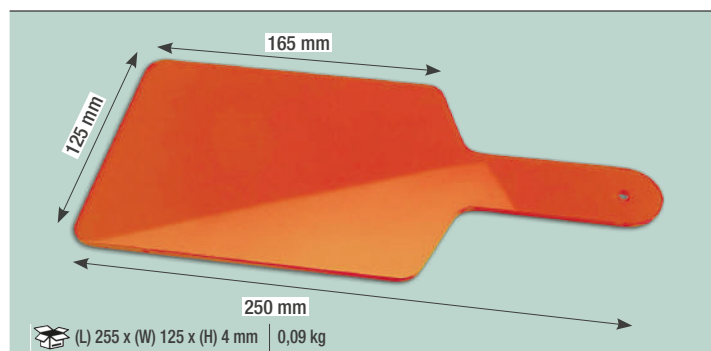

Écran de protection contre les rayons UV

Réf. 070515



Lunettes de sécurité

Réf. 100011-12-13		(L) 160 x (W) 54 x (H) 56 mm	0,05 kg
Réf. 100014		(L) 180 x (W) 90 x (H) 65 mm	0,07 kg



Protecteur facial

Réf. 100021 (10 u.)

	(L) 285 x (W) 185 x (H) 35 mm	0,23 kg
--	-------------------------------	---------

Réf. 100022 (10 u.)

	(L) 308 x (W) 215 x (H) 35 mm	0,28 kg
---	-------------------------------	---------



Loupes de travail - Bioart

Augmentation 2,5x Augmentation 3,5x

Réf. 100076 **Réf. 100077**

Légères, pratiques et avec une excellente vision claire et panoramique. La loupe est indispensable pour le travail du cabinet et du laboratoire. Fabriquée avec de la résine CR-39 elles offrent une plus grande résistance à l'abrasion et une excellente transparence.

Fabriqu  en plastique
st rilisable   135 C .

R f. 070054

R f. 070051

R f. 070053

Ecarteur de l vres **R f. 070055**

Fabriqu  en plastique st rilisable   135 C 

(L) 120 x (W) 53 x (H) 18 mm (1 u.) 0,008 kg

 (L) 145 x (W) 60 x (H) 25 mm - Paking (2 u.) 0,028 kg



Ecarteur de l vres **R f. 070056**

Fabriqu  en plastique st rilisable   135 C 

(L) 115 x (W) 42 x (H) 18 mm (1 u.) 0,008 kg

 (L) 140 x (W) 50 x (H) 25 mm - Paking (2 u.) 0,026 kg



Ecarteur de l vres

R f. 070051  (L) 155 x (W) 10 x (H) 25 mm Paking (2 u.) 0,324 kg

R f. 070053  (L) 155 x (W) 10 x (H) 25 mm Paking (2 u.) 0,355 kg

R f. 070054  (L) 115 x (W) 70 x (H) 20 mm Paking (2 u.) 0,234 kg



(L) 150 x (W) 45 x (H) 20 mm (1 u.) 0,019 kg

 (L) 170 x (W) 55 x (H) 30 mm - Paking (2 u.) 0,038 kg



R f. 070057 A (L) 166 x (W) 55 x (H) 20 mm Paking (1 u.) 0,019 kg

R f. 070057 B (L) 145 x (W) 45 x (H) 16 mm Paking (1 u.) 0,012 kg

R f. 070057 A (L) 190 x (W) 60 x (H) 35 mm  Paking (2 u.) 0,055 kg

R f. 070057 B (L) 175 x (W) 50 x (H) 50 mm  Paking (2 u.) 0,044 kg

Ecarteur de l vres (2 unit s) double usage


R f. 070052

Fabriqu  en plastique st rilisable   135 C .

Ecarteur de l vres

R f. 070057A R f. 070057B

Fabriqu  en plastique st rilisable   135 C .

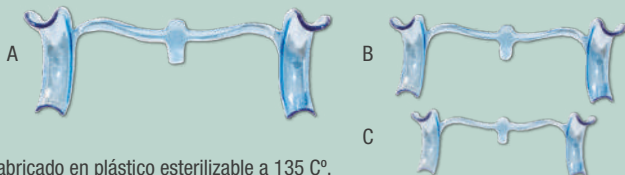

Fabricado en pl stico esterilizabile a 135 C .

Ecarteur de l vres

R f. 070058 A

R f. 070058 B

R f. 070058 C

R f. 070058 A (L) 126 x (W) 50 x (H) 53 mm Paking (1 u.) 0,010 kg

R f. 070058 B (L) 105 x (W) 48 x (H) 48 mm Paking (1 u.) 0,009 kg

R f. 070058 C (L) 98 x (W) 42 x (H) 40 mm Paking (1 u.) 0,007 kg

R f. 070058 (L) 145 x (W) 60 x (H) 55 mm Paking (2 u.) 0,034 kg



Ecarteur de l vres

R f. 070059

Fabriqu  en plastique
st rilisable   135 C .

(L) 73 x (W) 70 x (H) 28 mm (1 u.) 0,005 kg

 (L) 130 x (W) 70 x (H) 80 mm Paking (10 u.) 0,052 kg

Pinces pour serviettes (10 u.)

R f. 070060

(L) 520 mm (u.) 0,014 kg (u.)

 (L) 100 x (W) 120 x (H) 30 mm (aprox.)
0,161 kg (10 u.)



Pinces pour le nettoyage des fraises **R f. 070520**

Id al pour immerger les fraises
et autres petits objets dans
des bains d sinfectants,
des ultrasons et des autoclaves.
Fabriqu  en acier inoxydable.

(L) 156 x (W) 45 x (H) 40 mm 0,021 kg



Plan de Fox (plastique)

R f. 070510

Fabricado en pl stico
esterilizabile a 135 C .

(L) 180 x (W) 130 x (H) 6 mm 0,038 kg




Arc porte-cofferdam

R f. 070045

Fabriqu  en plastiques
sp ciaux de haute r sistance
aux temp ratures; il peut  tre
st rilis . Il est incassable
et radiotransparent.

R f. 070050 M talique.

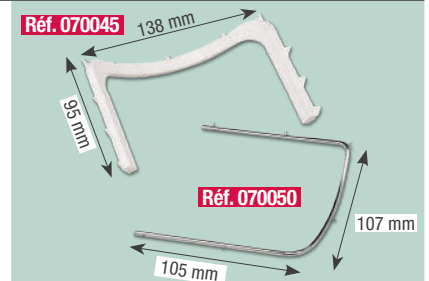



070667
Superfin - 1 mm

070669
Fin - 1,5 mm

070671
Régulier - 2 mm

Microapplicateurs (400 unités par boîte)

Réf. 070667 **Réf. 070669** **Réf. 070671**

NEW



Brosses jetables pour la prophylaxie (100 u)


Réf. 070702 Dur **Réf. 070704** Moyen

NEW

Gobelets jetables pour la prophylaxie (100 u)

Réf. 070706 Dur **Réf. 070708** Moyen

NEW

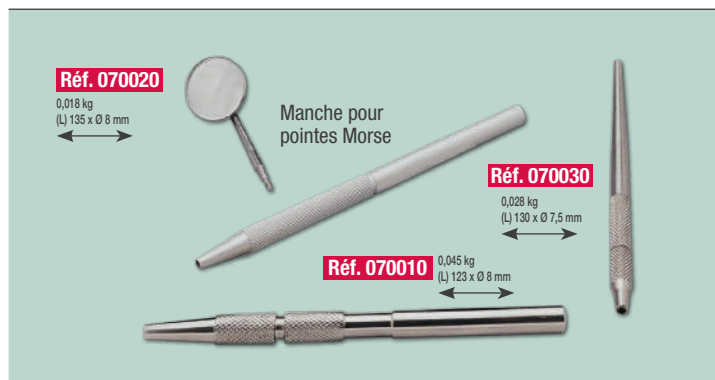

Réf. 070020

0,018 kg
(L) 135 x Ø 8 mm

Manche pour
pointes Morse

Réf. 070030

0,028 kg
(L) 130 x Ø 7,5 mm

Réf. 070010

0,045 kg
(L) 123 x Ø 8 mm



Animales, coches,
llaveros, navideños...

Manche pour miroirs

Réf. 070010

Fabriquée en acier inoxydable.

Réf. 070020

Fabriquée en aluminium anodisé.

Couleurs: Argent.

Réf. 070030

Fabriquées en acier inoxydable.

La pince étant sectionnée en trois
points, le serrage est garanti.

Assortiment de jouets

Réf. 160000

Surtido de 25 u.

Tamaño de la bola: Alto 550 mm x Ancho 500 mm

NEW

Miroirs dentaires (12 unités)

De très grande qualité ayant les homologations en vigueur.
Ils sont tous du type à surface plane (plat) avec châssis
en acier inoxydable. Ils existent en argent (type normal)
et également en rhodium.

Le résultat donne une image plus nette sans distorsions.
Quatre dimensions disponibles à surface plane: N°3, N°4,
N°5, N°6 avec deux types de pas de vis: le conique et le fin.

Filetage conique

Filetage fin

Plan	Normal	Rhodium	Plan	Normal	Rhodium
N° 4	070551	070560	N° 4	070556	070565
N° 5	070552	070561	N° 5	070557	070566
N° 6	070553				



Filetage conique

Filetage fin



Packing (12 u.) (L) 84 x (W) 52 x (H) 28 mm | 0,080 kg


Embouts mélangeurs

Vendu par paquet de 50 unités.

Compatibles avec les principaux systèmes d'injection du marché.

RÉFÉRENCE	COULEUR
Réf. 100172	Jaune (50 unités.)
Réf. 100176	Jaune Bouts (50 unités.)
Réf. 100170	Vert (50 uds.)
Réf. 100178	Bleu clair long (50 u.)
Réf. 100180	Bleu clair court (50 u.)
Réf. 100184	Rose (50 u.)
Réf. 100187	Brune (50 u.)
Réf. 100187-01	Bouts 1,06 mm (50 u.)
Réf. 100187-02	Bouts 2,00 mm (50 u.)
Réf. 100185	Brune court (50 u.)
Réf. 100186	Brune long (50 u.)

60 x (W) 110 x (H) 45 mm | 0,12 kg

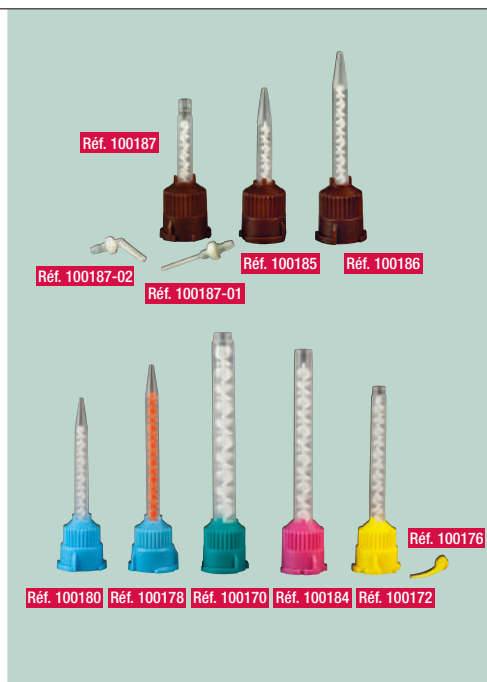

Pistolet distributeur de silicone

Renforcé

Réf. 100166

(L) 190 x (W) 120 x (H) 70 mm | 0,22 kg



Porte-empreintes à usage unique (100 u.)

Réf. 100219 Kit complet

Porte-empreintes hygiéniques à usage unique. Economie de temps et de détergent puisqu'on évite des opérations de nettoyage. Ajustables en les chauffant à des dimensions spécifiques pour chaque patient.

Elles sont Transparents pouvant être utilisées en implantologie.

10 formes et dimensions différentes.

Contenu du set:

10 unités - UL - UM - US - P1
10 unités - LL - LM - LS - P2
10 unités - PB - PA

Réassort: 25 unités du modèle sollicité

Réf. 100220-UL - Supérieur Grand
Réf. 100220-UM - Supérieur Moyen
Réf. 100220-US - Supérieur Petit
Réf. 100220-LL - Inférieur Grand
Réf. 100220-LM - Inférieur Moyen
Réf. 100220-LS - Inférieur Petit
Réf. 100220-PA - Partiel A
Réf. 100220-PB - Partiel B
Réf. 100220-P1 - Inférieur enfants
Réf. 100220-P2 - Supérieur enfants

(L) 380 x (W) 290 x (H) 130 mm Paking (100 u.) | 1,526 kg

(L) 200 x (W) 200 x (H) 80 mm Paking (25 u.) | 0,246 kg



Porte-empreintes à usage unique (100 u.) avec rétentions

Réf. 100222 Kit complet

Fabriqués en plastique de haute résistance qui les rendent rigides et indéformables. Grâce à leur design anatomique et aux différentes tailles et formes disponibles (10 alternatives), ils s'adaptent à tous les patients. Ils sont pourvus d'une rétention interne pour


éviter les mouvements indésirables de la pâte à empreintes.

De plus la base est sectionnée pour pouvoir aisément ouvrir des événements -si nécessaire- à l'aide d'une fraise et libérer ainsi les postes implantaires.

Contenu du set:

10 unités UL1 - UM3 - US5
10 unités LL2 - LM4 - LS6

10 unités Q7 - Q8
10 unités UA9 - LA10

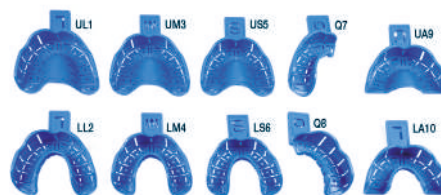

Réassort: 25 unités du modèle sollicité

Réf. 100222-UL1 Supérieur Grand
Réf. 100222-UM3 Supérieur Moyen
Réf. 100222-US5 Supérieur Petit
Réf. 100222-LL2 Inférieur Grand
Réf. 100222-LM4 Inférieur Moyen
Réf. 100222-LS6 Inférieur Petit
Réf. 100222-Q7 Partiel 7
Réf. 100222-Q8 Partiel 8
Réf. 100222-UA9 Supérieur Précédent
Réf. 100222-LA10 Inférieur Précédent

(L) 380 x (W) 290 x (H) 130 mm | 1,526 kg

Porte-empreintes (avec rétentions) acier inox.

Réf. 070450 Set 6 cuvettes


Réf. 070452 = L2 0,047 kg Réf. 070457 = U2 0,055 kg
 Réf. 070453 = L3 0,048 kg Réf. 070458 = U3 0,052 kg
 Réf. 070454 = L4 0,043 kg Réf. 070459 = U4 0,049 kg



Porte-empreintes - Implants (10 u. de chaque référence)

Réf. 100222


BLEU	100222-CA	Supérieur	A
	100222-CB	Inférieur	B
	100222-SG	Inférieur	Grand
	100222-IG	Inférieur	Grand
	100222-SM	Supérieur	Moyen
	100222-IM	Inférieur	Moyen
	100222-SP	Supérieur	Petit
	100222-IP	Inférieur	Petit
	100222-SA	Supérieur	Antérieur
	100222-IA	Inférieur	Antérieur

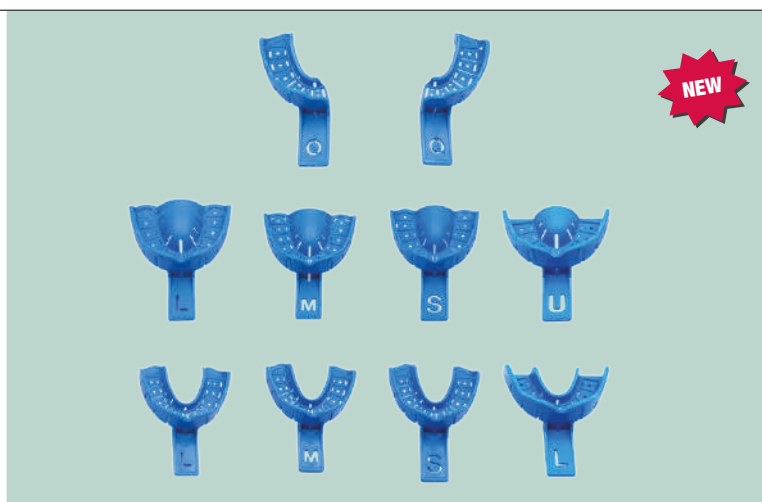

Porte-empreintes - Autoclavables (12 u. de chaque référence)

Réf. 100223


VERT	100223-CA	Partiel	A
	100223-CB	Partiel	B
	100223-SG	Supérieur	Grand
	100223-IG	Inférieur	Grand
	100223-SM	Supérieur	Moyen
	100223-IM	Inférieur	Moyen
	100223-SP	Supérieur	Petit
	100223-IP	Inférieur	Petit
	100223-SA	Supérieur	Antérieur
	100223-IA	Inférieur	Antérieur

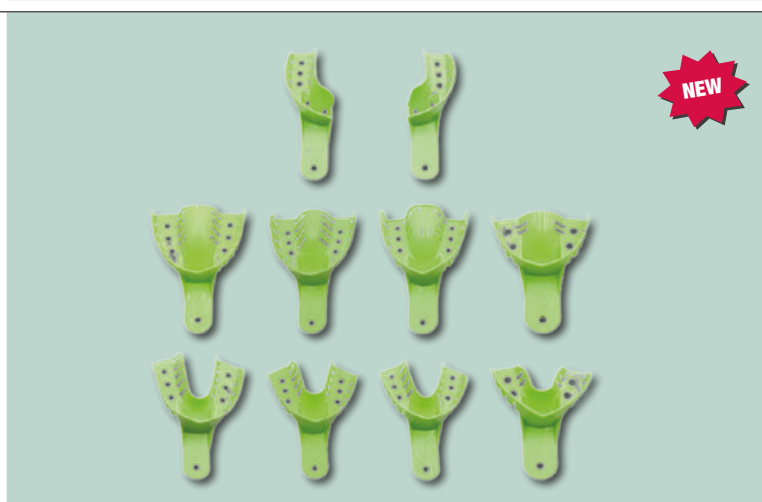

Porte-empreintes pour fluor (50 u. de chaque référence)

Réf. 100224

BLEU	100224-G	Double arcade	Grand
JAUNE	100224-M	Double arcade	Moyen
VERT	100224-P	Double arcade	Petit

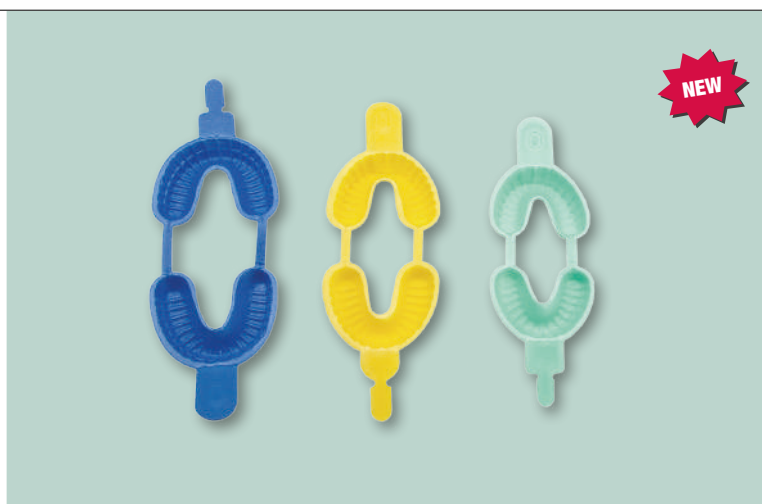

Boîtes de transport

Réf. 070605


Cordon pour boîtes.
Conditionnés en 5 couleurs
assorties (25 u.) - 1 mètre longue

Réf. 070600

(25 u.) (L) 300 x (W) 180 x (H) 160 mm
0,74 kg (25 u.)



Dimensions intérieures

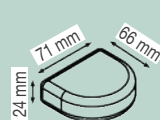

(25 u.) (L) 240 x (W) 160 x (H) 140 mm
0,54 kg (25 u.)




Boîtes pour prothèses

Fabriquées en plastique 25 u. assorties

Réf. 070600

Dimensions
intérieures

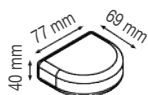


Boîtes pour appareils d'orthodontie

Fabriquées en plastique 25 u. assorties

Réf. 070590

Dimensions intérieures

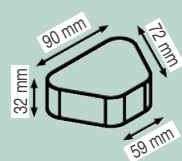


(100 u.) (L) 420 x (W) 380 x (H) 240 mm | 3,420 kg (100 u.)
(25 u.) (L) 300 x (W) 180 x (H) 160 mm | 0,742 kg (25 u.)



Réf. 070000-25 (25 u.)
Réf. 070001-25 (25 u.)

Dimensions intérieures

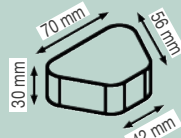

Réf. 070002-25 (25 u.) | Réf. 070006-25 (25 u.)
Réf. 070007-25 (25 u.) | Réf. 070008-25 (25 u.)
(100 u.) (L) 345 x (W) 305 x (H) 195 mm | 0,23 kg (100 u.)
(25 u.) (L) 240 x (W) 160 x (H) 140 mm | 0,23 kg (25 u.)



Boîtes pour prothèses

Fabriquées en plastique


Réf. 070000 Bleu (100 u.) | Réf. 070001 Rose (100 u.)

Boîtes pour appareils d'orthodontie


Fabriquées en plastique (100 u.)

Réf. 070002 Bleu | Réf. 070007 Vert claire | Réf. 070006 Vert | Réf. 070008 Orange

Dimensions intérieures

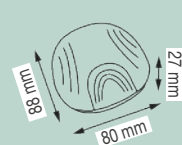

Dimensions intérieures

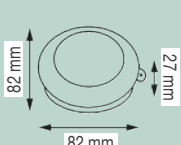

Boîtes pour appareils d'orthodontie

Fabriquées en plastique 5 u. assorties

Réf. 070622

NEW


Boîtes pour appareils d'orthodontie

Fabriquées en plastique 5 u. assorties

Réf. 070616

NEW

Dimensions intérieures

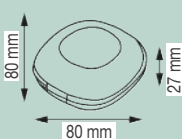

Boîtes pour appareils d'orthodontie

Fabriquées en plastique 5 u. assorties


Réf. 070618 Blanc | Réf. 070619 Bleu | Réf. 070620 Noire

NEW

Boîtes pour stocker les modèles

Réf. 070570 (100 u.)

(100 u.) (L) 555 x (W) 390 x (H) 335 mm | 12,330 kg (100 u.)

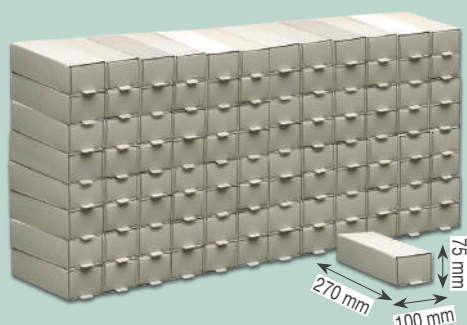

Boîtes pour modèles

Réf. 070003 6 modèles horizontaux | Réf. 070004 12 modèles verticaux

Réf. 070003 (L) 230 x (W) 240 x (H) 58 mm | 0,345 kg
Réf. 070004 (L) 290 x (W) 220 x (H) 75 mm | 0,425 kg

Boîtes de transport

Boîtes avec membrane

Fabriquée en plastique

Conçues spécialement pour le transport et la livraison d'éléments de qualité.

Sa transparence permet de voir le contenu sur tous les angles.

La partie intérieure est constituée d'une membrane très flexible qui donne l'impression que le contenu est suspendu en l'air.

Elles possèdent des fermetures de sécurité. Elles sont conditionnées par 10 unités.


Réf. 100262	(L) 55 x (W) 49 x (H) 25 mm	0,023 kg u.
10 u.	(L) 147 x (W) 56 x (H) 56 mm	0,261 kg
Réf. 100263	(L) 60 x (W) 100 x (H) 22 mm	0,045 kg u.
10 u.	(L) 125 x (W) 105 x (H) 135 mm	0,475 kg
Réf. 100264	(L) 100 x (W) 100 x (H) 45 mm	0,081 kg u.
10 u.	(L) 430 x (W) 110 x (H) 100 mm	0,911 kg



Boîtes avec membrane Fabriquée en plastique

La partie intérieure est constituée d'une membrane très flexible qui donne l'impression que le contenu est suspendu en l'air. Sa transparence permet de voir le contenu sur tous les angles. Elles sont conditionnées par 10 unités.

Réf. 100259	(L) 23 x (W) 23 x (H) 25 mm	0,026 kg u.
Réf. 100260	(L) 50 x (W) 50 x (H) 25 mm	0,023 kg u.
Réf. 100261	(L) 75 x (W) 75 x (H) 40 mm	0,045 kg u.

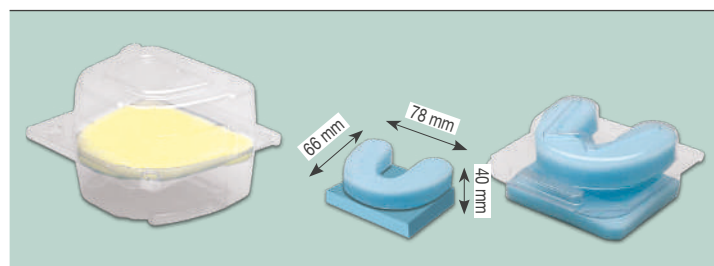

Boîtes pour modèles


Fabriquées en plastique

Petit modèle

Grand modèle

Réf. 070033 (50 u.)

Réf. 070034 (50 u.)

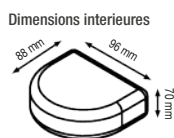

Réf. 070033	Packing (50 u.)	(L) 290 x (W) 225 x (H) 255 mm	1,121 kg
Réf. 070034	Packing (50 u.)	(L) 290 x (W) 225 x (H) 255 mm	0,930 kg



Boîtes prothèse (avec égouttoir) (4 u.)

Réf. 100267 Fabriquées en plastique

Réf. 100267	(L) 85 x (W) 76 x (H) 80 mm	0,082 kg
4 unidades	(L) 165 x (W) 165 x (H) 80 mm	0,389 kg

Boîtes de brackets


Réf. 100263B (conditionnées par 10 u.) Fabriquée en plastique

Réf. 100263 (10 u.) | (L) 60 x (W) 100 x (H) 22 mm | 0,045 kg u.



Boîtes de transport et de nettoyage

Réf. 100265	Fabriquées en plastique	(L) 115 x (W) 95 x (H) 46 mm	0,118 kg
		(L) 120 x (W) 100 x (H) 50 mm	0,143 kg

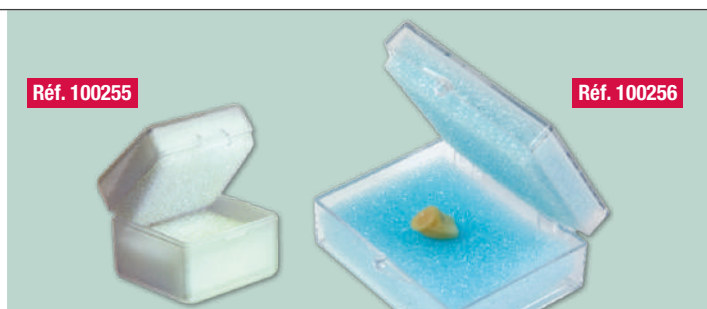


Boîtes de transport

Fabriquées en plastique

Réf. 100255	(L) 29 x (W) 29 x (H) 23 mm	0,005 kg u.
50 u.	(L) 178 x (W) 150 x (H) 44 mm	0,289 kg - 50 u.
Réf. 100256	(L) 56 x (W) 44 x (H) 23 mm	0,011 kg u.
24 u.	(L) 280 x (W) 235 x (H) 23 mm	0,318 kg - 25 u.



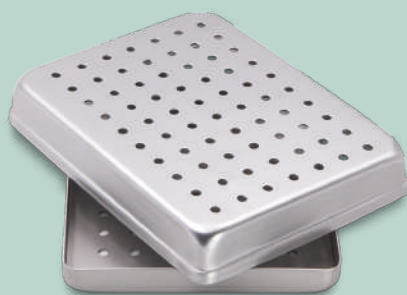

Réf. 070444 Petit	(L) 185 x (W) 145 x (H) 40 mm	0,241 kg
Réf. 070445 Grand	(L) 290 x (W) 190 x (H) 40 mm	0,400 kg


Plateau porte-instruments

Fabriqué en aluminium anodisé.

Réf. 070444 Petit **Réf. 070445** Grand

PETIT


Réf. 070430 Argent
Réf. 070431 Or
Réf. 070432 Rouge
Réf. 070433 Bleu
Réf. 070434 Vert

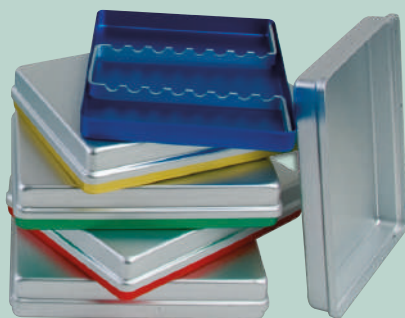

Réf. 070430-1-2-3-4 | (L) 185 x (W) 145 x (H) 40 mm | 0,250 kg

GRAND

Réf. 070439 Vert
Réf. 070440 Argent
Réf. 070441 Or
Réf. 070442 Rouge
Réf. 070443 Bleu

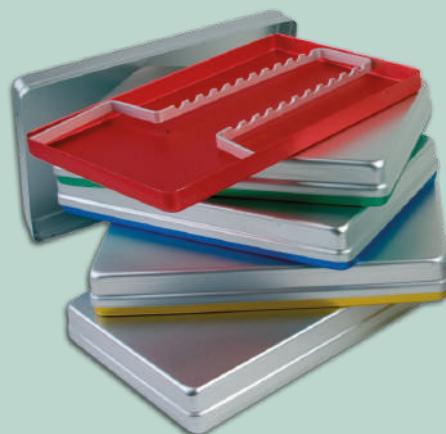

Réf. 070439-0-1-2-3 | (L) 290 x (W) 185 x (H) 40 mm | 0,414 kg

Plateau porte-instruments

Fabriqué en aluminium anodisé.



Boîte acier inox 18/8.
Plaque aluminium anodisé.

Réf. 070410 | (L) 210 x (W) 115 x (H) 45 mm | 1,127 kg



Réf. 070420 | (L) 85 mm | 0,017 kg

Boîte endodontie

Réf. 070410

Règle (pour calibrage des limes)

Réf. 070420

Four de glaçage pour la Zircon

Four de glaçage pour la Zircon

Réf. 100252

Lo que estabas esperando

QU'EST-CE QUE GLAZING AIR?

Le glaçage est l'étape de post-traitement des prothèses en zirconie. Il offre non seulement une esthétique de haute qualité en formant une couche brillante sur la prothèse, mais il stabilise également sa couleur et apporte un rendu en surface impeccable à la zirconie tout en lui conférant une meilleure résistance à l'abrasion et aux fractures.

Les prothèses en zirconie sont de plus en plus populaires, et de nombreux techniciens doivent acquérir un four à porcelaine spécialement conçu pour le glaçage.

GLAZING AIR est un four exclusivement dédié au glaçage de la zirconie, sans les fonctions de mise sous vide inutiles à ce procédé. C'est un produit abordable qui allie une technologie de contrôle de température rapide et précise, une taille compacte et un prix économique.

AVANTAGES

FOUR DE GLAÇAGE ADAPTE A LA ZIRCONIE



Il possède toutes les fonctions nécessaires pour le traitement spécifique de la zirconie après sinterisation.

GLAÇAGE RAPIDE



Atteint 1000 °C en moins de 10 minutes (5 minutes en moyenne) grâce à un élément chauffant en Kanthal® à excellente conductivité thermique.

CONTRÔLE PRÉCIS DE LA TEMPÉRATURE





Un contrôle précis de la température pour garantir des résultats parfaits pour toutes les marques de glasure.

CONFORT D'UTILISATION OPTIMAL



- Utilisation simultanée des claviers à membrane et tactile.
- Confort d'utilisation accru grâce à un socle auxiliaire intégré (pour la présentation du produit fini).

Puissance nominale	Máx. 1,3 kW
Alimentation	AC 220~240V 50/60Hz
Fuse	10 A
Température maximale	1000 °C

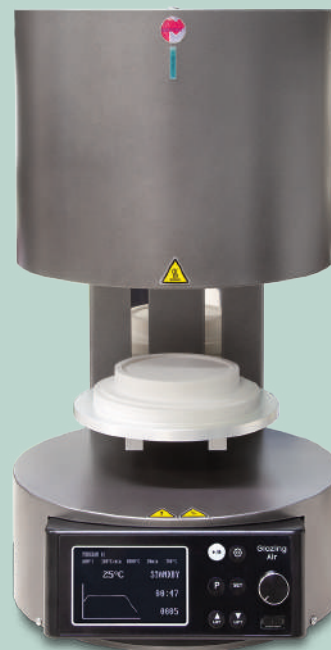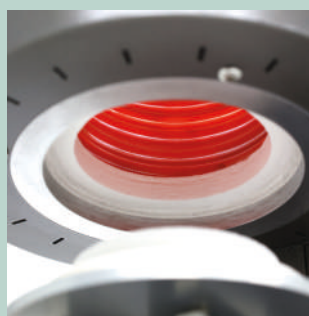

Autoclave 18-D, classe B 18 L

Réf. 100365




- ✓ Autoclave de table classe B.
- ✓ Composants internes de haute qualité (marques italiennes, japonaises et américaines).
 - Valves ODE.
 - Pompe à vide ULUAK.
 - Pompe à eau ULKA.
- ✓ Très silencieux (niveau sonore inférieur à 70 dB).
- ✓ Triple système de vide fractionné avec un générateur de vapeur qui garantit des cycles de stérilisation rapides et sûrs.
- ✓ Système de contrôle de haute précision pour des résultats de stérilisation toujours parfaits (EN13060).
- ✓ Auto diagnostic avec codes d'erreurs localisant l'origine de l'anomalie.
- ✓ Complètement automatique avec cycles de stérilisation pré-programmés.
- ✓ Chambre et porte en acier inoxydable avec des finitions en électro-polissage.
- ✓ Réservoir d'eau type "ouvert": nettoyage et remplissage faciles.
- ✓ Ecran LCD, qui fournit les informations sur le déroulement des cycles: Temps, température, pression, alerte du process.
- ✓ Plusieurs langues.
- ✓ Impression du rapport de stérilisation et display disponible en diverses langues.
- ✓ Clé USB et imprimante.
- ✓ Test: Test du vide, Test de Bowie & Dick, Test de Helix.
- ✓ Valve de sécurité de pression: empêche une surpression de la chambre et du générateur de vapeur.

Tension nominale	220-240 V 50/60 Hz.
Disjoncteur	F16 A / 400 V
Puissance nominale	1750 V
Temp. de stérilisation	121 / 134 °C
Capacité du réservoir d'eau distillée	2.5 litres
Temp. ambiante de travail (°C)	5-40
Humidité ambiante de travail	Max. 80 %, non condensée
Niveau sonore maximum	< 70 dB
Pression atmo. de travail (kPa)	76-106

(L) 690 x (W) 575 x (H) 525 mm | 51 kg

icanCLAVE

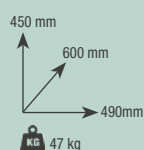

Dimensions de la chambre: 247 / 350 mm



Valve de sécurité.



Verrou de sécurité.



Filtre Bactériologique.

DIRECTIVES ET NORMES

- ✓ 97/23/EEC Directive des appareils à pression.
- ✓ Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux (MDR)
- ✓ EN 13060 Stérilisateurs à vapeur d'eau petit format.

- ✓ EN 61326, EN 61000 Compatibilité électro-magnétique.
- ✓ EN 61010-1, UL 61010-1 Normes de sécurité.
- ✓ EN 61010-2-040, IEC 61010-2-040 Normes spécifiques aux stérilisateurs de vapeur hors d'usage pour le traitement de matériel médical.

- ✓ EN 13485: 2012/AC: 2012
- ✓ ISO 13485: 2003

Service Technique Officiel ICANCLAVE en Espagne

Autoclave icanCLAVE 3F

Réf. 100367



icanCLAVE 3F est un autoclave super rapide, spécialement conçu pour la stérilisation des instruments non emballés, ce qui améliore considérablement le taux de rotation des instruments chirurgicaux et la commodité des petites opérations telles que la dentisterie.

- ✓ **Port imprimante:** il est utilisé pour connecter une imprimante externe qui imprime automatiquement le rapport de cycle.
- ✓ **Port USB:** il est utilisé pour connecter un disque USB, toutes les données de stérilisation sont automatiquement transférées sur le disque USB et peuvent être préparées directement sur n'importe quel PC et stockées électroniquement.
- ✓ **Mémoire interne:** les 9999 derniers cycles peuvent être automatiquement stockés dans le système de l'autoclave et peuvent être imprimés à tout moment.
- ✓ **Port pour l'imprimante d'étiquettes de codes-barres:** il est utilisé pour connecter une imprimante de codes-barres optionnelle qui imprime les étiquettes de codes-barres contenant les informations relatives au cycle de stérilisation.

CARACTÉRISTIQUES:

- ✓ **Cycles préprogrammés standard:** Quick S, Standard B, Soft B, Prion 134°C, Test B&D, Test Helix, Test de vide.
- ✓ **Autres cycles:** Détartrage (nettoyage du générateur de vapeur et du tube).
- ✓ Générateur de vapeur intégré d'une puissance nominale de 2000W.
- ✓ Raccordement aux réservoirs d'eau propre et d'eau usée et les réservoirs d'eau usée (non inclus).
- ✓ Système de porte manuel.
- ✓ Écran tactile couleur.
- ✓ Système d'avertissement
- ✓ Système d'identification de la pression atmosphérique.
- ✓ **Système de sécurité:**
 - Soupape de sécurité en cas de surpression.
 - Interrupteur de surchauffe.
 - Système de verrouillage de sécurité empêchant le verrouillage incorrect de la porte.
 - Disjoncteurs protégeant la machine en cas de court-circuit ou de surintensité.
 - Avertissement automatique en cas d'entretien.




Écran tactile.

Modèle	STE-3-F
Dimension de la chambre (mm)	192(W) x 45(H) x 285(D)
Volume de la chambre	Aprox. 3L
Nombre de plateaux	1
Matériau des plateaux	Aluminio
Taille des plateaux (LxH)	178 x 285mm
Tension, Freq.	220/110V, 50/60Hz
Puissance	2300 W

DIRECTIVES ET NORMES

- 93/42/CEE Directive sur les dispositifs médicaux.
- Directive sur les équipements sous pression 2014/68/EU.
- EN 13060 Petits stérilisateur à vapeur.
- EN 61326, EN 61000 Compatibilité électromagnétique.
- EN 61010-1, UL 61010-1 Conditions de sécurité.
- EN 61010-2-040, IEC 61010-2-040.
- Directive RoHS 2011/65/EU.

icanCLAVE

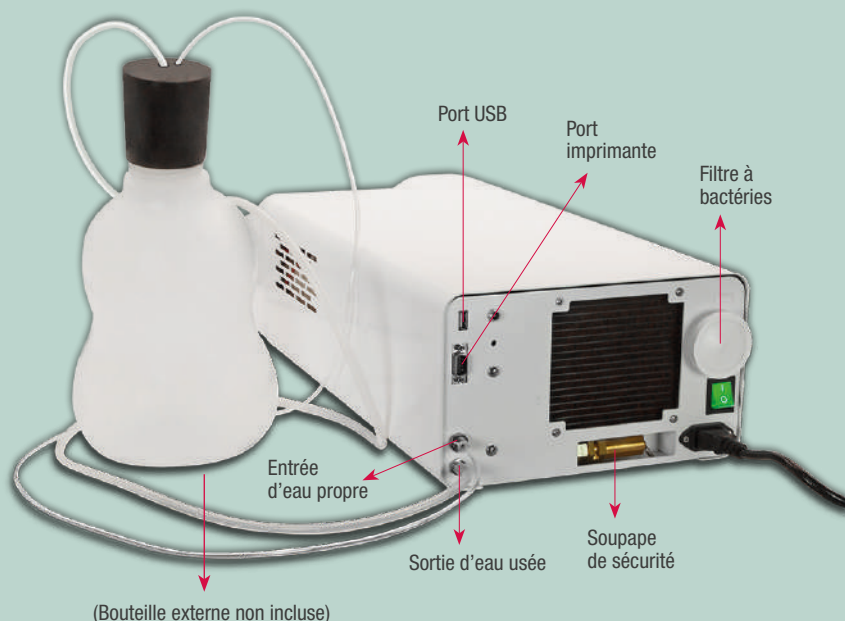

Valise de transport.



Nettoyage et désinfection



Granulation d'oxyde	50/100 micras
Pression	4 a 5,5 kgf/cm ²

(L) 195 x (W) 110 x (H) 45 mm | 0,27 kg

Incluido
CONNEXION
MIDWEST

Minimodules de sablage (Laboratoire)

Réf. 100122

Très utiles pour le nettoyage et la création de rétentions sur les couronnes, le sablage des faces occlusales, l'ajustage des contacts interproximaux et une infinité d'opérations de sablage de précision. **Ce modèle est destiné à un usage en laboratoire dentaire; il ne peut pas être utilisé pour des applications intra-oraux.**

Réservoir d'eau distillée

Réf. 080620

Réservoir spécialement conçu pour le stockage et la distribution d'eau distillée sous pression dans le secteur dentaire. Il est en acier inoxydable, avec régulateur de pression et double soupape de sécurité. Avant de remplir le réservoir, il doit être correctement nettoyé et stérilisé. N'utilisez pas de détergents à base d'acide chlorhydrique ou similaire.

- ✓ Pression de service: 5 bars
- ✓ Raccordement: tube Ø 6 mm.
- ✓ Fabriquée en acier inoxydable.
- ✓ Pourvue d'un régulateur de pression et d'une double valve de sécurité.

Inox



680 mm
Ø 255 mm
255 mm
2,4 kg

Incubateurs biologiques de spores

Incubateurs de spores simples et faciles à utiliser. Indispensables pour réaliser les tests nécessaires pour le bon fonctionnement des appareils à stériliser. Il existe deux modèles: Élite, avec écran digital et température réglable. Practic, économique et fonctionnel. Les deux modèles sont pourvus de quatre chambres pour pouvoir réaliser en même temps divers contrôles.

Le modèle Élite est équipé d'un écran qui indique la température et le temps qu'il reste pour arriver à la fin du programme. Son contrôle électronique indique également les éventuelles anomalies comme les coupures de courant qui pourraient fausser les résultats.

Les deux appareils réalisent le test à 57,5 °C. Le modèle Elite permet aussi un programme à 35 °C en fonction du type de spores utilisée.

35 °C +/- 2,5 °C pour les Bacillus Subtilis.
57,5 °C +/- 2,5 °C pour les Geobacillus stearothermophilus.

Référence	Élite Réf. 100370	Practic Réf. 100375
Tension	230 V 50/60 Hz	90-250 V 50/60 Hz
Puissance	25 W	10 W
Température d'utilisation	57,5 +/- 2,5°C e 35 +/- 2,5°C	57,5°C
Hauteur	80 mm	90 mm
Largeur	105 mm	75 mm
Profondeur	165 mm	75 mm
Poids	0,750 kg	0,239 kg

Réf. 100370	(L) 210 x (W) 260 x (H) 175 mm	1,1 kg
Réf. 100375	(L) 103 x (W) 110 x (H) 95 mm	0,3 kg



Réf. 100370

Réf. 100375

Distillateur-décalcifiant

Réf. 100210

Il suffit de remplir avec de l'eau du robinet pour obtenir 4 litres d'eau distillée dans un temps approximatif de 5 heures. L'eau ainsi distillée est d'une grande pureté. (entre 2 y 10 mg/ litre de résidu liquide) et peut être employée dans une multitude d'applications tant en cabinet dentaire qu'en laboratoire de prothèses (autoclaves, eau de mélange pour revêtements et plâtres, pour générateurs de vapeur etc.).

L'appareil est fourni avec un récipient de 4 litres; un jeu de filtres à charbon actif et un pot d'acide citrique pour la propreté du récipient.

IMPORTANT: L'eau produite correspond à type "DISTILLÉE". Cependant elle ne doit pas servir en injection, nettoyage de blessures ni même en général pour toutes sortes d'application de type chirurgical nécessitant une pureté de type tri-distillée.

Réf. 100210-01

Recharge nettoyant distillateur (500 g.)

Réf. 100210-02

Filtres de rechange (6 u.)



Dimensions	280 x 250 x 365 mm
Poids	3,5 kg
Tension	230 V 50/60 Hz
Puissance	580 W
Capacité	4 l.

(L) 285 x (W) 285 x (H) 400 mm | 5 kg



Nettoyage et désinfection

Nettoyeur à ultrasons DA10

Réf. 100750

ÉLECTRONIQUE HAUTE PERFORMANCE


- ✓ Équipé d'un chipset de pointe et d'algorithmes avancés.
- ✓ Distingue automatiquement la dent de la gencive.
- ✓ Assure un nettoyage confortable et sûr.

PIÈCE À MAIN DE HAUTE QUALITÉ AVEC ÉCLAIRAGE

- ✓ La conception amovible permet une stérilisation à haute température et à haute pression.
- ✓ Lumière teintée pour une meilleure visibilité pendant le traitement.

RETOUR INTELLIGENT SUR LE NIVEAU DE PUISSANCE

- ✓ Ajuste automatiquement la puissance en fonction de la dureté de la pierre.
- ✓ Efficacité accrue du nettoyage.

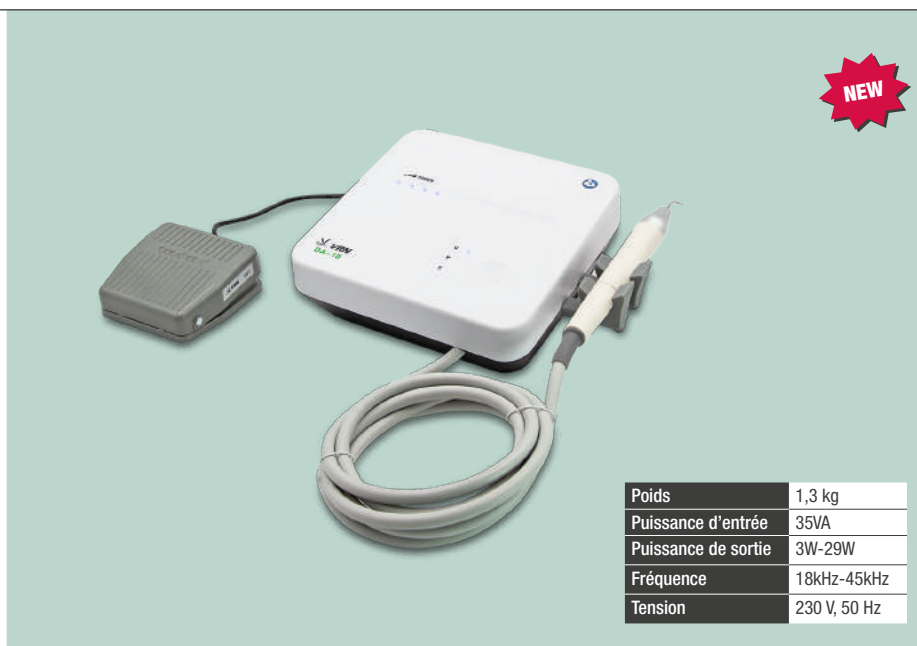

Nettoyeur à ultrasons Q5


Réf. 100755

- ✓ Réglage de la puissance (100-800 Mn).
- ✓ **3 modes de fonctionnement:** Nettoyage général, Traitement parodontal, Traitement endodontique.
- ✓ Alimentation automatique en eau à partir d'une bouteille intégrée à l'appareil.
- ✓ **Panneau de commande étanche.**
- ✓ **Réservoir d'eau de grande capacité (800 ml)**
- ✓ **Comprend une pédale sans fil IPX4:** élimine les fils emmêlés.

TECHNOLOGIE SINUSOIDAL WAVE

Évite l'impact instantané de l'onde carrée traditionnelle, offrant une amplitude stable et des vibrations régulières et puissantes. Efficacité et confort pour un nettoyage des dents sans douleur.

TECHNOLOGIE SANS DOULEUR
Minimise la sensibilité du patient.

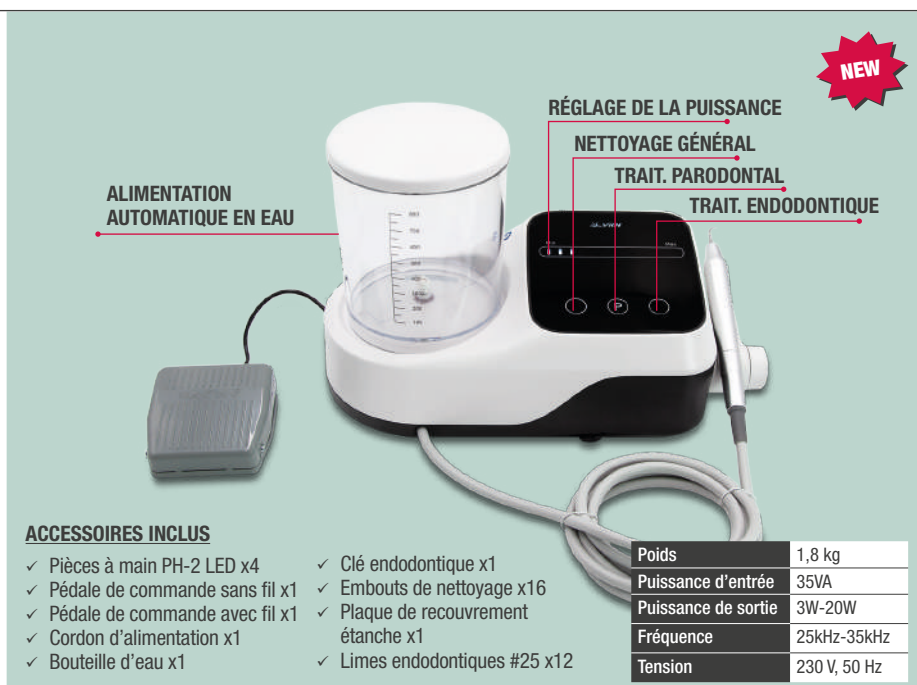

Nettoyeur à ultrasons Q6

Réf. 100760

6 fonctions en 1 seul appareil:

- ✓ Nettoyage par ultrasons.
- ✓ Thérapie parodontale.
- ✓ Irrigation du canal radiculaire.
- ✓ Aéro-polissage supragingival.
- ✓ Polissage à l'air sous-gingival.
- ✓ Entretien des implants.


ÉCRAN TACTILE:

Interface claire avec capteurs ultrasensibles, conception résistante à la poussière et à l'eau. Fonctionne même sur avec des gants, des gouttes d'eau ou des protections.

RÉSERVOIR D'EAU DOUBLE:

Un simple clic permet de passer rapidement d'un réservoir à l'autre pour utiliser de l'eau pure ou des solutions médicamenteuses.

TECHNOLOGIE SANS DOULEUR
Minimise la sensibilité du patient.

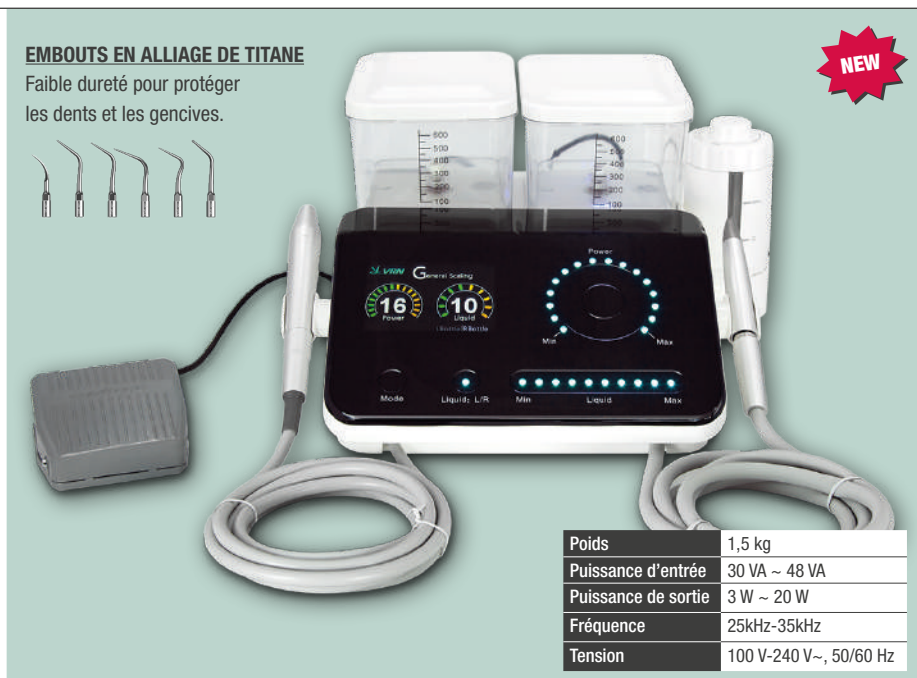

Lampe à polymériser de base V200

Réf. 100700


Le canon à fibre optique robuste dirige efficacement la lumière pour obtenir une **polymérisation homogène des composites**.

Son excellent rapport qualité-prix en fait un choix idéal pour les nouvelles cliniques, ou comme deuxième unité indispensable, offrant une tranquillité d'esprit en cas d'événements imprévus.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Intensité lumineuse constante.
- ✓ Jusqu'à 600 polymérisations avec une seule recharge.
- ✓ Conception confortable et ergonomique. Facile à utiliser.
- ✓ Arrêt automatique en cas de non-utilisation.
- ✓ Rayonnement: entre 1600~2000 W/cm²
- ✓ Limite d'émission 3,9 X 10J
- ✓ Longueur d'onde polimerizadora: 420~480nm.

Dimensions	243 mm x Ø25 mm
Poids	390 g
Capacité	2200mAh
Tension	3.7V
Batterie	Rechargeable

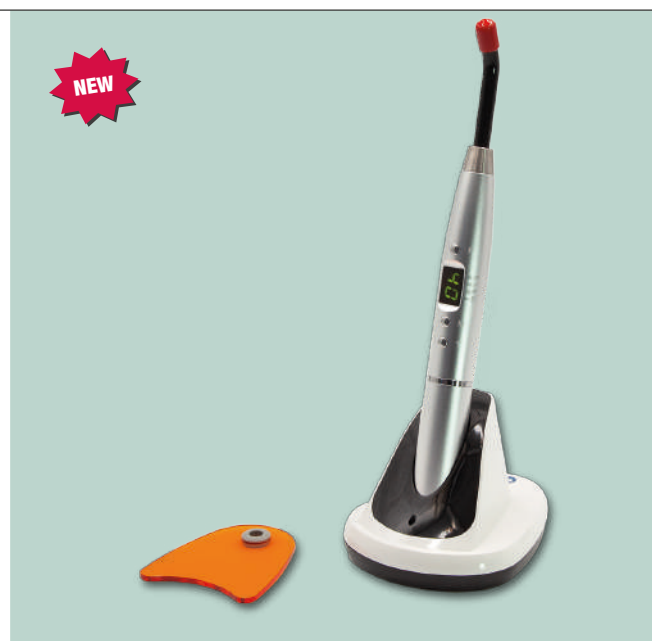

Lampe à polymériser de milieu de gamme DV 50


Réf. 100705

Conçu pour optimiser chaque étape de la polymérisation des composites.

La principale innovation du DV50 réside dans le placement direct de l'émetteur LED. Il en résulte une densité de puissance nettement plus élevée, atteignant jusqu'à 2600 mW/cm². Le durcissement est donc très rapide, ce qui minimise le temps d'exposition.

Ergonomique et pratique. Sa forme droite et profilée permet d'accéder sans effort aux zones postérieures de l'arcade, telles que les molaires et les troisièmes molaires, éliminant ainsi l'inconfort associé à d'autres lampes.

Dimensions	217 mm x Ø 22,5 mm
Poids	117 g
Intensité maximale	2600mW/cm ²
Longueur d'onde	385 nm-515 nm
Batterie	Rechargeable 2200mAh
LED	Émetteur 10 W
Adaptateur électrique	≈ 100-240 V 50/60 Hz.
Fonction de mesure de l'intensité lumineuse	

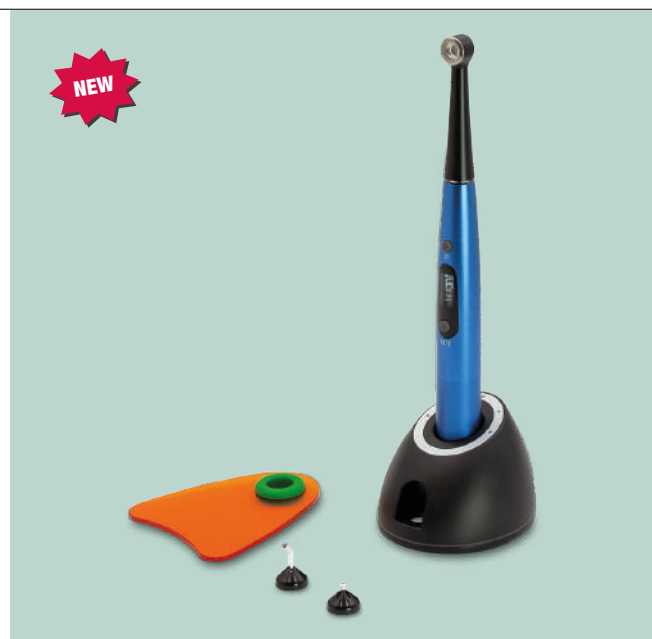

Lampe à polymériser haut de gamme VAFU

Réf. 100710

Un appareil dans la gamme haut de gamme de la polymérisation dentaire. Sa puissance lumineuse atteint 3200 mW/cm², ce qui permet une polymérisation ultra-rapide en seulement 1 ou 2 secondes, réduisant considérablement le temps de présence de la lampe en bouche et optimisant le confort du patient.

Tête multi-LED avancée, composée de quatre LED indépendantes. Chacune émet à une fréquence différente, ce qui permet d'obtenir un spectre lumineux exceptionnellement large (385 nm à 515 nm). Cela garantit une polymérisation efficace en un temps record de pratiquement tous les matériaux dentaires disponibles sur le marché.

Dimensions	33 x 27 x 206 mm
Puissance	3200 mW/cm ²
Longueur d'onde	385nm-515nm
Batterie	Rechargeable 2200 mAh.
Adaptateur électrique	≈ 100-240 V 50/60 Hz.
Fonction de mesure de l'intensité lumineuse	



COMPRED:

- ✓ 1 unité principale.
- ✓ 1 chargeur.
- ✓ 1 batterie.
- ✓ 1 jeu de lentilles (4 pièces)
- ✓ 1 bouclier de protection contre la lumière.
- ✓ 1 tête de détecteur de cavité.
- ✓ Lunettes de protection.


Nettoyage et désinfection

Thermo-soudeuse automatique

Réf. 080435

- ✓ Ecran tactile de 7 pouces avec informations.
- ✓ Système thermique rapide pour un scellement parfait.
- ✓ La température de la soudure peut être réglée par l'utilisateur.
- ✓ L'imprimante intégrée permet d'éditer sur le sachet scellé les informations nécessaires pour une bonne traçabilité aussi bien au cabinet qu'au laboratoire.
- ✓ Conforme aux normes ISO11607-2: 2006 et EN868-5-2009

Start Date: 20200512 Exp. Date: 20200611 Batch No.: 00000000 Operator: Higienista Department: Seccion esteril Note: Prog. envuelto ID: D119C032

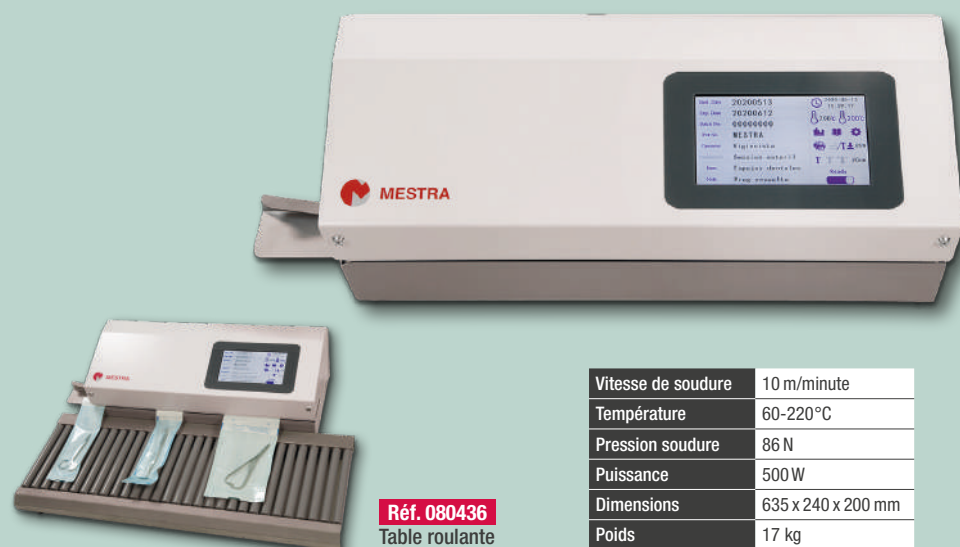

Vitesse de soudure	10 m/minute
Température	60-220°C
Pression soudure	86 N
Puissance	500 W
Dimensions	635 x 240 x 200 mm
Poids	17 kg

Réf. 080436
Table roulante
optionnelle



NEW

Barrier film

Réf. 080439

Ce film adhésif offre une solution pratique et efficace pour les environnements dentaires, en fournissant une couche de protection pour les instruments et les matériaux.

Chaque rouleau contient 1200 adhésifs prédécoupés de 10 x 15 cm. Couleur bleue.

Thermo-soudeuse de sacs


Réf. 080433

Appareil simple et d'un design agréable.

Malgré ses dimensions réduites, sa longueur maximale de soudage est de 305 mm et la largeur de soudage de 12 mm, ce qui en fait une thermo-soudeuse aux prestations similaires à des modèles beaucoup plus coûteuses. Idéale pour le cabinet dentaire.

Hauteur	210 mm
Largeur	430 mm
Profondeur	335 mm
Poids	6.5 kg
Tension	230 V 50/60 Hz
Puissance	100 W

(L) 500 x (W) 415 x (H) 245 mm | 8,7 kg

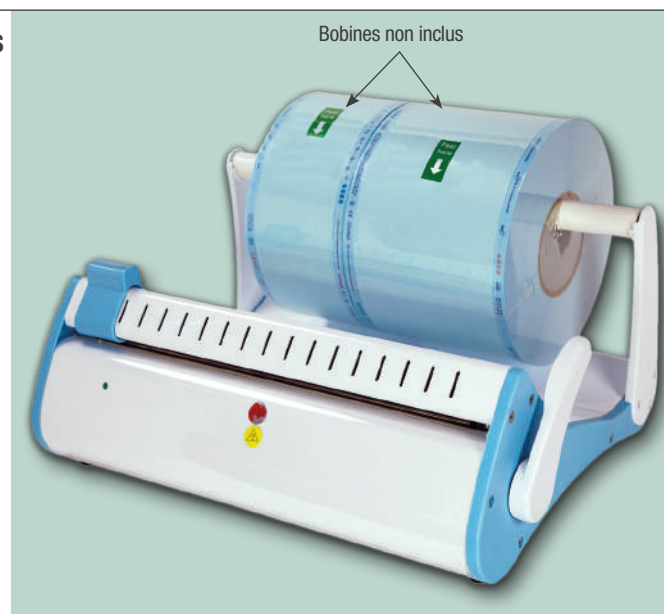

Bobines pour thermo-soudeuse

Réf. 080441	5 cm x 200 m
Réf. 080442	7.5 cm x 200 m
Réf. 080443	10 cm x 200 m
Réf. 080444	15 cm x 200 m

Réf. 080445	20 cm x 200 m
Réf. 080446	25 cm x 200 m
Réf. 080447	30 cm x 200 m

Dispositif médical de Classe I (MDR 2017/745)
Conforme aux normes ISO 11607-1:2017 et EN 868-5:2009

Nouveaux sachets 5x9 cm, 200 unités par colis
LES PLUS PETITS DU MARCHÉ!

NEW



Sachets de stérilisation autocollants

Réf. 080448	5 x 24 cm
Réf. 080449	7 x 26 cm
Réf. 080450	9 x 26 cm
Réf. 080451	5 x 9 cm
Réf. 080452	14 x 28 cm

Réf. 080454	19 x 36 cm
Réf. 080456	25 x 40 cm
Réf. 080457	30 x 40 cm
Réf. 080458	30 x 45 cm
Réf. 080459	5.7 x 13 cm

Dispositif médical de Classe I (MDR 2017/745)
Conforme aux normes ISO 11607-1:2017 et EN 868-5:2009

Nettoyage et désinfection




Nettoyant ultrasons pour éléments dentaires

Réf. 100162



Appareil de nettoyage à ultrasons pour éléments dentaires, équipé d'une lampe UV pour la désinfection des objets pendant leur nettoyage. La puissance de 28 W assure d'excellents résultats. Ses dimensions réduites rendent facile son transport et son rangement. Il dispose d'une minuterie à affichage numérique.

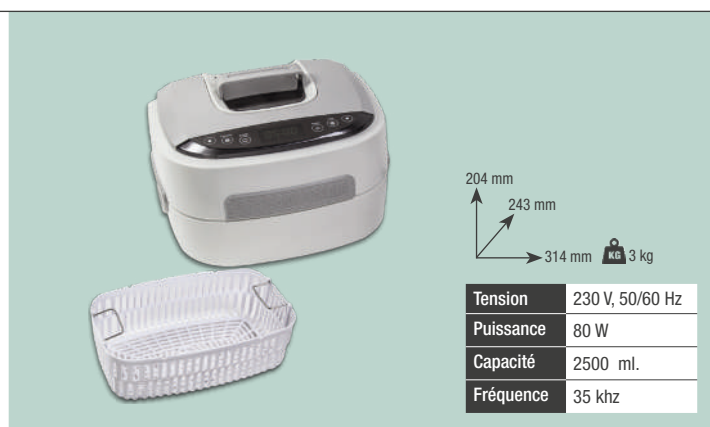


Bac à ultrasons, 2,5 l.

Réf. 100140

Très pratique pour le nettoyage de petites pièces au laboratoire ou au cabinet dentaire. Cuve de 2,5 l de capacité. Il est équipé d'un système de chauffe et d'une minuterie électronique. L'appareil est livré avec un couvercle protecteur en plastique.

(L) 360 x (W) 275 x (H) 240 mm | 3,5 kg

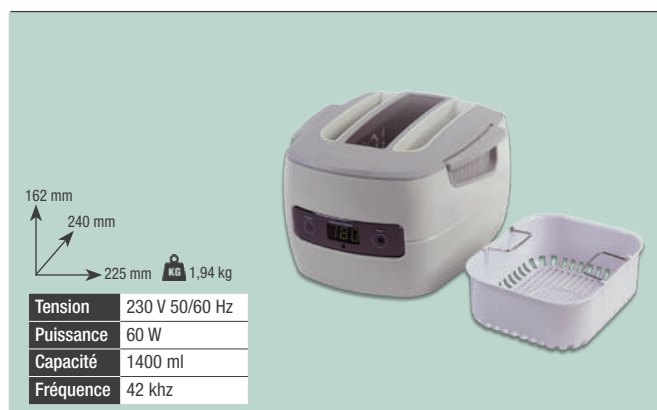

Bac à ultrasons 1,4 l.

Réf. 100141

Outil indispensable aussi bien dans le laboratoire que dans le cabinet dentaire. Les 60 W de puissance réelle restituée garantissent une excellente capacité de nettoyage. Il dispose d'une minuterie électrique de 7 segments.

(L) 430 x (W) 270 x (H) 270 mm | 2,5 kg



Bac à ultrasons (mini)

Réf. 100144



Bac à ultrasons

Réf. 100160 **Réf. 100160-10** (10 u.)

Pour le nettoyage des prothèses dentaires.



Bac à ultrasons, 3 l.

Réf. 100142

Pour le nettoyage de petits objets dans les laboratoires et les cabinets dentaires. Avec câble détachable, robinet de vidange et tuyau. Comprend un panier de protection en plastique et un tuyau de vidange.



Réf. 080422-26

En option panier long non inclus.

Bac à ultrasons Calypso 4l.

Réf. 080422

Le modèle Calypso est un bac à ultrasons de dernière génération, équipé des dernières nouveautés technologiques, transducteurs de type sandwich, à puissance réelle transmise à la cuve de 100 W, fréquence de fonctionnement de 40 KHz, ce qui suppose un compromis optimal entre le bruit et la puissance de nettoyage, contrôle électronique du temps géré par un microprocesseur avec affichage digital et signaux acoustiques, système de chauffe automatique du liquide de nettoyage, carcasse fabriquée en polyuréthane de haute densité, matériau résistant aux agents chimiques. Capacité de la cuve de 4 litres, vidange etc. A toutes ces caractéristiques s'ajoute une ligne attractive au design soigné.

Le bac à ultrasons est livré avec les accessoires suivants:

- ✓ Un panier en acier inoxydable pour le nettoyage des instruments.
- ✓ Un couvercle qui atténue le bruit durant le fonctionnement et qui évite aux impuretés extérieures de salir le bain.
- ✓ Un récipient en verre et son support pour la propreté des petites pièces.
- ✓ Une pince à nettoyer les fraises modèle (Réf. 070520)

Hauteur	220 mm
Largeur	425 mm
Profondeur	270 mm
Poids	4,5 kg
Capacité de la cuve	4 l
Alimentation	230 V - 50/60 Hz
Puissance transducteurs	100 W
Fréquence	40 khz

(L) 420 x (W) 360 x (H) 300 mm | 9 kg



Réf. 100152 - 5,8 L

Mesures intérieures:
Hauteur 155 mm
Largeur 298 mm
Profondeur 152 mm

Réf. 100151 - 3,4 L

Mesures intérieures:
Hauteur 100 mm
Largeur 298 mm
Profondeur 152 mm

Réf. 100150 - 2,8 L

Mesures intérieures:
Hauteur 100 mm
Largeur 238 mm
Profondeur 140 mm

Bac à ultrasons: 5,8l - 3,4l - 2,8l

Fabriqués en acier inoxydable: grande résistance à l'usure et longue durée de vie. Contrôle numérique facile à utiliser. Robinet de vidange sur le côté. Temps de travail: de 1 à 99 min. Température de 1 à 80 °C. Convient pour le nettoyage des modèles et les réalisations en résine sur les imprimantes 3D.



Référence	R-100152	R-100151	R-100150
Hauteur	290 mm	290 mm	245 mm
Largeur	365 mm	365 mm	300 mm
Profondeur	180 mm	165 mm	165 mm
Poids	5,400 kg	5,2 kg	3,980 kg
Cap. cuve	5,8 L	3,4 l	2,8 L
Tension	230 V 50/60 Hz	220-240 V, 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz
Puissance Ultr.	180 W	180 W	120 W
Puiss. Chauffe	200 W	200 W	100 W
Fréquence	40 Khz	40 kHz	40 Khz

Système d'aspiration extra-oral

Réf. 100347

Positionnez l'embout buccal à côté de la bouche du patient et évitez la propagation de tous types d'aérosols, de particules en suspension, de vapeurs et d'odeurs dans le cabinet dentaire. Réduisez considérablement le risque de contamination croisée entre les professionnels et les patients et protégez la santé respiratoire.

- ✓ Deux niveaux de puissance.
- ✓ 2 cartouches filtrantes constituées de:
 - Filtre grossier pour petites particules.
 - Filtre à charbon actif.
 - Filtre HEPA H13.
- ✓ Lumière UV.
- ✓ Générateur de plasma.
- ✓ Forme ergonomique et facile à déplacer pour avoir une bonne position de travail.
- ✓ Bras d'aspiration semi-rigide, autoportant et facile à nettoyer.
- ✓ Carcasse facile à nettoyer.
- ✓ Compteur d'heures d'utilisation.

Tension	220 V, 50 Hz
Puissance	1000 W.
2 niveaux de puissance	(50-100 %)
Bruit	60 dB.
Flux	4000 L/min.
Vide maximal	-25 kPa.
Lampe UV	254 nm
Générateur plasma	5000 V
Grade HEPA	H13 (0.3 µm, > 99.97 %).
Longueur du bras	1.3 m.



Alimentation	230 V / 50 Hz
Puissance	1.000 W
Réservoir d'eau	5 l.
Débit du Spray	470 ml/min.
Dim. des gouttelettes	Ajustable: 100 - 150 µm
Projection	Ajustable: 3-8 m.



Pulvérisateur-nébuliseur

Réf. 100520

Pulvérisateur-Nébuliseur de haut rendement, il permet d'atomiser des solutions désinfectantes en créant un nuage aseptique qui pénètre dans tous les coins.

- ✓ La dimension des particules en suspension et la distance du jet sont réglables.
- ✓ En utilisant les produits appropriés on peut obtenir une désinfection rapide et efficace dans des grandes surfaces (jusqu'à 100m² en 10 minutes seulement)

- ✓ Son réservoir de 5 l. permet de traiter une très grande surface.
- ✓ Son poids réduit (3 kg environ) et la sangle bandoulière fournie permet une utilisation aisée, efficace et sûre.
- ✓ Idéal pour le traitement de surfaces petites à moyennes.



Unité dentaire portable

Réf. 100650

Conçue pour transporter la capacité opérationnelle d'un cabinet dentaire complet à tout emplacement ou situation complexe.

Son design compact et hautement intégré, contient tous les éléments essentiels dans la pratique dentaire.

Tension	220V - 240V AC / 50 Hz
Puissance Nominale	600 W
Débit d'Air de Sortie	118 L/min à 0 bar
Pression de la pièce à main	0,2 - 0,25 MPa (2,0 - 2,5 bar)
Pression Aspiration	0,06 - 0,1 MPa (0,6 - 1,0 bar)
Sonorité	40 - 45 dB

Nettoyage et désinfection

Purificateurs d'air

Gamme de purificateurs d'air de trois tailles différentes. Ils agissent sur l'air vicié dans n'importe quelle pièce éliminant la poussière, la saleté et les germes. Après traitement, l'air est beaucoup plus propre et plus respirable.

Le processus de purification commence par une batterie de filtres de trois niveaux différents: HEPA bactérien, charbon actif et photocatalytique. Ensuite, une lampe UV haute performance complète le travail de nettoyage.

*La purification est complétée par l'ionisation et la possibilité d'activer un générateur d'ozone.

Référence	100510	100512	100514
Puissance	36 W	45 W	72 W
Niveau sonore	≤40 dB(A)	≤45 dB(A)	≤45 dB(A)
Volume purifié	150 m³/h	280 m³/h	560 m³/h
Surface à purifier recommandée	25 m²	30-35 m²	60-70 m²
Filtrage à 3 niveaux (HEPA, charbon actif, catalytique)	Oui	Oui	Oui
Nettoyage UV + Ionisation	Oui	Oui	Oui
Fréquence des lampes UV	254 nm	254 nm	254 nm
Générateur d'ozone	Oui	Oui	—
Télécommande	Oui	Oui	Oui
Indicateurs de: Température / Humidité / Qualité de l'air / Changement de filtres	No	Oui	Oui

Purificateur 25 m²

Réf. 100510



303 mm
170 mm
329 mm
KG 4 kg

Purificateur 30-35 m²

Réf. 100512



536 mm
206 mm
360 mm
KG 6,3 kg

Purificateur 60-70 m²

Réf. 100514



570 mm
265 mm
370 mm
KG 8,5 kg



Réf. 100500

Idéal pour les petits objets: téléphones portables, porte-clés, bijoux, pièces de monnaie, etc. Fortement recommandé pour un usage personnel. Avec fonction de séchage.

120 x 296 x 195 mm | 1 kg



Réf. 100502

De taille moyenne. Sa chambre permet de traiter les même type d'articles que le modèle antérieur, mais en plus grande quantité, ou bien des objets plus grands. Idéal pour cabinets et laboratoires.

300 x 290 x 200 mm | 4,5 kg

Cabines de désinfection UV

Référence	100500	100502
Tensión	110~240 V, 50 Hz	220 V, 50 Hz
Puissance	150 W	4 W
Minuteur	10 min.	0-60 min/continuo



Cabine de stockage hygiénique Réf. 100505

Protection continue pour l'instrumentation et le matériel de travail au cabinet dentaire et en laboratoire.

- ✓ Technologie de lumière ultraviolette (UV).
- ✓ Technologie double (UV + CHALEUR).
- ✓ Contrôle automatisé des cycles.
- ✓ Fonction de séchage intégrée.
- ✓ Conception professionnelle.

Volume intérieur	38 L
Matériau de la cuve	Acier inoxydable
Puissance électrique	460 W
Alimentation	230 V, 50 Hz



Prime 221 - connexion intramatique

Réf. 100237

Dimension	90 x 191 x 130 mm	Puissance	120 W
Poids	2,8 kg	Pièce à main	0~36 V
Vitesse maximale	50000 rpm	Poids pièce à main	205 g
Torque	5.8 N-cm		



Sense A3 - connexion intramatique

Réf. 100239

Dimension	88 x 147 x 120 mm	Puissance	70 W
Poids	1,15 kg	Pièce à main	0~33 V
Vitesse maximale	35000 rpm	Poids pièce à main	215 g
Torque	3.0 N-cm		

Sirocco S

Réf. 080534



Aspiration induction "S" + tube LED

Réf. 080534AT



Sirocco modèle S, avec un tube flexible extensible jusqu'à 70 cm et utilisé pour diriger l'aspiration vers la zone de travail. Grâce à sa lumière LED, il permet de petites et délicates opérations de polissage et de finition.

- ✓ La bouche d'aspiration est facilement orientable.
- ✓ Eclairage LED intégré.

Tube 700 mm • Ø 45 mm • Poids 3.8 kg

Aspiration par induction "S" + boîte de revue de laboratoire

Réf. 080534AL



Sirocco S et box de retouches pour laboratoires dentaires. Entièrement compatible avec l'unité d'aspiration de table, avec laquelle il forme un ensemble très compact et équilibré.

- ✓ Design large et robuste parfait pour le laboratoire.
- ✓ Eclairage LED intégré.
- ✓ Accoudoirs confortables et pratiques.

Hauteur 365 mm • Largeur 345 mm
Profondeur 400 mm • Poids 5.5 kg

Mélangeur alginate

Réf. 080515

Outil pratique pour l'élaboration de pâte alginate dans les cliniques dentaires. Son fonctionnement est simple. Il suffit de mettre la poudre et l'eau dans un bol et d'appuyer sur le bouton correspondant à la vitesse de rotation (rapide/ lente). Durant le mélange l'utilisateur peut pétrir avec une spatule jusqu'à obtention de la consistance et de la texture voulues.

Le processus peut être contrôlé à tout moment par le technicien; ce qui garantit un mélange optimal pour son application. Pour faciliter le nettoyage le bol est démontable.

A noter également ses dimensions réduites, sa ligne attractive et son nettoyage aisé.

Dimensions	
250 x 175 x 230 mm (con taza)	
Poids	3 kg
Puissance	60 W

Réf. 080515-02	
Bol	750 cc
Diamètre	130 mm
Hauteur	110 mm
Poids	0.2 kg



Réf. 080515-02

CE Dispositif médical MDR 2017/745

(L) 300 x (W) 310 x (H) 195 mm | 3.9 kg

Mélangeur automatique d'alginate

Réf. 100191

Il suffit de remplir le bol avec de l'alginate, l'introduire dans la machine, appuyer sur le bouton et en quelques secondes on obtient un mélange parfaitement homogène, prêt à être utilisé. Ce malaxeur est silencieux de dimensions réduites.

Il est fonctionnel, économique et fiable. Il est fourni avec un jeu de bols, une spatule en plastique et un doseur d'eau très pratique. Il peut également être utilisé comme malaxeur à plâtre avec des résultats optimaux.

La machine est livrée avec 4 récipients, un doseur, un mélangeur, une spatule et un support.



MELANGE MAXIMUM

80 grs. eau + alginate

Dimensions	265 x 205 x 305 mm
Poids	17 kg
Tension	230 V 50/60 Hz
Consommation	350 W

(L) 300 x (W) 420 x (H) 430 mm | 18,5 kg

Mélangeur de silicones

Réf. 100360

Mélangeur de silicones à empreintes, simple, rapide fiable et sûr. Ses dimensions réduites permettent facilement de lui trouver sa place.

L'opération de pose et dépôt de la cartouche se fait en à peine quelques secondes. Il dispose de 3 vitesses d'injection adaptées au besoin de l'opérateur. Sa solidité à toute épreuve et la puissance de ses moteurs permettent d'obtenir un mélange fluide d'une viscosité optimale, exempt de bulles et ce sans effort.

Tout cela aboutit à une économie de temps et à une augmentation de la qualité des empreintes.

Compatible avec la quasi totalité des cartouches du type 380 ml. présentes sur le marché. Convient à 99% de silicones

Temp. Ambiente	5-40°C
Alimentation	240 V 50 Hz
Puissance	150 W
Poussée	450 kg +/-10



Réservoir étanche pour l'alginate

Réf. 100189




Dimensions	220 x 150 x 190 mm
Poids	0,467 kg
Capacité	1 kg

(L) 220 x (W) 155 x (H) 200 mm | 0,62 kg



290 mm
170 mm
250+150 mm | 7,1 kg

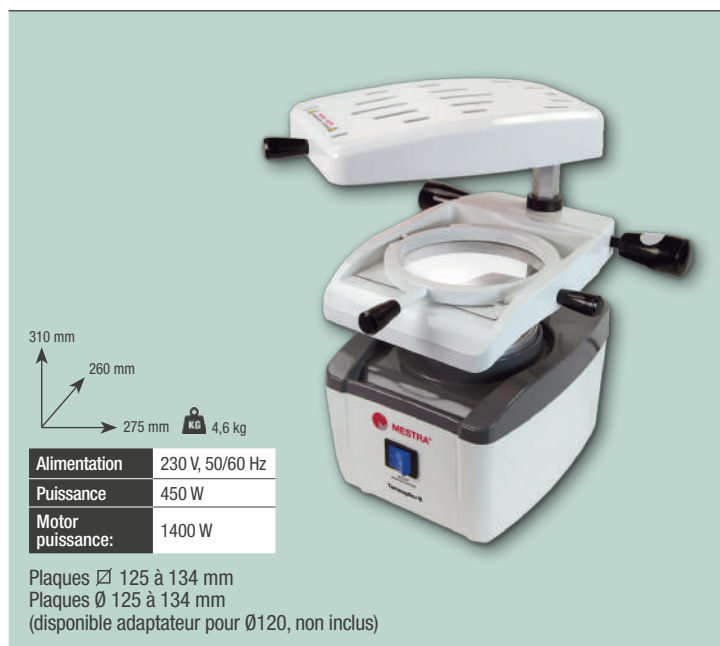

Machine pour thermoformage

Réf. 080542

Simple, pratique et d'un design attrayant. Elle est pourvue d'un puissant moteur d'aspiration à connexion automatique lorsqu'on abaisse le porte plaques. La résistance est en carbone ce qui permet un réchauffement progressif et uniforme du matériau

à thermoformer. Elle accepte tant les plaques carrées. La machine est fournie avec un porte plaques plat et avec un panier qui, rempli de grenaille (un pot fourni), réduit la profondeur du thermoformage.

(L) 197 x (W) 267 x (H) 337 mm | 5,7 kg



Thermoformeuse à pression PlastPress

Réf. 080544

La thermoformeuse à pression positive la plus compacte du marché. Meilleure fidélité de copie et moins de bruit par rapport aux thermoformeuses à vide. Pratique et polyvalente, elle accepte des plaques rondes et carrées jusqu'à 6 mm d'épaisseur. Elle doit être reliée à un compresseur (entre 3 et 8 bar).

(L) 310 x (W) 270 x (H) 310 mm | 8,5 kg



Thermoformeuse à pression

Réf. 080543

Machine à technologie avancée pour un thermoformage de précision. Convient à des laboratoires et ou à des cabinets ayant un recours régulier à cette technique. Accepte des plaques carrées ou rondes (127, 125, 120 mm) de toutes les épaisseurs (de 0.5 à 4.0 mm).

Dimensions	260 x 410 x 545 mm	Consommation	450 W
Poids	15 kg	Pression	4-6 bar



Four de séchage pour plaques de thermoformage

Réf. 080118

Air chaud ventilé pour un séchage homogène.

✓ Extrait l'humidité et maintient sèches les plaques de thermoformage évitant la formation de porosités.

✓ Peut sécher les zircons teintés manuellement, modèles etc.
✓ Carcasse et 6 plateaux en acier inox.
✓ Minuterie de 24 heures.

Dimensions	450 x 340 x 310 mm	Consommation	550-650 W
Poids	8,3 kg	Température	35-75°C

Planches de thermoformage

MESTRA

DOUBLE SACHET:

- Sachet extérieur métallisé, sous vide et auto-scellant.
- Sachet intérieur contenant les feuilles.

MATERIAL	MM	QTY	REFERENCE
CLEAR Duras Hart Hard Rígidas Rigides Rígide	0,8	10	080801-10
		25	080801-25
	1,0	10	080802-10
		25	080802-25
	1,5	10	080803-10
		25	080803-25
	2,0	10	080804-10
		25	080804-25
	1,0	10	080812-10
	1,5	10	080813-10
MOUTHGUARD Blandas Weich Soft Flexíveis Súplies Morbide	2,0	10	080814-10
	3,0	5	080815-05

POUR TOUS TYPES D'UTILISATIONS:

- Aligneurs orthodontiques
- Appareils orthodontiques
- Aligneurs dentaires
- Mainteneurs d'espace
- Gouttières occlusales (bruxisme)
- Plaques d'enregistrement pour guides chirurgicaux
- Traitement post-prothétique
- Plaques d'enregistrement
- Dispositifs de déprogrammation
- Bases pour prothèses complètes
- Gouttières individuelles
- Guides chirurgicaux
- Dispositifs pour l'apnée du sommeil
- Gouttières de blanchiment
- Gouttières fluorées
- Protège-dents sportifs

Planches de thermoformage



Fabriquées en plastique de haute qualité avec certificats CE en tant que produit sanitaire. L'absence de matière recyclée empêche le déchirement lorsque les plaques sont soumises au vide ou à la pression.

Réf.	Type	Dureté	Apparence	Dimension	Épaisseur	Qty.
080574	Cristal	Dures	Transparent	126x126	0.3 mm	10
080575	Cristal	Dures	Transparent	126x126	0.75 mm	5
080576	Cristal	Dures	Transparent	126x126	1.0 mm	5
080577	Cristal	Dures	Transparent	126x126	1.5 mm	5
080578	Cristal	Dures	Transparent	126x126	2.0 mm	5
080579	Blanchâtre	Dures	Translucide	126x126	0.6 mm	10
080580	Soft	Molles	Translucide	131x131	1.0 mm	10
080581	Soft	Molles	Translucide	131x131	1.5 mm	10
080582	Soft	Molles	Translucide	131x131	2.0 mm	10
080583	Soft	Molles	Translucide	131x131	3.0 mm	5
080584	Soft	Molles	Translucide	131x131	4.0 mm	5

Réf.	Type	Dureté	Apparence	Dimension	Épaisseur	Qty.
080574R	Cristal	Dures	Transparent	Ø125	0.3 mm	10
080575R	Cristal	Dures	Transparent	Ø125	0.75 mm	5
080576R	Cristal	Dures	Transparent	Ø125	1.0 mm	5
080577R	Cristal	Dures	Transparent	Ø125	1.5 mm	5
080578R	Cristal	Dures	Transparent	Ø125	2.0 mm	5
080579R	Blanchâtre	Dures	Translucide	Ø125	0.6 mm	10
080580R	Soft	Molles	Translucide	Ø125	1.0 mm	10
080581R	Soft	Molles	Translucide	Ø125	1.5 mm	10
080582R	Soft	Molles	Translucide	Ø125	2.0 mm	10
080583R	Soft	Molles	Translucide	Ø125	3.0 mm	5
080584R	Soft	Molles	Translucide	Ø125	4.0 mm	5




CE Dispositif médical

MÉTHODES DE FERMETURE:

En plus d'utiliser la fermeture prévue sur le sachet, il est conseillé d'effectuer un double pli à l'extrémité et de le fixer à l'aide de pinces ou de trombones afin de garantir une fermeture hermétique



CE Dispositif médical

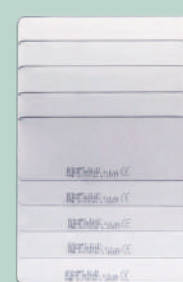

Moteur endodontique

(sans-fil)

Réf. 100350

- ✓ Design optimisé pour l'interface de l'utilisateur.
- ✓ Corps ergonomique et compact.
- ✓ 5 Programmes en mémoire.
- ✓ De 100 à 600 t/min.
- ✓ Fonctions Auto et auto-stop.



Maximum	100-600 rpm
Torque	1-4 N-cm
Puissance	230 W
Alimentation	Batteries

(L) 240 x (W) 170 x (H) 80 mm
0,7 kg




Localisateur d'Apex

Réf. 100330

- ✓ Calibration automatique, écran LCD image nette et précise.
- ✓ Différenciation par couleurs.
- ✓ Accessoires stérilisables.
- ✓ Batterie rechargeable.

Dimensions 80 x 138 x 110 mm
Poids 0,4 kg


(L) 230 x (W) 155 x (H) 112 mm | 0,8 kg

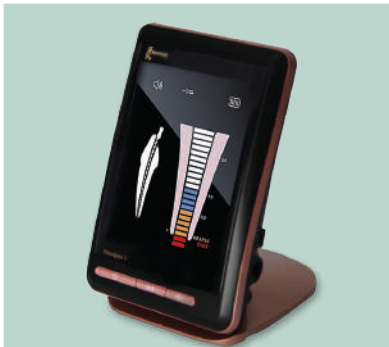

Coupeur de pointes de gutta-percha

Réf. 100349


- ✓ La pointe a la propriété d'être flexible pour pouvoir être coupée sans problème.
- ✓ En appuyant sur le bouton d'alimentation, la pointe chauffera immédiatement jusqu'à 500 °C.
- ✓ Relâchez le bouton et la pointe refroidira rapidement.
- ✓ Couvrir l'embout avec le capuchon après utilisation.
- ✓ Placez l'appareil sur sa base.

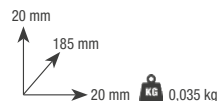

Voltage	2 batteries AA (3V cc)
Température	>500 °C
Refroidissement	Moins d'une seconde
Moyen	3 cm x 2,5 cm
3 pointes	(L: 2,0 mm - M: 1,2 mm - S: 0,5 mm)


(L) 180 x (W) 70 x (H) 35 mm | 0,12 kg

NEW

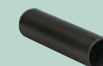

2 batteries AA (3V cc)


- ✓ Large spectre d'illumination (de 420 à 472 nm)
- ✓ Puissance élevée (jusqu'à 2000 mW/cm²).
- ✓ Display digital.
- ✓ Télécommande à distance.
- ✓ Elle est livrée avec 20 férules buccales jetables, deux paires de lunettes de protection, et d'un écarteur labial.

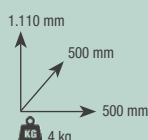

Lampe pour blanchiment

Réf. 100340

- ✓ large spectre d'éclairage.
- ✓ 5 Feux bleus, 2 feux rouges.
- ✓ 3 types de sources lumineuses LED différentes: bleu, rouge, (rouge + bleu).
- ✓ 8 lumières violettes avec effet stérilisant.
- ✓ Fabriqué en matériau métallique, facile à assembler.
- ✓ Temps de blanchiment réglable.

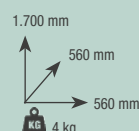


Lampe pour blanchiment

Réf. 100341



Fréquence de mélange	5000 T/min
Plage de la minuterie	4 ~ 60 s
Dimensions	40 W
Alimentation	230 V, 50 Hz

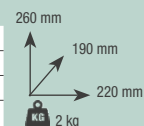

Agitateur de capsules

Réf. 100625

- ✓ Grande vitesse
- ✓ Compatibilité universelle
- ✓ Contrôle numérique de précision

- ✓ Design ergonomique et sûr
- ✓ Stabilité et fonctionnement silencieux
- ✓ Durabilité


NEW

Caméra intra-orale

(avec autococus système)

Réf. 100336

- ✓ Écran tactile LCD de 21,5 pouces.
- ✓ Appareil photo haute définition (4K).
- ✓ Autofocus.
- ✓ Enregistrement d'images et de vidéos sur mémoire USB.
- ✓ Code QR pour le téléchargement d'images via WIFI.
- ✓ Prise en charge des barres.
- ✓ Système Android.
- ✓ Affichage de 1 ou 4 images sur l'écran.

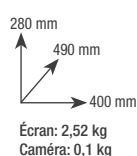

Réchauffeur de composites

Réf. 080077

Dispositif pour maintenir les seringues chaudes en composite.

Température	40-50 y 70°C
Ø des trous	16 mm
Alimentation	100 a 240 V



NEW



Fabriqué en Espagne

Siège ergonomique

Roues avec freins de sécurité
Règlement européen
(EN 1335-2:2009)

Réf. 100300

(Kit) Etabli spécial retouches **Réf. 100301 K2**

- ✓ Etabli métal, dessus mélaminé+étagère.
- ✓ Siège ergonomique.
- ✓ Mini tour à polir + 2 plateaux.
- ✓ Micromoteur.

- ✓ Lampe LED

OFFRETS:

- Loupe de table.
- Porte-fraises magnétique.

(L) 950 x (W) 610 x (H) 100 mm | 63 kg

Fabriqué en Espagne

- 1 100301-04 Cheville aspirante.
- 2 100301-05 Support cheville.
- 3 100301-02 Tube métallique.
- 4 080530-04 Tuyau souple (1 m)


Etabli

Réf. 100301

Etabli 1 place structure acier dessus bois mélaminé.

Le montage est simple. Equipé de 2 prises, 1 étagère, un tiroir, prédisposition pour une cheville aspirante. Orifices pour recevoir une soufflette et un micro-moteur.

(L) 900 x (W) 600 x (H) 660 mm | 46 kg

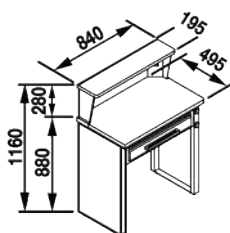

Sièges ergonomique

NEW

Sièges de travail spécialement conçus pour le laboratoire.

Confortables, ergonomiques et d'entretien aisé. Permet un réglage en hauteur de l'assise. Le siège est fabriqué en mousse de polyuréthane noir. Lavable et très résistant à l'usure.

	Réf. 100297	Réf. 100298
Hauteur max. l'assise	660 mm	555 mm
Hauteur min. l'assise	460 mm	420 mm
Profondeur l'assise	450 mm	450 mm
Largeur l'assise	460 mm	460 mm
Poids	9 kg	8 kg

Roues avec freins de sécurité (EN 1335)



Siège ergonomique

Réf. 100299

Permet 4 réglage différents: hauteur et inclinaison du siège et hauteur et angle d'inclinaison de l'assise.

Hauteur max.	555 mm
Hauteur min.	420 mm
Profondeur	450 mm
Largeur	460 mm
Poids	10.3 kg

Roues avec freins de sécurité (EN 1335)



Siège ergonomique

Réf. 100300

Permet 4 réglages différents: hauteur et inclinaison du siège et hauteur et angle d'inclinaison de l'assise.

Roues avec freins de sécurité (EN 1335)

Hauteur max. l'assise	515 mm
Hauteur min. l'assise	390 mm
Bas de siège	420 mm
Largeur d'assise	420 mm
Poids	9 kg

(L) 610 x (W) 610 x (H) 325 mm | 10,5 kg



Siège Poni sans dossier **Réf. 100600**



Roues avec freins de sécurité (EN 1335)

Hauteur max. l'assise	730 mm
Hauteur min. l'assise	530 mm
Bas de siège	320 mm
Largeur d'assise	360 mm
Poids	7 kg

NEW




Siège Poni avec dossier

Réf. 100602

- ✓ Hauteur réglable.
- ✓ Cuir PU de haute qualité.
- ✓ Mousse haute résilience.
- ✓ Barre d'admission pneumatique à quatre niveaux. Sûr et fluide. Certifié TUV et SGS.
- ✓ Joint d'huile hydraulique. Protection multiple, aucune fuite d'huile ou d'air. Longue durée de vie.
- ✓ Nettoyage du filtre à huile. Dispositif de raclage d'huile intégré.



Roues avec freins de sécurité (EN 1335)

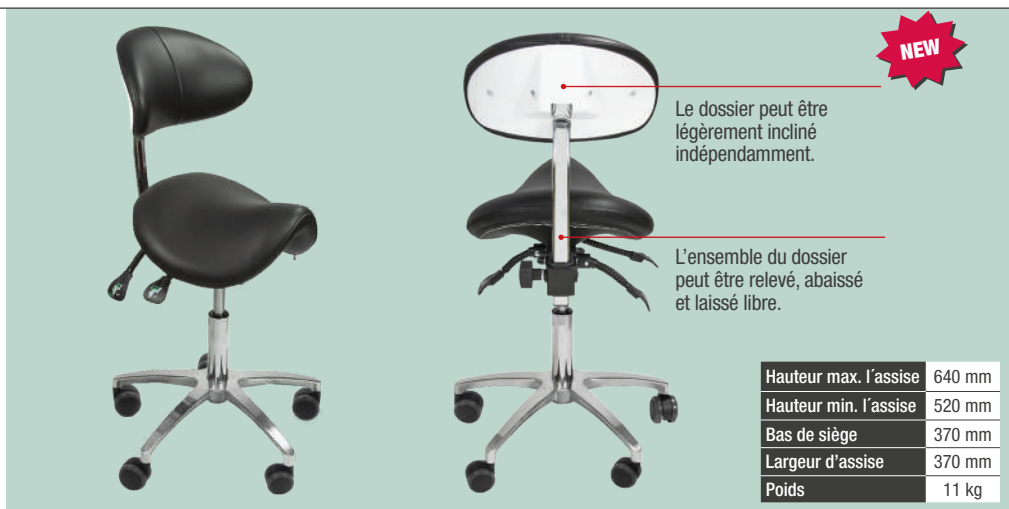

Chariot 2 roues

Réf. 100451


- ✓ Fabriquée en acier inoxydable.
- ✓ Plateau amovible (495 x 345 mm)



Chariot 5 roues

Réf. 100452

- ✓ Fabriquée en acier inoxydable.
- ✓ Plateau amovible (495 x 345 mm)

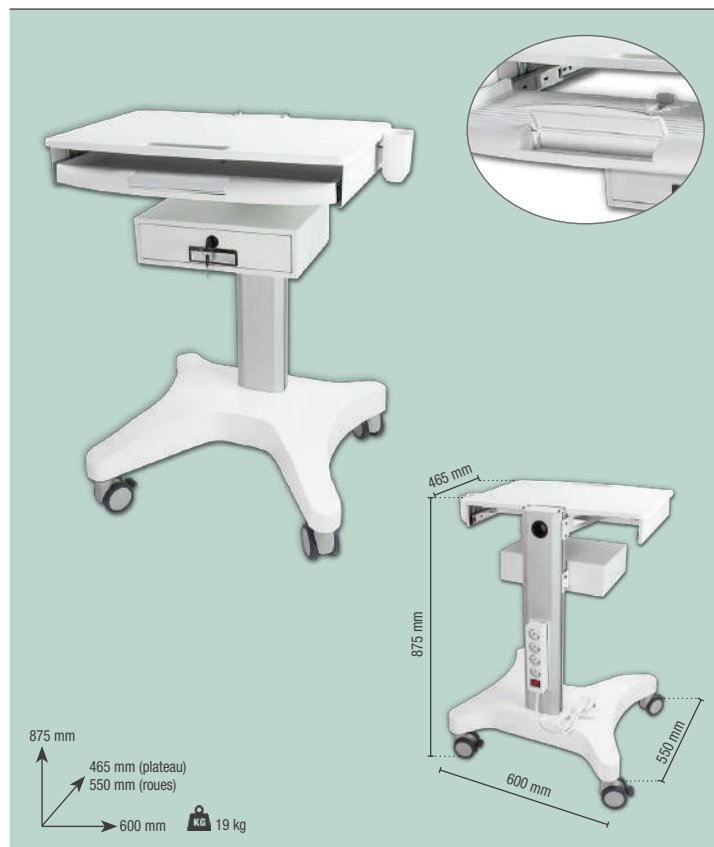

Chariot pour scanner

Réf. 100450

- ✓ Matériaux: plastique antibactérien, aluminium et acier.



Chariot pour scanner avec prise en CPU

Réf. 100449

- ✓ Matériaux: plastique antibactérien, aluminium et acier.




Chariot électrique mobile

Réf. 100305

Fabriqué en acier émaillé en blanc.

- ✓ 3 plateaux de 40 x 30 cm.
- ✓ 2 prises de courant pour alimenter les équipements.
- ✓ 4 roues. Déplacement équilibré et doux.

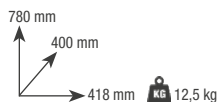

(L) 510 x (W) 420 x (H) 840 mm | 15 kg




Chariot électrique mobile

Réf. 100306

Fabriqué en acier émaillé en blanc.

- ✓ 3 plateaux en verre.
- ✓ 2 prises de courant pour alimenter les équipements.
- ✓ 4 roues. Déplacement équilibré et doux.

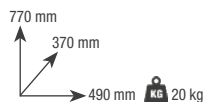

(L) 575 x (W) 560 x (H) 845 mm | 25,5 kg




Chariot électrique mobile

Réf. 100307

Fabriqué en acier émaillé en blanc.

- ✓ 3 plateaux de 290 x 396 mm
- ✓ 3 prises de courant pour alimenter les équipements.
- ✓ 4 roues. Déplacement équilibré et doux.
- ✓ Poids supporté par plateau, 5 kg.

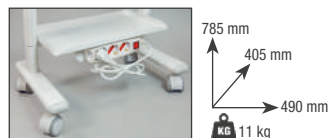

(L) 430 x (W) 520 x (H) 860 mm | 12 kg




Chariot électrique mobile

Réf. 100308

Fabriqué en acier émaillé en blanc.

- ✓ 3 plateaux 290 x 396 mm.
- ✓ 3 prises de courant pour alimenter les équipements.
- ✓ 1 tiroir.
- ✓ 4 roues. Déplacement équilibré et doux.
- ✓ Poids supporté par plateau, 5 kg.

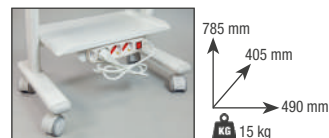

(L) 430 x (W) 520 x (H) 860 mm | 16 kg




Chariot électrique mobile

Réf. 100309

NEW

Chariot métallique à roulettes pour la clinique dentaire. Fabriqué en acier robuste émaillé blanc et en résine.

- ✓ 3 prises de courant pour alimenter les équipements.
- ✓ 3 tiroirs.
- ✓ 1 prise de courant.
- ✓ Couleur blanche.
- ✓ Déplacement équilibré et doux.

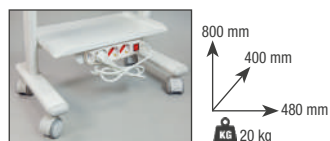

(L) 480 x (W) 540 x (H) 840 mm | 21 kg




Chariot à monter

Réf. 100307M

NEW

Fabriqué en acier émaillé en blanc.

- ✓ 3 plateaux de 290 x 396 mm
- ✓ 3 prises de courant pour alimenter les équipements.
- ✓ 4 roues. Déplacement équilibré et doux.
- ✓ Poids supporté par plateau, 5 kg.

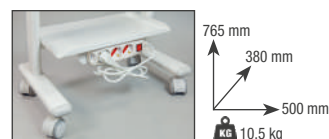

EMBALLAGE RÉDUIT:
(L) 460 x (W) 780 x (H) 120 mm | 11,5 kg



Support pour chariot

Réf. 100450-01

NEW

Chariot à déchets

Réf. 100440

Réf. 100442

Deux conteneurs mobiles conçus pour le transport sécurisé des déchets médicaux infectieux. Leur conception simple et fonctionnelle leur permet de s'intégrer dans n'importe quel environnement.

Disponible pour 40 l ou 60 l.

Réf. 100440 - 40 L	
Haut. 568 mm	Larg. 296 mm
Prof. 404 mm	Poids 11 kg

Réf. 100442 - 60 L	
Haut. 618 mm	Larg. 346 mm
Prof. 454 mm	Poids 14 kg



NEW

Réchauffeur de plaques de cire

Réf. 080078

Appareil très pratique pour les applications qui nécessitent un maintien précis de température (polymérisation de petits éléments, plaques de cire pour mordus etc.).

Il dispose d'une cuve de 1 litre en acier inoxydable facile d'entretien. La carcasse est en polyuréthane de haute densité, très résistant aux agents chimiques.

Le contrôle de température du bain est réalisé par un thermostat électronique qui allie facilité d'emploi et grande précision dans le maintien en température programmée. La température peut se programmer de 30 à 75°C.

Une résistance puissante permet d'atteindre la température requise en peu de temps.

Hauteur	146 mm	Alimentation	230 V
Largeur	230 mm	Température	30-75 °C
Profondeur	195 mm	Puissance	310 W
Poids	1.7 kg	Capacité	1 l.

(L) 300 x (W) 300 x (H) 200 mm | 2 kg



Compresseurs à piston sec

NE CONVIENT PAS AUX FRAISEUSES

Famille de quatre compresseurs composée de deux tailles de 80 et 160 litres/minute auxquelles peut être couplé un sécheur avec purge automatique.

Fonctionnement extrêmement silencieux (60 dB), entretien facile (piston sec) et excellente fiabilité.

Ils sont fournis avec deux manomètres (chaudière et pression de service), un régulateur de pression de sortie et un jeu complet de vannes pour la purge. La pression de service peut atteindre 8 bars.

Réf. 110300 - Compresseur: 80 l/min
Réf. 110310 - Compresseur: 80 l/min (+ dessiccateur)
Réf. 110330 - Compresseur: 160 l/min
Réf. 110340 - Compresseur: 160 l/min (+ dessiccateur)




Comment savoir si mon compresseur est conforme aux normes de sécurité européennes?

Il est facile de trouver des compresseurs dentaires fabriqués en Orient qui ne respectent pas les normes de sécurité européennes en vigueur.

Pour cette raison, il convient de vérifier ses caractéristiques et son cachet de sécurité: il s'agit d'une plaque soudée à la chaudière semblable à la photo ci-jointe. A côté du symbole CE, vous pouvez voir le numéro de l'organisme notifié qui a validé son adaptation aux normes européennes.

1. La Réf. 110340 est également disponible avec un filtre HEPA (H14) Réf. 110340H
2. Le filtre à charbon actif Réf. 110300-53 est disponible en accessoire pour tous les compresseurs.

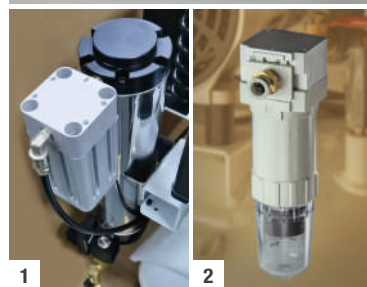

Référence	110300	110310	110330	110340
Puissance	750 W	750 W	1500 W	1500 W
Caudale (a 4 bars)	80 l/min	80 l/min	160 l/min	160 l/min
Niveau sonore	53 dB	53 dB	54 dB	54 dB
Pression	5-8 bar	5-8 bar	5-8 bar	5-8 bar
Capacité	30 l	30 l	50 l	50 l
N. têtes	1	1	2	2
Profondeur	390 mm	540 mm	370 mm	480 mm
Largeur	390 mm	390 mm	680 mm	680 mm
Hauteur	650 mm	650 mm	750 mm	750 mm
Poids	30 kg	37 kg	58 kg	66 kg

CERTIFICAT pour TÜV SÜD Certificat de type N° 12202200491258001
Directive 2014/29/UE (récepteur sous pression)

Anneau d'aspiration humide

Réf. 100345


Conçue pour un fonctionnement pratique et fiable cette machine est d'une réponse rapide: Elle détecte le signal de démarrage et obtient le niveau de vide optimal en très peu de temps. Son fonctionnement est très silencieux et de plus la pompe ne requiert pas d'entretien particulier sa technologie est conçue pour séparer l'air de l'eau avec les résidus.

La puissance de succion reste régulière tout le long de son fonctionnement. Cette unité est adaptée pour un poste de travail en utilisation intensive ou deux postes à utilisation modérée.

(L) 470 x (W) 430 x (H) 650 mm | 25 kg

Dimensions	360 x 405 x 585 mm
Poids	27 kg
RPM	0-4000
Airflow	300 l/min
Puissance	750 W
Niveau sonore	58 dB




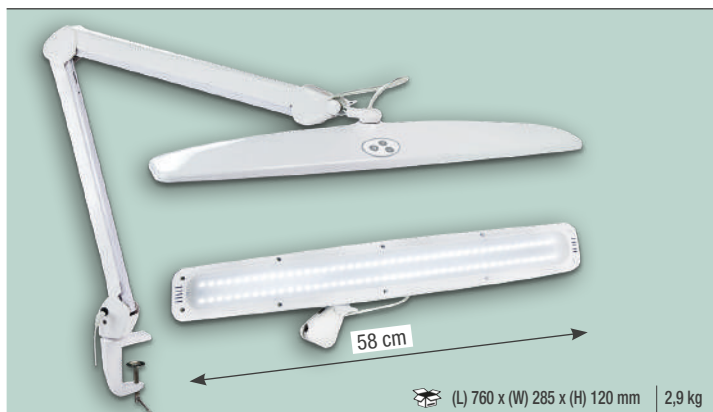

Lampe LED (avec bras articulé)

Réf. 100288


- ✓ 84 grandes LED
- ✓ Température de couleur 6.000-7.000 K
- ✓ Consommation électrique 2 à 21 W
- ✓ Touchez l'intensité lumineuse réglable.
- ✓ Sans scintillement.
- ✓ Avec pince pour fixation à la table.
- ✓ Bras articulé très résistant.

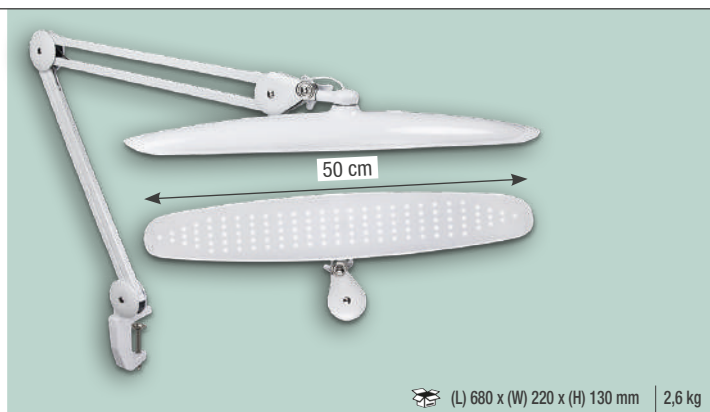

Lampe LED (avec bras articulé)

Réf. 100290

- ✓ 117 petites LED
- ✓ Température de couleur 5600 - 6000 K
- ✓ Consommation électrique 6 à 24 W
- ✓ Sans scintillement
- ✓ Avec pince pour fixation à la table

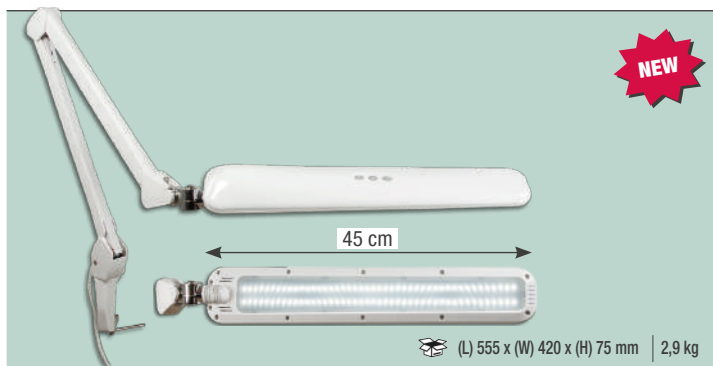

Lampe LED (avec bras articulé)

Réf. 100289

- ✓ 90 LEDs grandes
- ✓ Température de couleur 6000-7000 K
- ✓ Intensité lumineuse réglable par touche
- ✓ Avec pince pour fixation à la table.




Loupe avec éclairage LED

Réf. 100287 (3 dioptries)

Réf. 100287-5x (5 dioptries)

- ✓ 90 LEDs blancs.
- ✓ Loupes de 3 - 5 dioptries.
- ✓ Diamètre loupe 120 mm.
- ✓ Avec pince d'accroche pour établi.

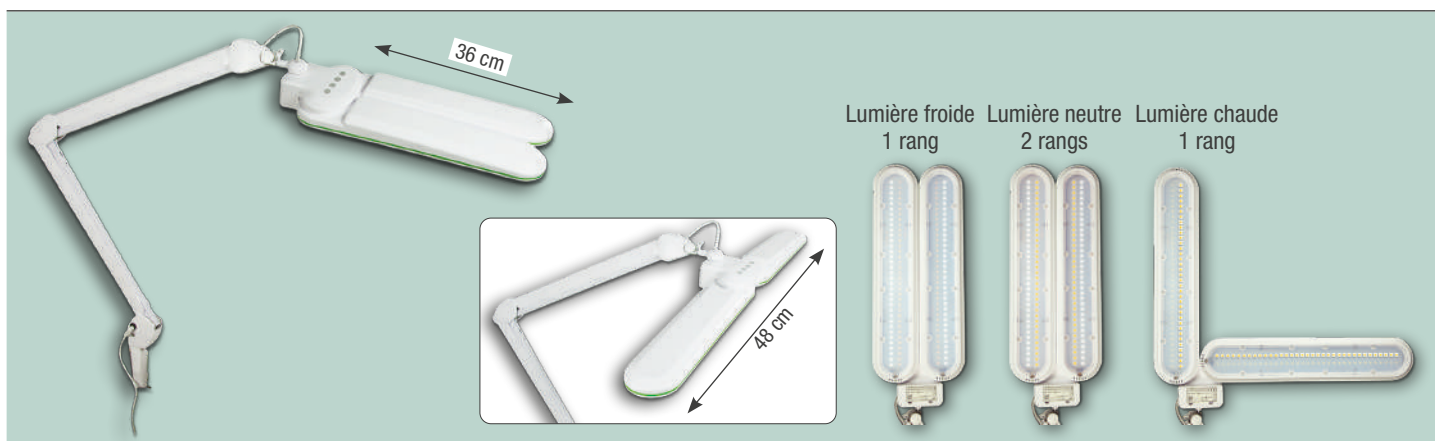

Lampe LED (avec bras articulé)

Réf. 100289V

- ✓ 180 LEDs
- ✓ Température de couleur 6500 - 200 K
- ✓ Énergie consommée 30 W
- ✓ 3 types de lumière: froide, neutre et chaude.
- ✓ Intensité lumineuse réglable par touche.
- ✓ Pas d'effet de scintillement.
- ✓ Avec pince pour fixation à la table.

NEW



Accessoires pour lampes et loupes

Réf. 100287 - 100287-5X - 100288 - 100290

Description	Page
ADERER, PINCE	4
AIR, PURIFICATEUR	26
AGITATEUR DE CAPSULES	32
ALCOOL, LAMPE	11
ALGINATE, BOL	3
ALGINATE, MELANGEUR	30
ALGINATE, RESERVOIR	30
ALGINATE, SPATULE	3
AMALGAME, SERINGUE	5
AMALGAMES, MORTIER	5
ANGLE, PINCE	4
ANNEAU D'ASPIRATION HUMIDE	36
APEX, LOCALISATEUR	31
ARC PORTE-COFFERDAM	9
ASPIRATION EXTRA-ORALE	25
ASPIRATION, ANNEAU HUMIDE	32
ASPIRATION, SIROCCO	28
AUTOCLAVE	17
BAC DE DECANTATION	22-23
BALANCE	8
BARRE DE SUPPORT POUR TRAVAUX	15
BARRIER FILM	24
BLANCHIMENT, LAMP	31
BOBINE POUR THERMOSOUDEUSE	24
BOITE A APPAREIL ORTHODONTIE	13
BOITE A ENDODONTIE	13
BOITE A MODELES PLASTIQUE	14
BOITE A PROTHESE	13
BOITE DE RANGEMENT POUR MODELES	13
BOITE DE TRANSPORT	14
BOITE POUR COTON	11
BOITES	13
BOÎTES A PLAQUES D'ORTHODONTIE	13
BOÎTES A PROTHESES	13
BOÎTES POUR STOCKER LES MODELES	13
BROSSES POUR PROPHYLAXIE	10
CABINET, UV	27
CABINES DE DÉSINFECTION UV	27
CABINE DE STOCKAGE HYGIÉNIQUE	27
CALYPSO	22
CAMERA INTRAORALE	31
CHARIOT	35
CHARIOT À DÉCHETS	35
CIMENT, SPATULE	4
CIRE, PK THOMAS SPATULES	4
CLAMPS, PINCE	4
CLAMPS, PORTE	4
COFFERDAM ARC	9
COMPAS D'ÉPAISSEUR	6
COMPOSITES, RECHAUFFEUR	31
COMPRESSEURS	36
CORDON	13
COTON BOITE	11
COTON, DISTRIBUTEUR DE ROULEAUX	11
COUPE GUTTA-PERCHA	31
CUEILLERE DOSEUR	8
DAPPEN, GODETS	3
DECONTAMINATEUR DE FRAISES	10
DESINFECTANT, NEBULISER	27
DEVELOPPEUR MANUEL	6
DISTILLER ET A DECALCIFIER, MACHINE	19
DISTRIBUTEUR DE GOBELETS	11
DISTRIBUTEUR DE ROULEAUX DE COTON	11
DOSEUR, CUEILLERE	8
DOSEURS DE LIQUIDES	11
EAU DISTILLEE, RESERVOIR	19
ECARTEUR DE LEVRES	9
ECRAN DE PROTECTION UV	7

Description	Page
EMBOUT MELANGEUR	12
ENDODONTIE, BOITE	16
ENDODONTIE, MOTEUR	16
ENDODONTIE, REGLE POUR CALIBRAGE	14
EXTRA-ORALE, ASPIRATION	25
FOUR DE SECHAGE	28
FOX, PLAN	9
FRAISES, DECONTAMINATEUR	10
FRAISES, PINCE A NETTOYER	9
FRAISES, STERILISER	10
GOBELETS, DISTRIBUTEUR	10
GOBELETS POUR PROPHYLAXIE	9
GODETS DAPPEN	3
GUTTA-PERCHA, COUPE	31
INCUBATEUR POUR INDICATEURS BIOLOGIQUES	19
INDICATEURS BIOLOGIQUES, INCUBATEUR	19
INTRAORAL, CAMERA	31
IVORY, PERFOREUSE DE DIGUES	4
JOUETS	10
LAMP POUR BLANCHIMENT	31
LAMPE A ALCOOL	11
LAMPE LED	37
LAMPE À POLYMERISER	21
LEVRES, ECARTEUR	9
LOCALISATEUR D'APEX DPEX III	31
LOUPE ECLAIRANTE	36
LOUPE FRONTALE	7
LOUPES	7
LUNETTES DE SECURITE	7
MAGNETIQUE, PORTE-FRAISES	10
MAGNETIQUE, SUPPORT PORTE-INSTRUMENTS	3
MANCHE DE MIROIR	5
MANCHE POINTES MORSE	5
MARTEAU ARRACHE COURONNES	5
MATHIEU, PINCE	4
MELANGEUR ALGINATE	29
MELANGEUR POUR SILICONES	29
MICROAPPLICATEURS	9
MICROMOTEURS CONNEXION INTRAMATIQUE	28
MINIMODULES DE SABLAGE	22
MIROIRS	5
MORTIER POUR AMALGAMES	5
MOTEUR POUR L'ENDODONTIE	31
NEBULISEUR ELECTRIQUE POUR DESINFECTANT	27
NETTOYEUR À ULTRASON	20
NEGATOSCOPE	8
OCCLUSEUR DOUBLE GUIDE	3
PERFORATRICE DE DIGUES	4
PINCE A NETTOYER LES FRAISES	9
PINCE A RADIOS DENTAIRES	8
PINCE A STERILISER	5
PINCES	4
PINCES, SUPPORT	4
PISTOLET DISTRIBUTEUR DE SILICONE	12
PISTOLET SABLAGE	19
PK THOMAS SPATULES	4
PLAN DE FOX	9
PLANCHES DE THERMO-FORMAGE	29
PLASTPRESS	28
PORTE-EMPREINTES	12-13
PORTE-FRAISES	10
PORTE-MATRICES	5
PORTE-SERVIETTES	9
PROTECTEUR FACIAL	7
PULVÉRISATEUR-NÉBULISEUR	26
PURIFICATEUR D'AIR	27
RADIOS DENTAIRES, PINCE	8
RECHAUFFEUR DE COMPOSITES	31

Description	Page
RECHAUFFEUR POUR PLAQUES DE CIRE	36
REGLE POUR CALIBRAGE DES LIMES	16
RESERVOIR D'EAU DISTILLEE	19
RESERVOIR ETANCHE POUR L'ALGINATE	30
SACHETS DE STÉRILISATION AUTOCOLLANTE	24
SCHWARZ, PINCE	4
SECHAGE, FOUR	28
SERINGUE PORTE-AMALGAME	5
SIEGE ERGONOMIQUE	33
SILICONES, MELANGEUR	30
SIROCCO, ASPIRATION	28
SOCLES	3
SOUDURE, SUPPORT A PINCES	4
SPATULE A CIMENT	4
SPATULE ALGINATE	3
SPATULES PK THOMAS	4
STERILISER, PINCE	5
SUPPORT A PINCES POUR SOUDURE	6
SUPPORT POUR CHARIOT	35
SUPPORT MAGNETIQUE PORTE-INSTRUMENTS	3
SUPPORT PORTE-PINCES	4
SUPPORT POUR INSTRUMENTS	6
SUPPORT POUR TRAVAUX, BARRE	15
TABLE DE FINITION	33
TERMOPLAST	28
THERMOFORMEUSE	28
THERMOFORMEUSE - PRESSION	28
THERMOFORMEUSE - PRESSION - PLASTPRESS	28
THERMO-SOUDEUSE DE SACS	24
TRANSPORT, BOITE	14
ULTRASONS, BAC	22-23
ULTRASONS DE TABLE	22
UV CABINET	27
UV, ECRAN DE PROTECTION	7
UV, LUNETTES DE PROTECTION	7
WALDSACHS, PINCE	4
WEINGART, PINCE	4



MESTRA

Talleres Mestraitua SL
(+34) 944 530 388
info@mestra.es - www.mestra.es
48150 SONDIKA (Spain)



Système de
management
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 1100018003